

Ventana Principal de Almacén de Repuestos

Se explican los comandos y ventanas del módulo.



Escrito por WIN Software
Nov 10, 2022

Ventana Principal de Almacén de Repuestos

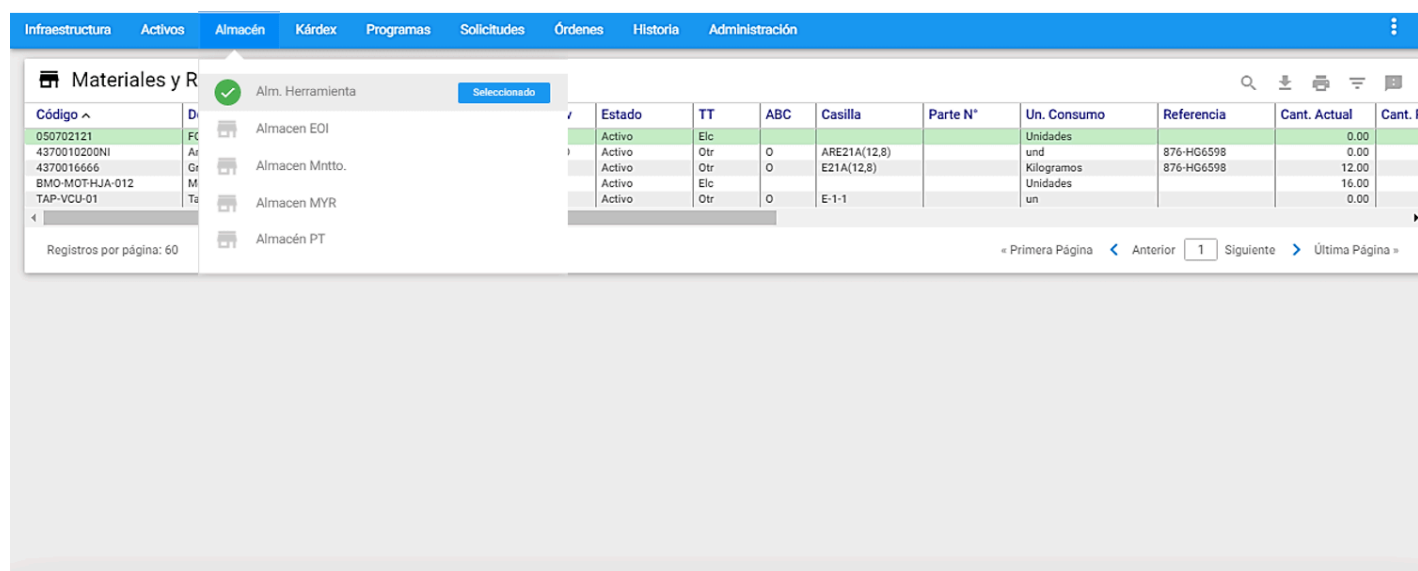


Imagen 1. Menú Almacenes

Al sobreponer el cursor en el módulo de **almacén** se listan los almacenes creados en la tabla de Almacenes de la Infraestructura y cuando se elige un Almacén, el sistema muestra al lado izquierdo del nombre del respectivo almacén un  en color verde y en frente en azul, el aviso **seleccionado**.

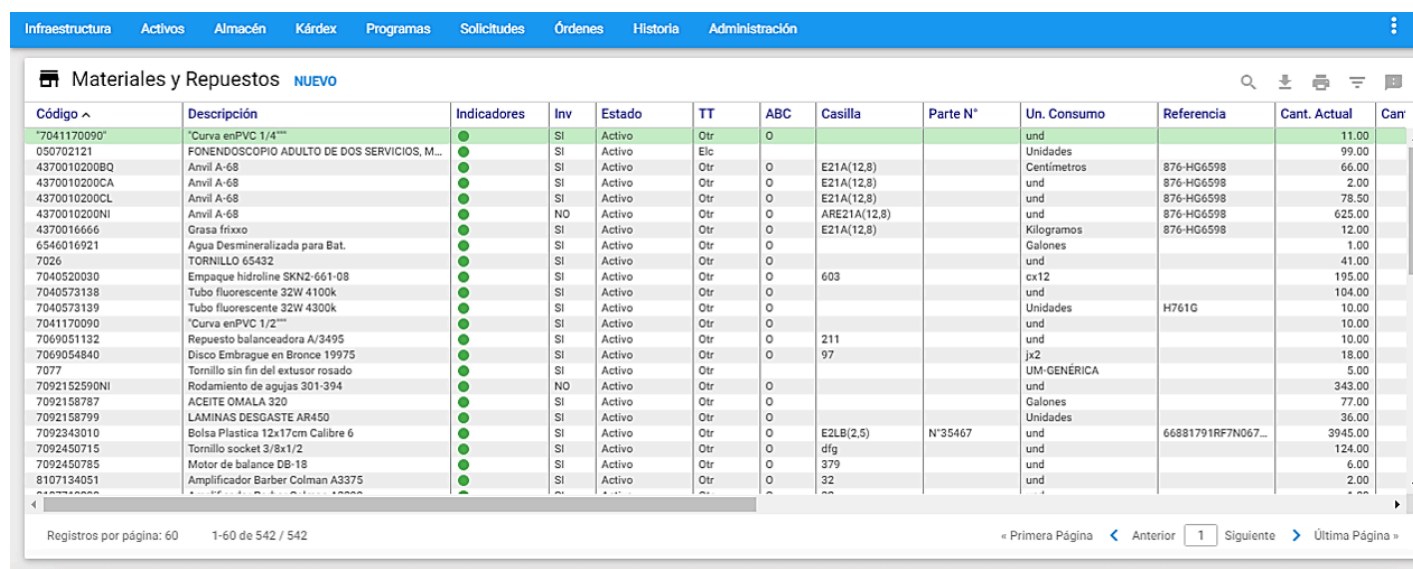


Imagen 2. Ventana Principal Repuestos

A esta ventana se llega haciendo clic sobre la opción **almacén** del Menú Principal. A través de ella se ejecutan todas las funciones dedicadas a administrar los Almacenes de Repuestos para Mantenimiento. A continuación se ilustran las porciones que la componen.

Ventana Visor

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesÓrdenesHistoriaAdministración

Material

Material

Materiales y Repuestos

NUEVO

🔍

📄

🖨

☰

🗨

Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual	Can
7041170090	*Curva enPVC 1/4"	●	SI	Activo	Otr	0			und		11.00	
050702121	FONENDOSCOPIO ADULTO DE DOS SERVICIOS, M...	●	SI	Activo	Elc	0			Unidades		99.00	
437001020BQ	Anvil A-68	●	SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		Centímetros	876-HG6598	66.00	
437001020CA	Anvil A-68	●	SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		und	876-HG6598	2.00	
437001020CL	Anvil A-68	●	SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		und	876-HG6598	78.50	
437001020NI	Anvil A-68	●	NO	Activo	Otr	0	ARE21A(12,8)		und	876-HG6598	625.00	
4370016666	Grasa fñiso	●	SI	Activo	Otr	0	E21A(12,8)		Kilogramos	876-HG6598	12.00	
6546016921	Agua Desmineralizada para Bat.	●	SI	Activo	Otr	0			Galones		1.00	
7026	TORNILLO 65432	●	SI	Activo	Otr	0			und		41.00	
7040520030	Empaque hidrolíne SKN2-661-08	●	SI	Activo	Otr	0	603		cx12		195.00	
7040573138	Tubo fluorescente 32W 4100k	●	SI	Activo	Otr	0			und		104.00	
7040573139	Tubo fluorescente 32W 4300k	●	SI	Activo	Otr	0			Unidades	H761G	10.00	
7041170090	*Curva enPVC 1/2"	●	SI	Activo	Otr	0			und		10.00	
7069051132	Repuesto balanceadora A/3495	●	SI	Activo	Otr	0	211		und		18.00	
7069054840	Disco Embrague en Bronce 19975	●	SI	Activo	Otr	0	97		ju2		18.00	
7077	Tornillo sin fin del extusor rosado	●	SI	Activo	Otr	0			UM-GENÉRICA		5.00	
7092152590NI	Rodamiento de agujas 301-394	●	NO	Activo	Otr	0			und		343.00	
7092158787	ACEITE OMALA 320	●	SI	Activo	Otr	0			Galones		77.00	
7092158799	LAMINAS DESGASTE AR450	●	SI	Activo	Otr	0			Unidades		36.00	
7092343010	Bolsa Plastica 12x17cm Calibre 6	●	SI	Activo	Otr	0	E2LB(2,5)	N°35467	und	66881791RF7N067...	3945.00	
7092450715	Tornillo socket 3/8x1/2	●	SI	Activo	Otr	0	dfg		und		124.00	
7092450785	Motor de balance DB-18	●	SI	Activo	Otr	0	379		und		6.00	
8107134051	Amplificador Barber Colman A3375	●	SI	Activo	Otr	0	32		und		2.00	

Registros por página: 60

1-60 de 542 / 542

« Primera Página

< Anterior

1

Siguiente >

Última Página »

Imagen 3. Ventana Visor

Desde esta ventana es posible observar los Repuestos existentes. Se listan todos o un Subgrupo de ellos. Es posible configurar el número de registros que se muestran por página desde el menú **administración** en la opción “Valores por Defecto” en la etiqueta **General**.

Al hacer clic sobre alguno de los Repuestos del Visor el sistema responde mostrando la información de ese Repuesto, en forma detallada, en una ventana llamada **Ventana Detalle**.

Los títulos en azul que encabezan las columnas son también botones que permiten ordenar la tabla, según el título seleccionado. Para elegir un registro de la tabla se da un clic sobre él o se desplaza el cursor con las teclas de desplazamiento.

Ventana Detalle

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaAdministración

Material

Material

Detalle de Materiales y Repuestos

✕

NUEVO

COPIAR

ACTUALIZAR

ELIMINAR

< Anterior 513 / 543 Siguiente >

Información General

Ficha Técnica

Car. Técnicas

Multimedia

Identificación

Repuesto

TOR-EST-1.8X1

Descripción

Tornillo cabeza estufa 1/8 x 1

No Inv

Inv

●

Descripción Larga

Clase

Familia

Grupo

Parte Número

Casilla

E-3-2

Inventario

Existencia Inventario

252

un

Valor Total:

0.00

Cantidad Reservada

0.00

un

Cantidad Disponible

252.00

un

Costo Unitario Vigente

0

FF Costeo

dd/mm/aaaa

Costo Última Compra

0

FF Última Compra

FF Último Uso

28/10/2006

Parámetros De Inventario

Nivel de Existencia

0

Nivel Mínimo/Punto de Pedido

0

Nivel Máximo

0

Lote Óptimo a Comprar

0

Período de Reaprovisionamiento

0

Días

Unidad de Empaque

Unidad de Consumo

un

Imagen 4. Ventana Detalle

En la gráfica anterior, ventana Detalle de Materiales y Repuestos se aprecian todos sus componentes y su respectivo contenido.

Se encuentra toda la información relevante sobre el Repuesto seleccionado en el Visor. A continuación se describen los campos que componen el registro. Sobre cada campo se da una breve explicación:

Información General

Repuesto: En este campo se registra el código del Repuesto, de acuerdo a la política de codificación que se haya definido.

Descripción: En este campo se registra la descripción del Repuesto en lenguaje natural.

No Inv/Inv: Define el tipo de Repuesto respecto a su connotación de Inventariado o No Inventariado. Un ítem es inventariado si está codificado en el Almacén y sobre él existen políticas de inventarios y reaprovisionamiento. Es No inventariado si su uso es de solo una vez y de él no se van a realizar más compras. También puede ser No inventariado, en un almacén particular, cuando se trata de un ítem cuya existencia, contablemente ya fue consumida, pero se almacena para ser consumido, por demanda, en un lapso corto.

Descripción larga: Este botón permite realizar una descripción larga del Repuesto. Para ello se abre una nueva ventana en la que se adicionan más de 200 caracteres.

The screenshot displays the 'Detalle de Materiales y Repuestos' interface. A modal window titled 'Información de la Descripción Larga' is open, showing a text area with the following description: 'Tomacorriente Doble Nema Leviton 5-20R CR20W, 20 A, 125 V, 2P 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, cableado lateral, correa de acero, en color Blanco'. Below the text area are 'ACTUALIZAR' and 'CERRAR' buttons. The background window shows the 'Identificación' section with 'Repuesto' 150101M013 and a 'Descripción Larga' button. The 'Inventario' section shows 'Existencia Inventario' 7, 'Cantidad Reservada' 0.00, 'Costo Unitario Vigente' 2530, and 'Costo Última Compra' 0. The 'Casilla' field is set to 708.

Imagen 5. Información General

Clase: Es un campo que permite clasificar o agrupar los artículos del Almacén por un criterio particular para la Organización.

Familia: Es un campo que permite definir la familia a la cual pertenece el artículos del Almacén que se está definiendo.

Grupo: Es un campo que permite definir el grupo al cual pertenece el artículos del Almacén que se está definiendo.

Parte Número: Es un campo que permite definir la parte número del artículo del Almacén que se está definiendo.

Casilla: Es el campo en el que se establece la ubicación física del Repuesto dentro del Almacén. Este campo permite cualquier nomenclatura de organización. Ejemplo. E21B (7,12) significaría Estante 21, lado B, posición matricial fila 7 columna 12.

Existencia Inventario: Registra la cantidad en existencia en el Almacén del Repuesto seleccionado. Este campo puede ser actualizado manualmente o en forma automática a través del módulo de Kárdex de Repuestos. Al lado de este campo, el sistema muestra la unidad de medida que se ha definido para él. También, al lado de este campo, el sistema muestra el Valor Total del inventario del Repuesto, que corresponde al producto de la "Existencia Inventario" y el "Costo Unitario Vigente".

Cantidad Reservada: Informa la cantidad reservada del Repuesto seleccionado. Una reserva es una cantidad de la existencia actual del Repuesto, que se ha comprometido para ser usada, por una persona, en una OT particular y la separa a través de la transacción **Reservas**. Este campo no es modificable por el usuario. Al lado de este campo, el sistema muestra la unidad de medida que se ha definido para él.

Cantidad Disponible: Es la diferencia entre "Existencia Inventario" menos "Cantidad Reservada". Es la Cantidad Disponible para consumos de Mantenimiento. Este campo no es modificable por el usuario. Al lado de este campo, el sistema muestra la unidad de medida que se ha definido para él.

Costo Unitario Vigente: Este campo refleja siempre el Costo Unitario del Repuesto seleccionado. Es un valor que puede haber sido actualizado manualmente por alguien que tenía los permisos para hacerlo. Puede también haber sido actualizado automáticamente por el sistema según el sistema de costeo definido para el almacén, a través del Kárdex de Repuestos.

FF Costeo: Es la fecha en la que se hizo el último recálculo del costo unitario para el Repuesto seleccionado. Normalmente es la fecha en la que el Repuesto entró al almacén por última vez por medio de un concepto valorizado.

Costo Última Compra: Este campo registra la última compra del repuesto seleccionado del Almacén. Automatizando los movimientos de la compra a través del Kárdex del Almacén.

FF Última Compra: Es la fecha de la última compra del Repuesto seleccionado del Almacén. Se actualiza automáticamente cuando tal movimiento de compra se efectuó a través del Kárdex del Almacén.

FF Último Uso: Es la fecha de la última salida del Repuesto seleccionado del Almacén. Se actualiza automáticamente cuando tal movimiento de salida se efectuó a través del Kárdex de Almacén. En otro caso el sistema no actualiza este campo.

Nivel de Existencia: En este campo se define la cantidad o el nivel en existencia que siempre debe haber de ese Repuesto en el almacén seleccionado.

Nivel Mínimo / Punto de Pedido: Este campo registra una cantidad que tiene un significado dependiendo del modelo de inventarios que maneje el Repuesto. En el caso de que se trate de un Repuesto controlado bajo un modelo simple de Inventarios, o de Harris, este campo significa el punto en el nivel de Inventario en el que se debe iniciar una gestión que exige una cantidad mínima en existencia permanentemente, este campo denota esa cantidad mínima. En ningún caso este parámetro es recalculado por el sistema.

Nivel Máximo: En este campo se define la cantidad o nivel máximo en existencia de ese Repuesto en el almacén seleccionado dependiendo del modelo simple de Inventario.

Lote Óptimo a Comprar: En este campo se define el parámetro de inventarios sobre la cantidad adecuada de compra, en cada proceso de re-abastecimiento. Este parámetro no es recalculado por el sistema.

Período de Reaprovisionamiento: De acuerdo a estadísticas de consumo sobre el Repuesto seleccionado, normalmente se establece en este campo el parámetro indicativo del período normal de Reaprovisionamiento, acorde con el Lote Óptimo de Compra y con la estadística de consumo. Este parámetro no es recalculado por el sistema. Al lado de este campo, el sistema muestra la palabra "días" para indicar la unidad de medida del período de reaprovisionamiento.

Unidad de Empaque: Es la unidad de compra, de adquisición o de despacho por parte del proveedor. Ej. Caneca de 55 galones, o Caja por 24 unidades.

Unidad de Consumo: Es la unidad mediante la cual se le solicita al Almacén o mediante la cual el Almacén despacha un determinado artículo. Ej. Galones o Unidades.

Precio Venta 1, Precio Venta 2, Precio Venta 3: Estos campos son utilizados de tipo información para almacenar los precios actuales, anteriores y promedio del repuesto, estos campos son parametrizables en el módulo [administración](#) en la etiqueta **Almacén**, en la opción "Manejo de Precios de Venta" y elegir la opción "SI".

Vistas Parciales / Pestañas

Las Vistas Parciales o Pestañas permiten complementar la información que se despliega normalmente sobre un Repuesto (**Información General**) con otro conjunto de información que solo se muestra cuando es necesario, por solicitud del usuario. Las vistas parciales disponibles son: Ficha técnica, Características Técnicas y Multimedia.

Ficha Técnica

En la pestaña de Ficha Técnica, se encuentra toda la información relevante del Repuesto seleccionado en el Visor.

The screenshot displays the 'Detalle de Materiales y Repuestos' interface. The 'Ficha Técnica' tab is active, showing the following details:

- Identificación:**
 - Repuesto: 150101M013
 - Descripción: Tomacorriente doble Leviton blanco
 - Clase, Familia, Grupo, Parte Número, Casilla: (Empty fields)
 - Estado: Activo (dropdown)
 - TT por Uso: Otr (dropdown)
 - A,B,C,O: O (dropdown)
- Códigos de Barras:**
 - Código de Barras Interno: 654789012
 - Código de Barras del Proveedor: 0000145246
- Proveedores:**
 - Proveedor 1: Representaciones Santa María (Referencia Proveedor 1: 52460ML)
 - Proveedor 2: Linde Colombia (Referencia Proveedor 2: MLK000)
 - Proveedor 3: B. Braun Medical S.A. (Referencia Proveedor 3: FHMER)
- Comentario:** Precauciones de manipulación, instalación: verificar que la zona se encuentre seca y en condiciones operables.

Imagen 6. Vistas Parciales - Ficha Técnica

A continuación se describen los campos que componen el registro. Sobre cada campo se da una breve explicación:

Cuadro Identificación: Aparece con los campos bloqueados para que el usuario visualice la información básica del Repuesto al cual se le está definiendo la información de la ficha técnica.

Estado: En este campo de opciones seleccionables es posible registrar el estado del Repuesto: Activo, Vencido, EOI (Excedente Obsoleto o Inservible).

TT por Uso: En este campo se listan los tipos de trabajo para seleccionar el tipo de trabajo que clasifique el Repuesto.

A, B, C, O: Informa si el repuesto se clasifica con el método de Costos basado en actividades (ABC). Este campo Clasificación se utilizara a futuro para el manejo de inventario rotativo. Su definición por defecto es O (significa Otro).

Código de Barras Interno: Si existe un código de barras interno dentro la Organización para la codificación de Repuestos, se debe de ingresar en este campo.

Código de Barras del Proveedor: Se refiere al Código de Barras del Proveedor que se encuentra asociado al Repuesto.

Proveedor 1, Proveedor 2, Proveedor 3: En estos campos se pueden relacionar hasta 3 proveedores del Repuesto seleccionado.

Referencia Proveedor 1, Referencia Proveedor 2, Referencia Proveedor 3: En estos campos se registran las referencias con las que cada Proveedor correspondiente suministra el Repuesto seleccionado.

Comentario: Aquí se ingresan los comentarios sobre un Repuesto o se especifica información adicional al Repuesto. Este campo cuenta con un espacio de 220 caracteres.

Características Técnicas

Esta opción permite definir para un determinado Repuesto las características técnicas que lo definen. En la parte izquierda de la ventana aparece un nuevo Visor en el que irán apareciendo las Características Técnicas que se van creando en la ventana Detalle, mientras que en la parte derecha aparece los campos para crear o actualizar la información de las características.

Detalle de Materiales y Repuestos

NUEVO COPIAR ACTUALIZAR ELIMINAR

Anterior 13 / 708 Siguiente

Información General Ficha Técnica **Car. Técnicas** Multimedia

Identificación

Repuesto: 150101M013 Descripción: Tomacorriente doble Leviton blanco No Inv Inv

Descripción Larga Clase Familia Grupo Parte Número Casilla

Car. Técnica	Valor
Hilos	3
Conexión a tierra	NEMA 5-15R
Amperaje	15
Voltaje	125

Adicionar Car. Técnica

Imagen 7. Vistas Parciales - Características Técnicas

En la gráfica anterior, Vista Parcial de Características, se aprecian las dos columnas de componentes y sus respectivos contenidos. A continuación se describen los campos que componen esta ventana de información adicional:

Cuadro Identificación: Aparece con los campos bloqueados para que el usuario visualice la información básica del Repuesto al cual se le está definiendo la información de las características técnicas.

Car. Técnica: En este campo se lista las características técnicas definidas en la tabla de Infraestructura, para seleccionar aquellas que son propias del Repuesto activo.

Valor: En este campo se define el valor de la característica correspondiente en la primera columna, en el cual es posible escribir su respectiva unidad de medida.

Para ingresar una característica técnica al Repuesto dar clic en el botón **Adicionar Car. Técnica**

A continuación se muestra el formulario para ingresar la Característica:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaHistoria ArchivadaAdministración

Detalle de Materiales y Repuestos

NUEVO

COPIAR

ACTUALIZAR

ELIMINAR

< Anterior

13 / 708

Siguiente >

Información General

Ficha Técnica

Car. Técnicas

Multimedia

Identificación

Repuesto

150101M013

Descripción

Tomacorriente doble Leviton blanco

No Inv

Inv

Descripción Larga

Clase

Familia

Grupo

Parte Número

Casilla

Car. Técnica

Valor

Hilos

3

Conexión a tierra

NEMA 5-15R

Amperaje

15

Voltaje

125

Car. Técnica

Valor

+ Cancelar

Imagen 8. -Ingresar Característica - Formulario

La Característica Técnica se debe de seleccionar del listado que corresponde a su respectiva tabla de Infraestructura - Características, una vez ingresado el valor se debe dar un clic en el botón **+** . Automáticamente el sistema la registra en la tabla de **Car. Técnica**.

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaHistoria ArchivadaAdministración

Detalle de Materiales y Repuestos

NUEVO

COPIAR

ACTUALIZAR

ELIMINAR

< Anterior

13 / 708

Siguiente >

Información General

Ficha Técnica

Car. Técnicas

Multimedia

Identificación

Repuesto

150101M013

Descripción

Tomacorriente doble Leviton blanco

No Inv

Inv

Descripción Larga

Clase

Familia

Grupo

Parte Número

Casilla

Car. Técnica

Valor

Hilos

3

Conexión a tierra

NEMA 5-15R

Amperaje

15

Voltaje

125

Car. Técnica

Valor

Ancho

15 cms

+ Cancelar

Imagen 9. Adicionar Característica

Para eliminar una registro se debe dar clic en el icono **🗑**. El sistema muestra un mensaje alerta para confirmar la transacción:

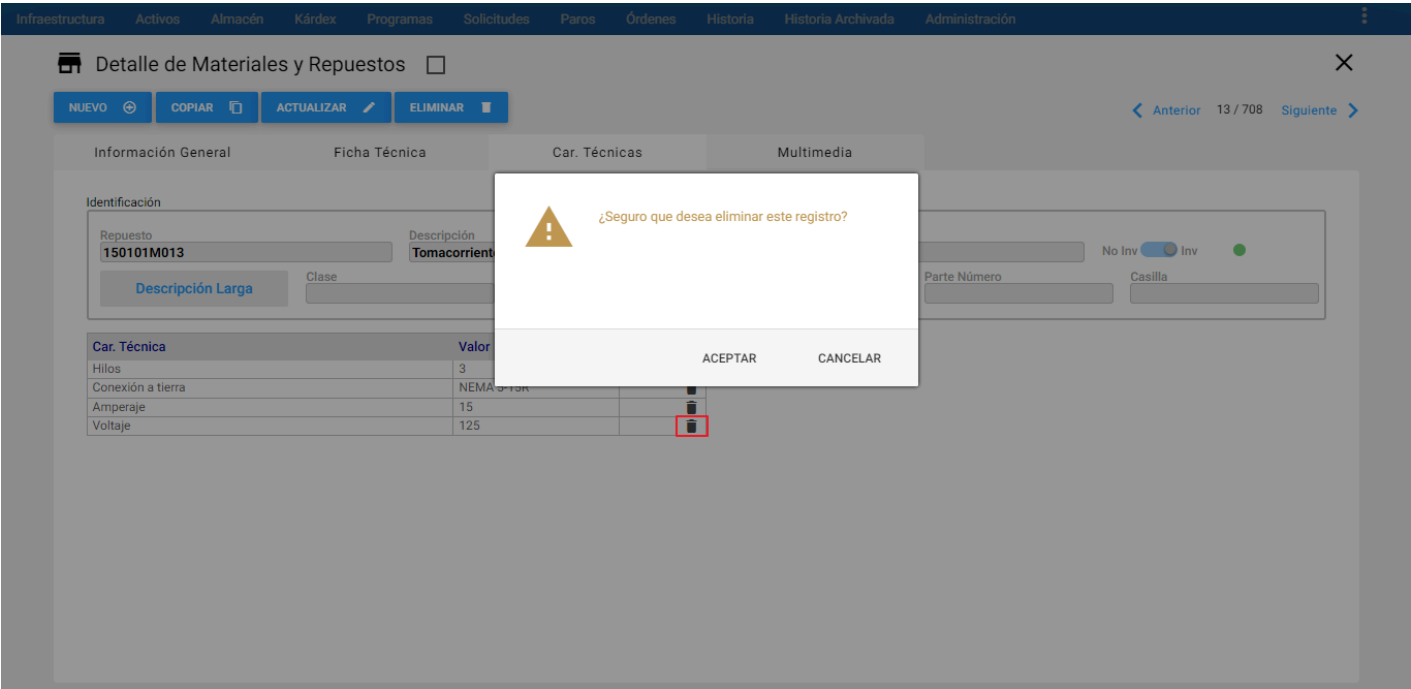


Imagen 10. Adicionar Característica

Nota: Para asentar los cambios de alguna modificación, añadir o eliminar una característica se debe dar clic en el botón **Actualizar**.

Multimedia

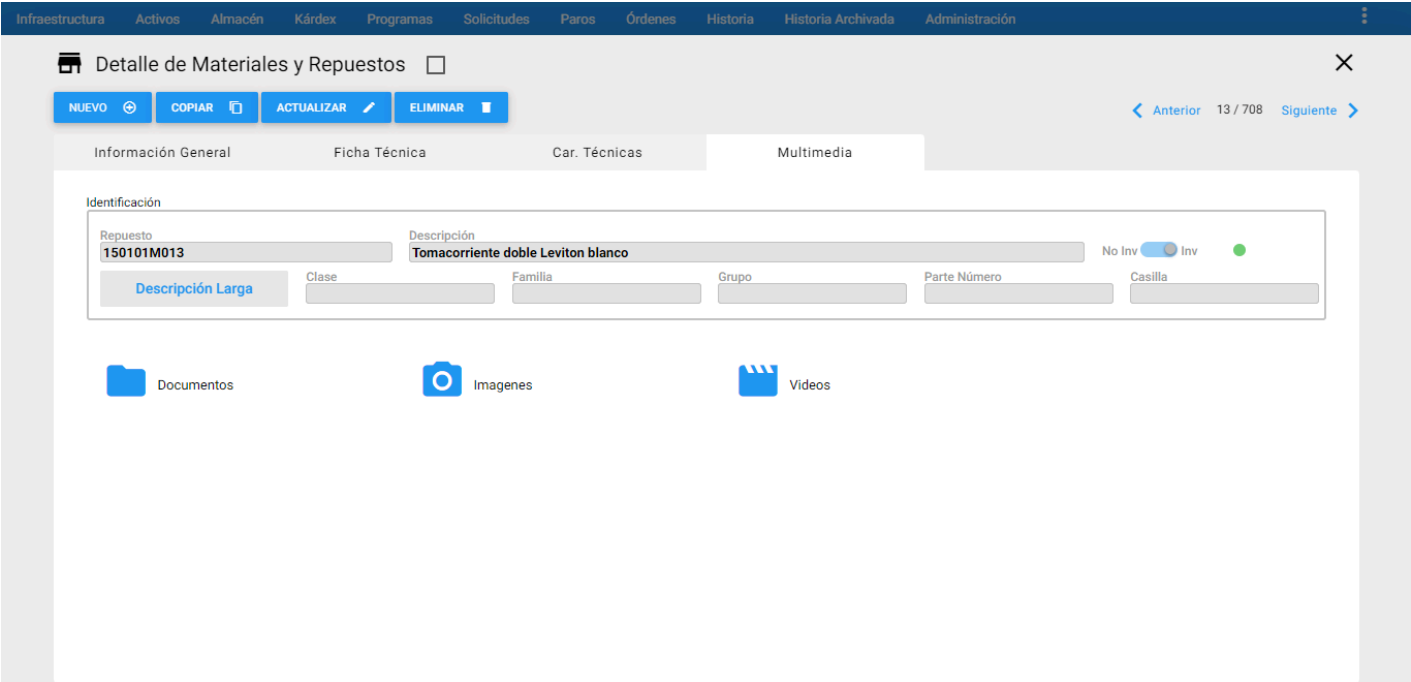


Imagen 11. Almacén - Multimedia

En la gráfica anterior, Ventana Multimedia, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos.

A través de la ventana Multimedia se adjunta información adicional al Repuesto en cada una de sus carpetas asignadas. Esta opción permite asociar al Repuesto uno o varios documentos, con el objetivo de facilitar o guiar el trabajo a realizar o detallarlo minuciosamente. AM acepta documentos de extensiones .DOC, XLS, PDF, JPG es decir, de Microsoft Word o Microsoft Excel, Acrobat o Imágenes.

Los documentos anexos pueden contener ayudas necesarias en la ejecución de actividades e instalación del respectivo Repuesto, usos planos, manuales técnicos, manuales de normas técnicas de Mantenimiento o de especificaciones detalladas, normas de seguridad, procedimientos, listas de verificación, protocolos de prueba u otra información estándar para su utilización.

A continuación se describen las carpetas que componen esta ventana; cuando se quiera actualizar o ingresar nueva información del Repuesto, se deberán registrar así:

Que Hacer: Es la información general que aparece en cada pestaña con los campos bloqueados para que el usuario visualice la información básica del Repuesto.

Documentos: En esta carpeta se relaciona toda clase de documentación relacionada al Repuesto. Ejemplo: Archivos en Word, PDF, Excel, entre otros.

Imágenes: En esta carpeta se relaciona toda clase de imágenes relacionadas al Repuesto. Ejemplo: Imágenes en formato JPG, PNG, entre otros.

Videos: En esta carpeta se relacionan porciones de videos relacionados al Repuesto. Ejemplo: Videos en formato wmv y mp4.

Para adicionar un documento, imagen o video, se debe dar un doble clic sobre la carpeta deseada, y luego seleccionar del ícono de nube , como se muestra a continuación:

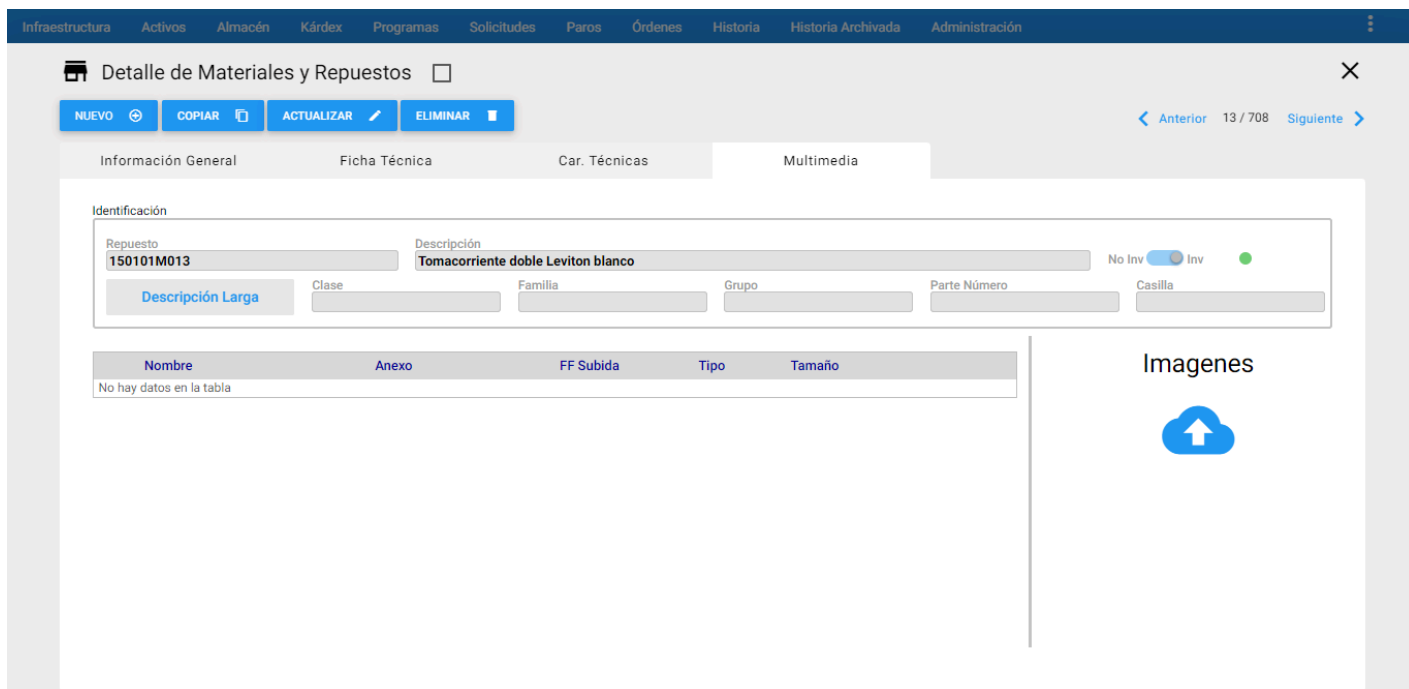


Imagen 12. Almacén - Abrir Explorador Archivos

A continuación se abre el explorador de archivos, seguido de seleccionar el archivo dar un clic en .

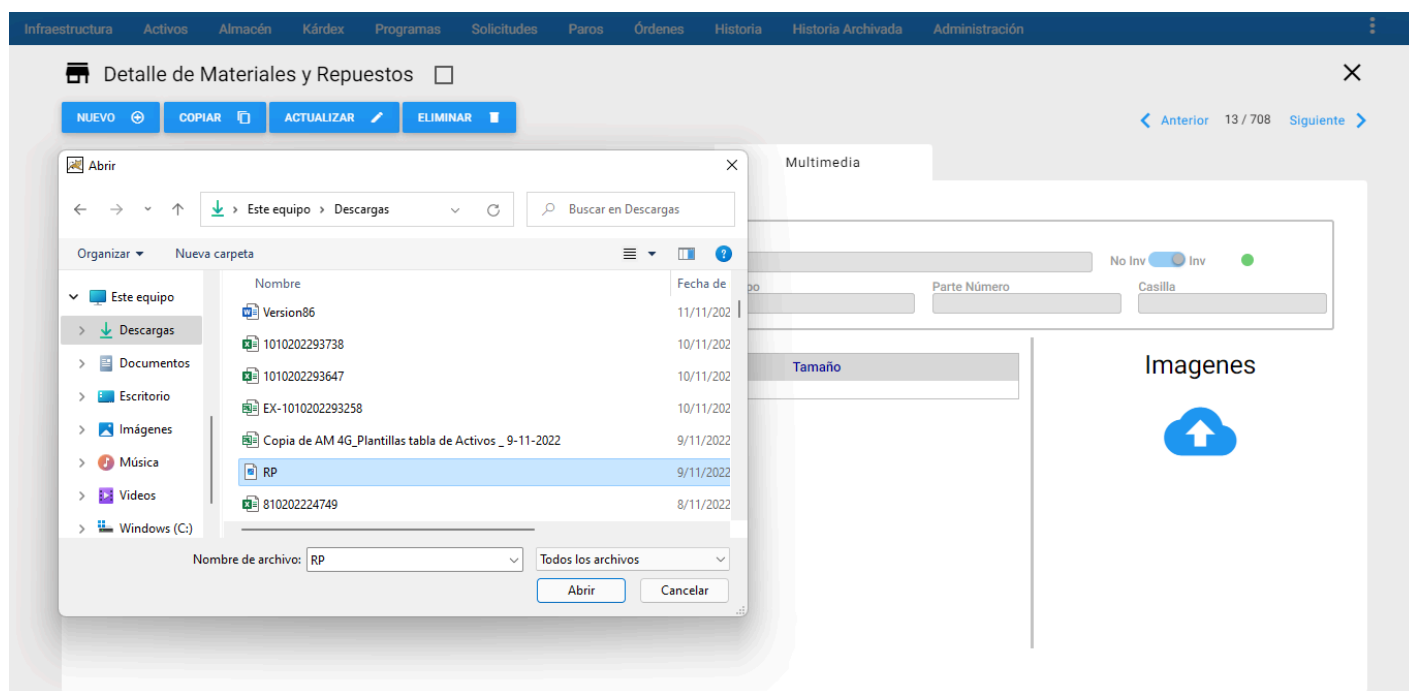


Imagen 13. Almacén - Seleccionar Archivos

De manera adicional u opcional se puede escribir un nombre en el siguiente campo para enfatizar de lo que trata el archivo:

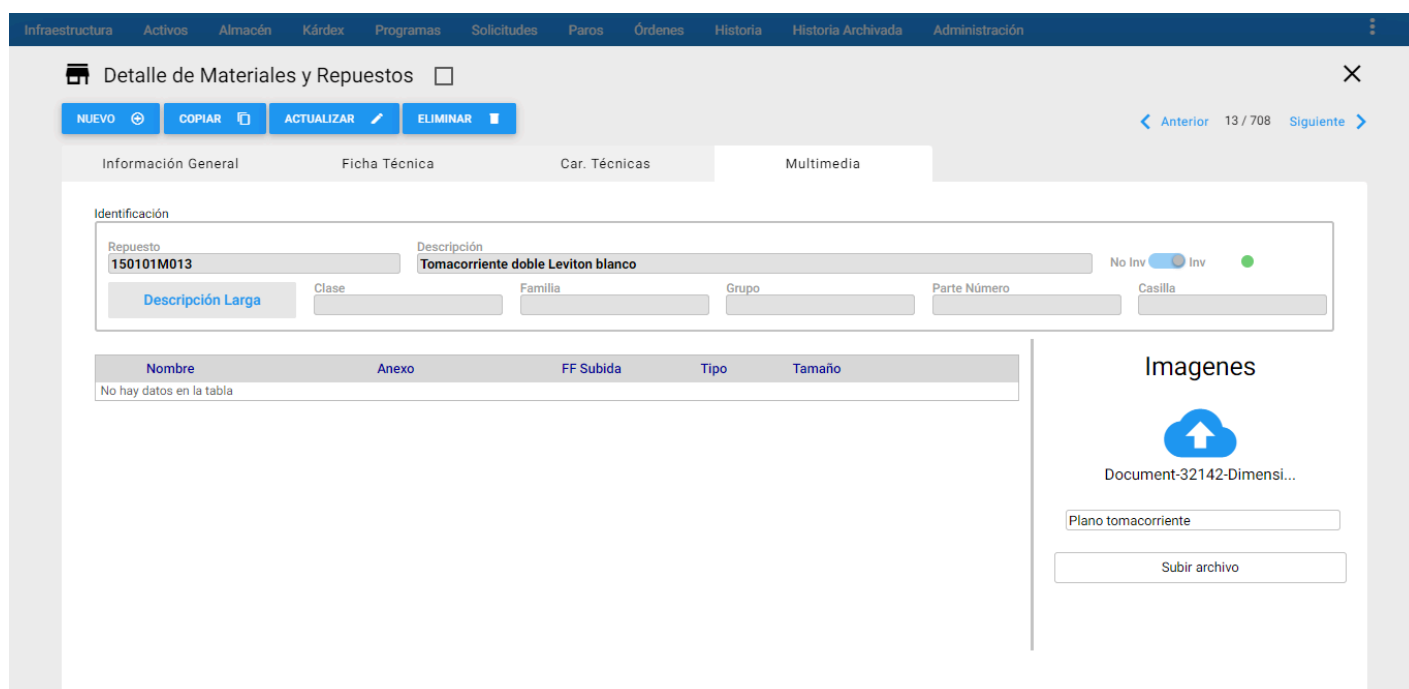


Imagen 14. Almacén - Nombrar Archivo

Para finalizar se debe de dar un clic en el botón **subir Archivo**. El sistema confirma a través de un mensaje que se ha subido el archivo satisfactoriamente.

Los archivos que se van adicionando van quedando guardados uno debajo del otro y si se da un clic sobre el nombre de una de las imágenes, se muestra la previsualización, como se muestra a continuación:

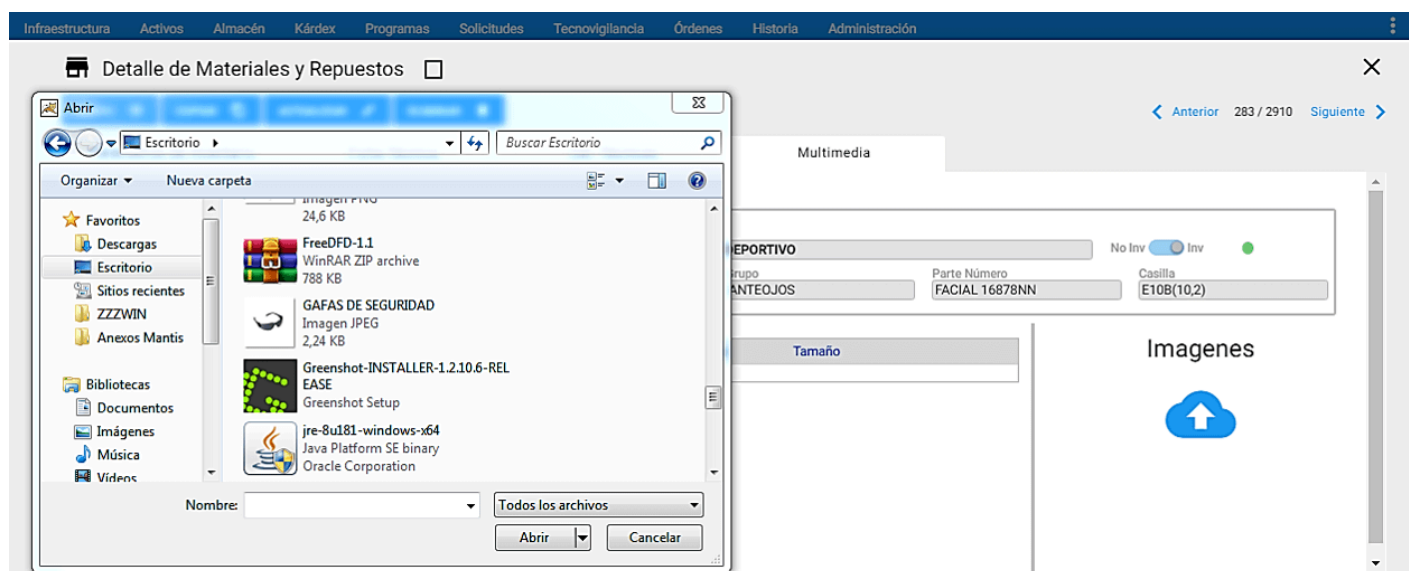


Imagen 15. Almacén - Previsualización de imagen

Para desasociar un documento, o una imagen o un video, se da clic al icono de basura  que se encuentra al lado derecho del archivo al que se le va a realizar la operación. Inmediatamente, sale un mensaje de alerta que pregunta al usuario si está seguro de eliminar este registro, finalmente confirmar con el botón [Aceptar](#).

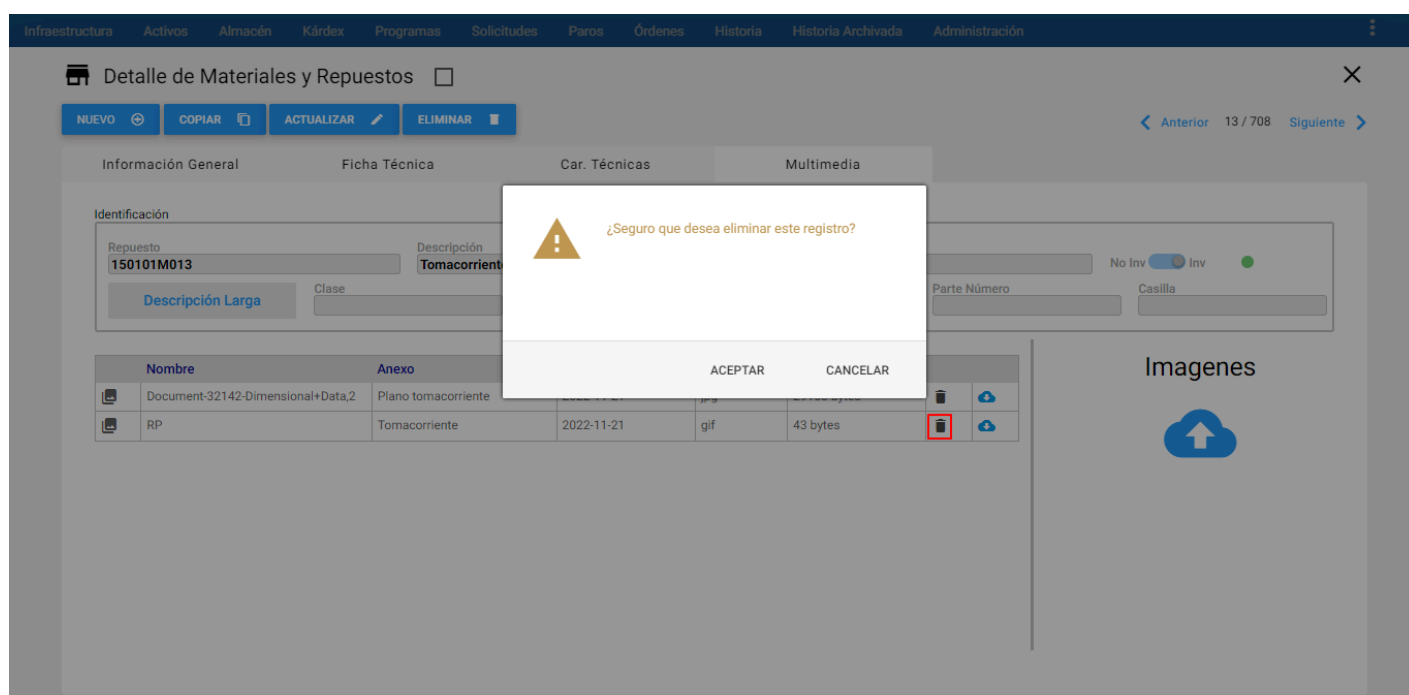


Imagen 16. Almacén - Desasociar un Archivo

Si se desea descargar un archivo adjunto, se debe dar clic en el ícono de nube con direccional hacia abajo  la nube con flecha hacia abajo que se encuentra al lado derecho del archivo que se quiere descargar.

Nota: Este proceso es el mismo para cualquiera de las tres carpetas de Multimedia.

Ventana Submenú de Repuestos

Ir a RP

El icono  se abre un campo al lado izquierdo, donde se digita el código completo del Repuesto que se desea encontrar rápidamente. Luego de digitar el código del Repuesto, se presiona la tecla "Enter" y el cursor se posiciona en consecuencia, sobre el Repuesto deseado en el Visor sombreado por la línea de color verde así:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaHistoria ArchivadaAdministración

Materiales y Repuestos

NUEVO

150104M014

Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150103M038	Bombillo 15W 120V para HX		SI	Activo	Otr	0			Unidad		2.0
150103M039	Bombillo 15V 150W para microscopio quirurgico		SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150103M041	Bombillo Welch Allyn 03400/03800 2.5V		SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150103M042	Bombillo Welch Allyn 03000		SI	Activo	Otr	0			Unidad		2.0
150104M001	Olivas blandas para fonendoscopio		SI	Activo	Otr	0			Unidad		6.0
150104M002	Aro para diafragma Fonendoscopio		SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.0
150104M003	Sensor saturación Datex conector rectangular		SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M004	Sensor saturación Datex conector redondo		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M005	Sensor Massimo		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M006	Sensor Nellcor		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M007	Sensor Nellcor oximax		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M008	Sensor Novamatrix generico		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M009	Interfase Nellcor N-200 generica		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M010	Interfase Nellcor oximax		SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M011	Bolsa en caucho para tensiometros 2 mangueras		SI	Activo	Otr	0			Unidad		40.0
150104M012	Brazalete para tensiometros		SI	Activo	Otr	0			Unidad		21.0
150104M013	Brazalete para tensiometros 1 manguera		SI	Activo	Otr	0			Unidad		21.0
150104M014	Manguera en espiral para tensiometros		SI	Activo	Otr	0			Unidad		18.0
150104M015	Pera para tensiometro		SI	Activo	Otr	0			Unidad		40.0
150104M016	Vidrio protector tensiometro		SI	Activo	Otr	0			UM-GENÉRICA		3.0
150104M017	baterias 3.6 v Li		SI	Activo	Otr	0			Pares		1.0
150104M018	Conectores DB9		SI	Activo	Otr	0			Unidad		31.0
150104M019	Latiguillos EKG 12 Derivadas Datex		SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M020	TRONCAL DE EKG DE 5 DERIVADAS DATEX		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M021	Latiguillos EKG 3 Derivadas		SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M022	TRONCAL DE EKG DE 3 DERIVADAS		SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M023	TRONCAL DE EKG DE 12 DERIVADAS		SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0
150104M024	Cable ECG 3 Derivadas monitor IVY modelo 101		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150104M025	Sonda para termometro		NO	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150104M026	Celda de Oxigeno Amadeus		SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0

Registros por página: 60181-240 de 708 / 708

« Primera Página

Anterior

4

Siguiente

Última Página »

Imagen 17. Almacén - Ir a RP

En caso de escribir el código con algún error, el sistema muestra un mensaje de alerta indicando que el Repuesto no existe.

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaHistoria ArchivadaAdministración

Materiales y Repuestos

NUEVO

BID

Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M001	Balasto de 2 x 40 w.		SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M002	Balasto de 2 x 96 w		SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M003	Balasto para ojos de Buey de 13W		SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M004	Balasto de 2 x 32 w								Unidad	Luz Elena	14.0
150101M005	Balasto de 1 x 40 w.								Unidad	Luz Elena	1.0
150101M006	Balasto de 4 x 32w								Unidad		15.0
150101M007	Bombilla fluorescente de 13W F13DBX23T4								Unidad		8.0
150101M008	Balasto de 1 x 20 w.								Unidad		16.0
150101M009	Multitoma 8/6 servicios								Unidad	Ignacio	0.0
150101M010	Start de 20								Unidad	Luz Elena	1.0
150101M011	Start de 40								Unidad	Ignacio	20.0
150101M012	Cable AC								Unidad		18.0
150101M013	Tomacorriente doble Leviton blanco								Unidad	52460ML	7.0
150101M014	Tapa para tomacorriente Leviton (blanco)								Unidad		1.0
150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12								Unidad	Luz	8.0
150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K								Unidad		4.0
150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65K								Unidad		1.0
150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K		SI	Activo	Otr	0			Unidad		39.0
150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pines		SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.0
150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin		SI	Activo	Otr	0			Unidad		18.0
150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8		SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w		SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.0
150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM		SI	Activo	Otr	0			Unidad		9.0
150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA		SI	Activo	Otr	0			Unidad		7.0
150101M025	Multitoma 6 servicios		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M026	Interruptor doble leviton blanco		SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150101M027	Interruptor sencillo Leviton blanco		SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M028	Terminal coaxial		SI	Activo	Otr	0			Unidad		40.0
150101M029	Bombillo tipo nevera		SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150101M030	Enchufe grado Hospitalario		SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0

Registros por página: 601-60 de 708 / 708

« Primera Página

Anterior

1

Siguiente

Última Página »

El Repuesto con el Código: BID no existe.

ACEPTAR

Imagen 18. Almacén - Mensaje alerta RP

Indicadores

Es posible visualizar de manera inmediata, los Repuestos activos, inactivos y con Multimedia, directamente desde la ventana visor, a través de la columna "Indicadores" que muestra una pelota de color que indica su estado. El significado del color de cada pelota, se puede ver en el icono  ubicado en la parte superior derecha de la ventana visor:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración										
Materiales y Repuestos NUEVO										
Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	
150101M001	Balasto de 2 x 40 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	
150101M002	Balasto de 2 x 96 w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	
150101M003	Balasto para ojos de Buey de 13W	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	
150101M004	Balasto de 2 x 32 w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	
150101M005	Balasto de 1 x 40 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	
150101M006	Balasto de 4 x 32w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	
150101M007	Bombilla fluorescente de 13W F13DBX23T4	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	
150101M008	Balasto de 1 x 20 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	16.0
150101M009	Multitoma 8/6 servicios	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Ignacio 0.0
150101M010	Start de 20	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena 1.0
150101M011	Start de 40	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Ignacio 20.0
150101M012	Cable AC	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	52460ML 18.0
150101M013	Tomacorriente doble Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	7.0
150101M014	Tapa para tomacorriente Leviton (blanco)	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	1.0
150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz 8.0
150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	4.0
150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	1.0
150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	39.0
150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pines	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	10.0
150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	18.0
150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	8.0
150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	5.0
150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	9.0
150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	7.0
150101M025	Multitoma 6 servicios	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	1.0
150101M026	Interruptor doble leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	4.0
150101M027	Interruptor sencillo Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	8.0
150101M028	Terminal coaxial	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	40.0
150101M029	Bombillo tipo nevera	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	3.0
150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	0.0

Imagen 19. Almacén - Indicadores

El significado de los colores se visualiza al sobreponer el mouse en el icono que se encuentra al extremo superior derecho y su correspondencia es:

- **Rojo:** Repuestos definidos con estado inactivo.
- **Verde:** Repuestos definidos con estado activo.
- **Naranja:** Repuestos que tienen asociados archivos de imágenes, videos y/o documentos en la pestaña Multimedia.

Subgrupo

Se usa para filtrar o seleccionar grupos de Repuestos que cumplen un conjunto de filtros o criterios. El objetivo de hacerlo es realizar un estudio posterior sobre los registros seleccionados en el subgrupo. Para ingresar a esta opción se debe dar clic al icono de filtro  ubicado en la parte superior derecha de la ventana Visor de Almacén de Repuestos.

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaHistoria ArchivadaAdministración

Materiales y Repuestos

NUEVO

Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M063	Breaker 3 x 30		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M064	Breaker 3 x 40		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M065	Breaker 3 x 50		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M067	Breaker 3 x 70		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M068	Breaker unipolar de 20		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M069	Breaker unipolar de 50		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M070	Breaker unipolar de 15		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M071	Socket Pte T8		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M072	Pasacable redondo (60x21)		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M073	Lámpara redonda fluorescente de 2x13w. (sin bo...		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M074	Toma doble de voz y datos		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M075	Toma triple de voz y datos		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M076	Tomacorriente 220 tapa galvanizada		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M077	Tomacorriente trifásico Leviton		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M078	Caja plastica eléctrica 2x4		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M079	Interruptores mixtos		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M080	Interruptores Leviton. (beige)		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M081	Interruptor Luminex para timbre (blanco)		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M082	Interruptor Luminex		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M083	Tapa para toma doble con sobretapa		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M084	Tapa para toma telefónico		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M085	Tapa ciega Luminex		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M086	Tomillos para tomacorriente Luminex		SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.0
150101M087	Modulos para interruptor		SI	Activo	Otr	0			Unidad		9.0
150101M088	Socket para Lámpara de 32w.		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M089	Lámpara fluorescente completa de 32 W		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M090	Lámpara tipo claravaya de pared, Ref: VB56FGGP		SI	Activo	Otr	0			Unidad		2.0
150101M091	Lampara proyector 50W 120V		SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M092	BOMBILLO AHORRADOR 20W		SI	Activo	Otr				Unidad		19.0
150101M093	CABLE P/GRABADORA		SI	Activo	Otr				Unidad		10.0

Registros por página: 60

61-120 de 708 / 708

« Primera Página

< Anterior

2

Siguiente >

Última Página »

Imagen 20. Almacén - Ir a Subgrupo

Los campos que constituyen un criterio de selección haciendo parte de la Ventana Subgrupo de Repuestos son los siguientes:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaHistoria ArchivadaAdministración

Subgrupo Materiales y Repuestos

ACEPTAR MAS MENOS VALORES POR DEFECTO

☐ A,B,C,O

☐ Casilla

☐ Clase

☐ Código de Barras Interno

☐ Código de Barras Proveedor

☐ Código del Repuesto

☐ Descripción del Repuesto

☐ Estado

☐ Proveedor 1

☐ Referencia Proveedor 1

☐ Referencia Proveedor 2

☐ Tipo

☐ Tipo de Trabajo

Imagen 21. Almacén - Subgrupo Materiales y Repuestos

- A, B, C, O:

Permite encontrar los repuestos que tengan una clasificación A, B, C u O definida.
- Casilla:

Esta opción permite encontrar y agrupar aquellos Repuestos que se encuentran en la casilla que se especificó en la información general del Repuesto.
- Clase:

Esta opción permite encontrar aquellos Repuestos que cumplen con el patrón de clase especificado. También se puede usar los comodines (%), Ejemplo: B, B%.
- Código de Barras Interno:

Si existe un código de barras interno dentro de la organización para codificar Repuestos; este campo permite encontrar el Repuesto que se encuentre asociado al Código de Barras Interno que se ingresó al crear el Repuesto. En este campo se puede usar los comodines (%), Ejemplo: %1%, 1%.

Código de Barras Proveedor: Permite encontrar el Repuesto que se encuentre asociado al Código de Barras del Proveedor que se ingresó al crear el Repuesto. En este campo se puede usar los comodines (%), Ejemplo: %1%, 1%.

Código del Repuesto: Esta selección agrupa los Repuestos relacionados por su código. Por ejemplo: si se escribe BAN%, se seleccionan todos los Repuestos cuyo código inicia por BAN. Si se escribe TR% se seleccionan todos los Repuestos cuyo código inicie por cualquier cuarteto de valores pero que en la quinta y sexta posición tengan un TR. El porcentaje es un carácter comodín que significa "todos".

Descripción del Repuesto: Selecciona los Repuestos según criterios que se fundamenten en su descripción. Ejemplo: % Banda% selecciona todos los Repuestos en cuya descripción, en cualquier posición, tengan la palabra "Banda".

Estado: Permite seleccionar el Estado de los Repuestos, es posible registrar el estado de Activo, Vencido, Excedente, Obsoleto o Inservible para el Repuesto activo.

Proveedor 1: Lista los Repuestos por el Proveedor seleccionado. La búsqueda se realiza sobre los 3 campos de Proveedor asociado al Repuesto (**Proveedor 1, 2, 3**). Este campo despliega la lista de los Terceros Tipo PF de la tabla de Infraestructura. En este campo es posible usar comodines (%). Para introducir un nombre en campo manualmente se debe dar clic en el icono  el cual se habilita  para permitir el ingreso del dato: por ejemplo FER% y el sistema selecciona todos los Proveedores cuyo nombre empieza por FER. Si se escribe %IA% se seleccionan todos los Proveedores en cuyo nombre, en cualquier posición, tengan la palabra "IA".

Referencia Proveedor 1: A través de esta opción es posible digitar el nombre de la referencia del Repuesto, seleccionar los Repuestos que tienen como referencia proveedor 1. Este campo permite el uso de comodines(%) por ejemplo: %BR1%, BR1%.

Referencia Proveedor 2: Este criterio permite realizar consultas por la segunda referencia establecida perteneciente al segundo proveedor. Permite el uso de comodines (%), por ejemplo: %BR1%, BR1%.**

Tipo: Permite seleccionar de la lista el tipo al que pertenece el Repuesto, si es inventariado o no inventariado.

Tipo de Trabajo: Agrupa los Repuestos de acuerdo al tipo de trabajo al que están asociados.

Nota: Es importante tener en cuenta que cuando se están realizando los subgrupos se pueden utilizar uno o varios de los criterios anteriores simultáneamente. Además es posible hacer unión de selecciones. Esto significa que inmediatamente después de haber realizado una selección es posible hacer otra y unir el resultado de las dos. Para ello, tras definir los criterios de la segunda selección se da un clic al botón  y luego en .

Reportes

Materiales y Repuestos NUEVO											
Código	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M001	Balasto de 2 x 40 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M002	Balasto de 2 x 96 w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M003	Balasto para ojos de Buey de 13W	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M004	Balasto de 2 x 32 w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	14.0
150101M005	Balasto de 1 x 40 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M006	Balasto de 4 x 32w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		15.0
150101M007	Bombilla fluorescente de 13W F13DBX23T4	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M008	Balasto de 1 x 20 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		16.0
150101M009	Multitoma 8/6 servicios	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Ignacio	0.0
150101M010	Start de 20	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M011	Start de 40	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Ignacio	20.0
150101M012	Cable AC	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		16.0
150101M013	Tomacorriente doble Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	52460ML	7.0
150101M014	Tapa para tomacorriente Leviton (blanco)	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz	8.0
150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		39.0
150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pines	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.0
150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		18.0
150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.0
150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		9.0
150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		7.0
150101M025	Multitoma 6 servicios	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M026	Interruptor doble leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150101M027	Interruptor sencillo Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M028	Terminal coaxial	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		40.0
150101M029	Bombillo tipo nevera	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0

Imagen 22. Almacén - Ir a Reportes

Este comando  permite visualizar los reportes o informes de la información relacionada a los Repuestos/Materiales. Existen los siguientes tipos de reportes básicos disponibles:

Materiales y Repuestos NUEVO											
Código	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M001	Balasto de 2 x 40 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M002	Balasto de 2 x 96 w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M003	Balasto para ojos de Buey de 13W	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M004	Balasto de 2 x 32 w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	14.0
150101M005	Balasto de 1 x 40 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M006	Balasto de 4 x 32w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		15.0
150101M007	Bombilla fluorescente de 13W F13DBX23T4	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M008	Balasto de 1 x 20 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		16.0
150101M009	Multitoma 8/6 servicios	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Ignacio	0.0
150101M010	Start de 20	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M011	Start de 40	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Ignacio	20.0
150101M012	Cable AC	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		16.0
150101M013	Tomacorriente doble Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	52460ML	7.0
150101M014	Tapa para tomacorriente Leviton (blanco)	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz	8.0
150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		39.0
150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pines	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.0
150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		18.0
150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.0
150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		9.0
150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		7.0
150101M025	Multitoma 6 servicios	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M026	Interruptor doble leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150101M027	Interruptor sencillo Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M028	Terminal coaxial	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		40.0
150101M029	Bombillo tipo nevera	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		0.0

Imagen 23. Almacén- Reportes

Los anteriores reportes pueden ser seleccionados para uno o varios Activos/Equipos:

Todos los Registros: Con esta opción se imprimen todos los reportes de los Repuestos/Materiales existentes en la base de datos, sin importar si se ha realizado un subgrupo.

Registros del Visor: Esta opción permite hacer una impresión de todos los Repuestos/Materiales que están seleccionados en la Ventana Visor, es decir los registros que están seleccionados en el subgrupo actual.

Registro Seleccionado: Esta opción permite hacer una impresión del Repuesto/Material que esta seleccionado en la Ventana Visor (el cursor verde se encuentra sobre él).

Subtítulo: En este campo es posible registrar un poco menos de una línea de información, tipo documentación del Reporte, para que se imprima bajo el área de títulos estándar.

Para visualizar los reportes, se da un clic sobre el reporte y luego al botón **Imprimir** . Para exportar un reporte se da un clic sobre el reporte y luego al botón **exportar** . Esto descarga automáticamente en la estación cliente el reporte en formato excel.

Exportar

Esta opción  permite la exportación de los campos contenidos en la ficha técnica de los Repuestos/Materiales que aparecen en el visor, totales o provenientes de un subgrupo a un archivo de Excel que se descarga automáticamente en la estación cliente donde se ejecutó el proceso.

Al ejecutar esta transacción, se abre una ventana como se muestra a continuación:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración											
Materiales y Repuestos NUEVO											
Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M001	Balasto de 2 x 40 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M002	Balasto de 2 x 96 w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M003	Balasto para ojos de Buey de 13W	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M004	Balasto de 2 x 32 w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	14.0
150101M005	Balasto de 1 x 40 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M006	Balasto de 4 x 32w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		15.0
150101M007	Bombilla fluorescente de 13W F13DBX23T4	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M008	Balasto de 1 x 20 w.	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		16.0
150101M009	Multitoma 8/6 servicios	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Ignacio	0.0
150101M010	Start de 20	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz Elena	1.0
150101M011	Start de 40	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Ignacio	20.0
150101M012	Cable AC	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		16.0
150101M013	Tomacorriente doble Leviton blanco	● ●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	52460ML	7.0
150101M014	Tapa para tomacorriente Leviton (blanco)	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz	8.0
150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65k	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.0
150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		39.0
150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pines	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.0
150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		18.0
150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.0
150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		9.0
150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		7.0
150101M025	Multitoma 6 servicios	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.0
150101M026	Interruptor doble leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.0
150101M027	Interruptor sencillo Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.0
150101M028	Terminal coaxial	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		40.0
150101M029	Bombillo tipo nevera	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		3.0
150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●	SI	Activo	Otr				Unidad		0.0

Imagen 24. Almacén- Ir a Exportar

En la gráfica anterior, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos.

Exportar Visor: Esta opción exporta todos los Activos seleccionados en el visor mediante un subgrupo.

Exportar Todos los Registros: Esta opción exporta todas los Activos existentes en la base de datos, sin importar cualquier subgrupo activo.

Luego de escoger una de las opciones anteriores, en la parte inferior aparece seleccionado por defecto el recuadro de selección

☐ **exportar todos los campos** pero si se prefiere uno o algunos campos se debe des-seleccionar y a continuación hacer clic en los recuadros a exportar.

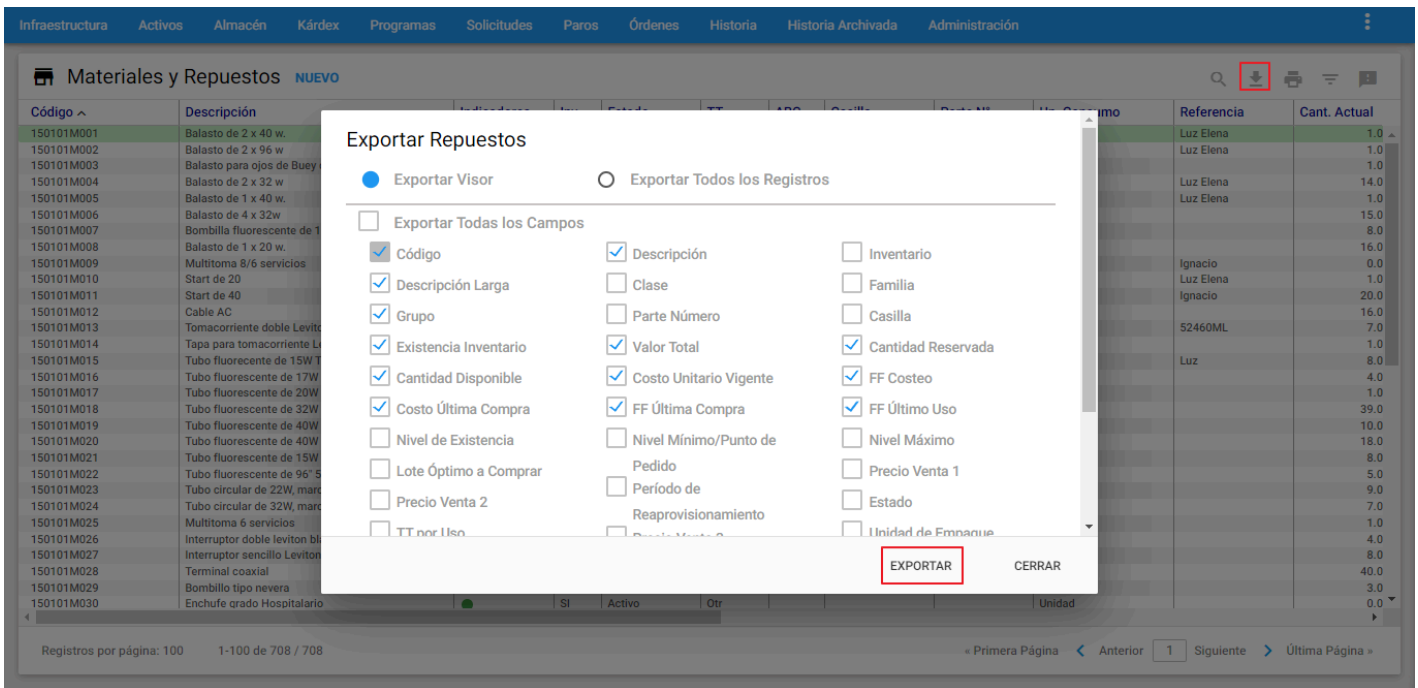


Imagen 25. Almacén- Exportar Campos

Una vez elegida la información, dar clic en el botón inferior **Exportar** el cual genera un archivo de Excel que se descarga automáticamente. El objetivo de esta exportación es llevar toda la información de los Repuestos/Materiales a un archivo plano, para luego ser analizados.

Ir a RP

Esta opción de búsqueda rápida se encuentra ubicada al lado superior derecho de la ventana Visor. Al darle clic al ícono , se abre un campo al lado izquierdo que indica la información que debe ingresarse, es decir, el código completo del Repuesto/Material. Luego de digitar la información, se presiona la tecla **Enter** y a continuación se sombrea el Repuesto/Material deseado en el Visor:


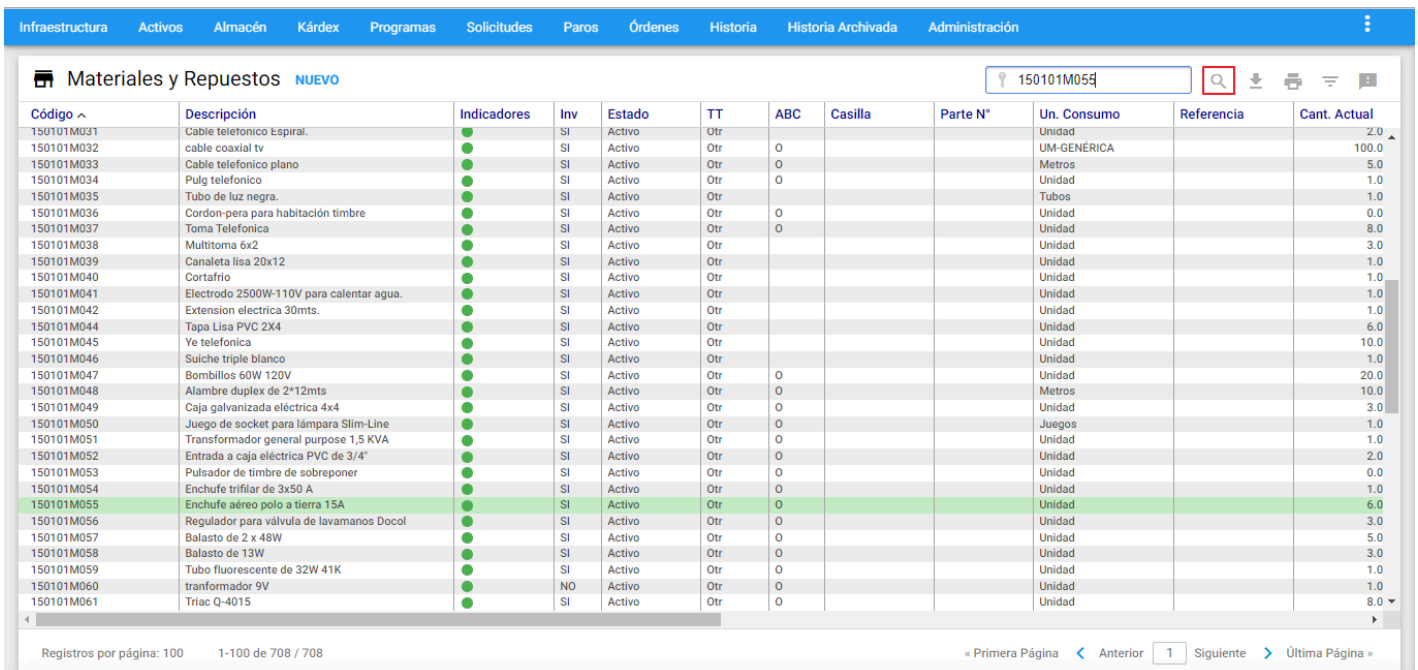


Imagen 26. Ir a AC

En caso de escribir el código con algún error, el sistema muestra un mensaje de alerta indicando que el Repuesto/Material no existe.

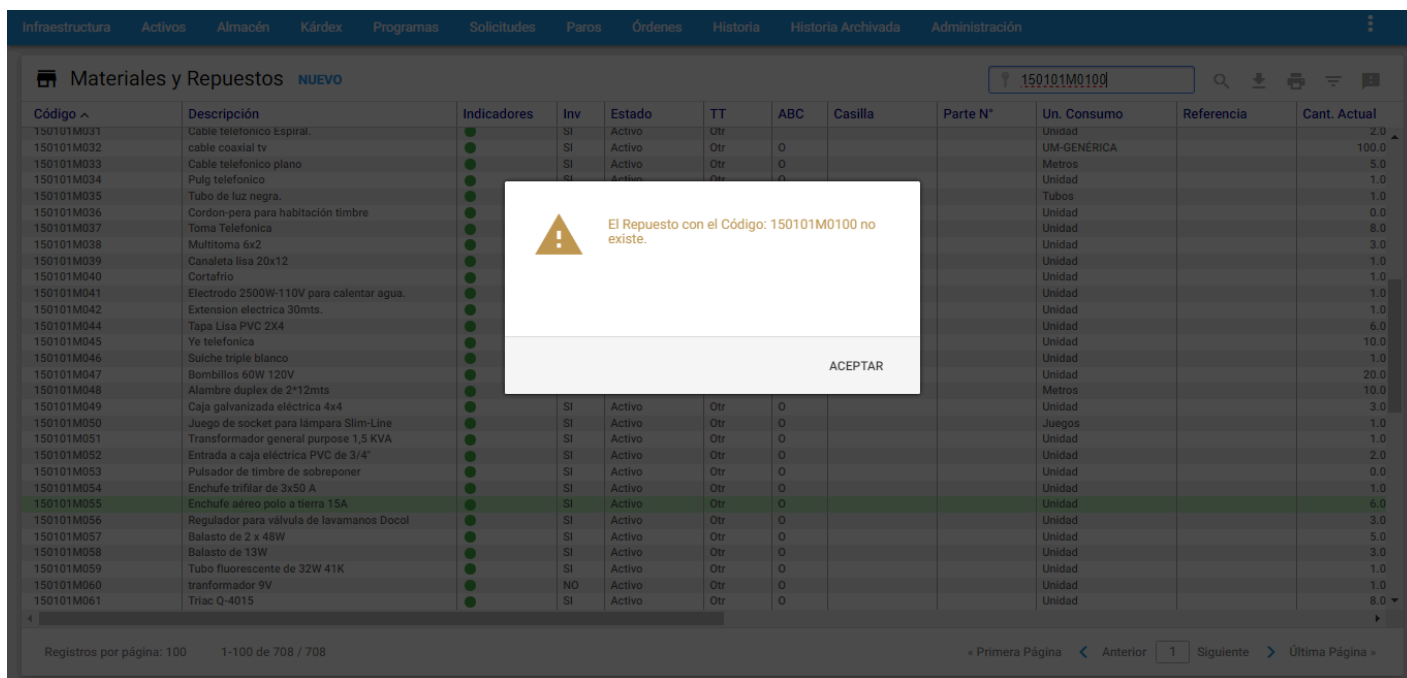

Código	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M031	Cable telefonico Espiral.	●	SI	Activo	Otr				Unidad		2.0
150101M032	cable coaxial tv	●	SI	Activo	Otr	O			UM-GENERICA		100.0
150101M033	Cable telefonico plano	●	SI	Activo	Otr	O			Metros		5.0
150101M034	Pulg telefonico	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M035	Tubo de luz negra.	●							Tubos		1.0
150101M036	Cordon-pera para habitación timbre	●							Unidad		0.0
150101M037	Toma Telefonica	●							Unidad		8.0
150101M038	Multitoma 6x2	●							Unidad		3.0
150101M039	Canaleta lisa 20x12	●							Unidad		1.0
150101M040	Cortafrio	●							Unidad		1.0
150101M041	Electrodo 2500W-110V para calentar agua.	●							Unidad		1.0
150101M042	Extension electrica 30mts.	●							Unidad		1.0
150101M044	Tapa Lisa PVC 2X4	●							Unidad		6.0
150101M045	Ye telefonica	●							Unidad		10.0
150101M046	Suliche triple blanco	●							Unidad		1.0
150101M047	Bombillos 60W 120V	●							Unidad		20.0
150101M048	Alambre duplex de 2*12mts	●							Metros		10.0
150101M049	Caja galvanizada eléctrica 4x4	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		3.0
150101M050	Juego de socket para lámpara Slim-Line	●	SI	Activo	Otr	O			Juegos		1.0
150101M051	Transformador general purpose 1,5 KVA	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M052	Entrada a caja eléctrica PVC de 3/4"	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		2.0
150101M053	Pulsador de timbre de sobreponer	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		0.0
150101M054	Enchufe trifilar de 3x50 A	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M055	Enchufe aéreo polo a tierra 15A	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		6.0
150101M056	Regulador para válvula de lavamanos Docol	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		3.0
150101M057	Balasto de 2 x 48W	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		5.0
150101M058	Balasto de 13W	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		3.0
150101M059	Tubo fluorescente de 32W 41K	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M060	transformador 9V	●	NO	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M061	Triac Q-4015	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		8.0


Imagen 27. Mensaje Alerta - Ir a AC

Transacciones

Modificar Masivamente (MM)

Esta transacción permite agregar o modificar conjuntamente información de un Subgrupo de Repuestos previamente seleccionados, como por ejemplo Estado, cambiar de Almacén, Unidad de Consumo, Clase, Proveedor, Clasificación A,B,C,O

Para acceder se requieren permisos correspondientes a “Masificar” en Almacén. Esta transacción es individual para cada Almacén por lo tanto en el Almacén que corresponda se debe sobreponer el cursor, al lado derecho se despliega el conjunto de opciones disponibles, luego se elige la transacción “**Modificar Masivamente**”. como se muestra a continuación:

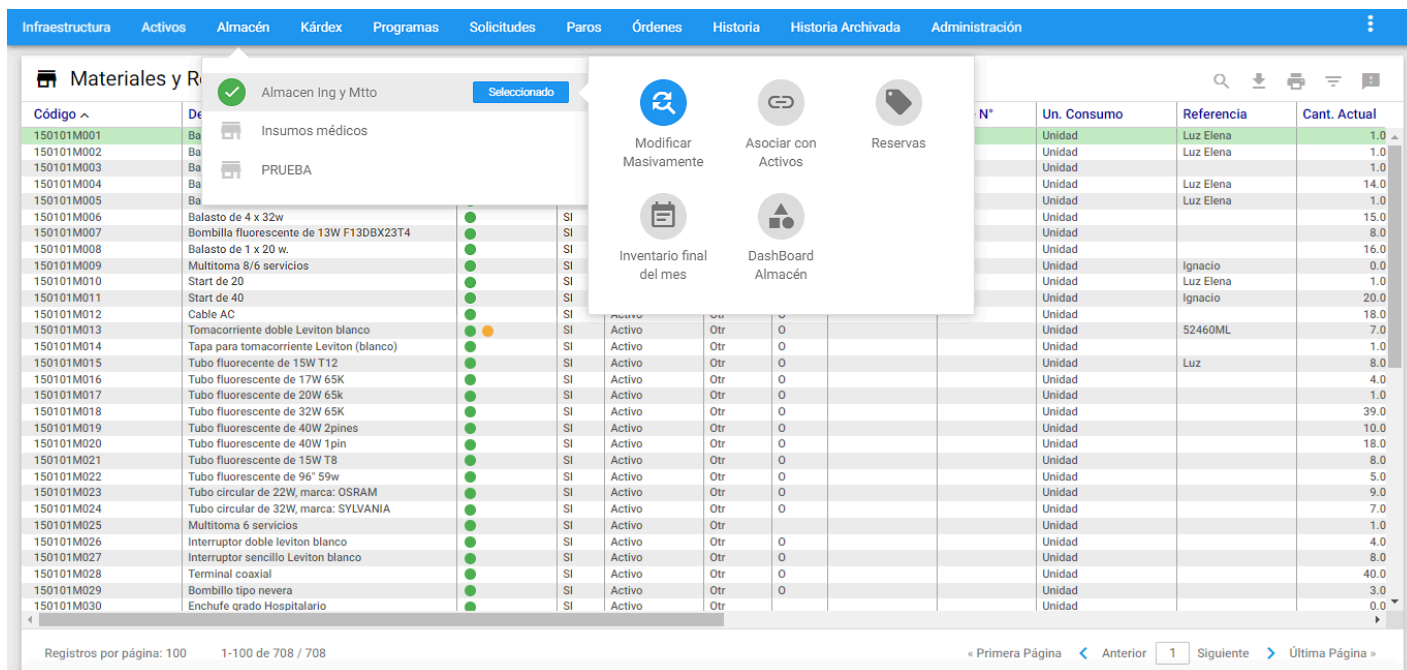

Código	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M001	Ba	●	SI	Activo	Otr				Unidad	Luz Elena	1.0
150101M002	Ba	●	SI	Activo	Otr				Unidad	Luz Elena	1.0
150101M003	Ba	●	SI	Activo	Otr				Unidad	Luz Elena	1.0
150101M004	Ba	●	SI	Activo	Otr				Unidad	Luz Elena	14.0
150101M005	Ba	●	SI	Activo	Otr				Unidad	Luz Elena	1.0
150101M006	Balasto de 4 x 32w	●	SI	Activo	Otr				Unidad		15.0
150101M007	Bombilla fluorescente de 13W F13DBX23T4	●	SI	Activo	Otr				Unidad		8.0
150101M008	Balasto de 1 x 20 w.	●	SI	Activo	Otr				Unidad		16.0
150101M009	Multitoma 8/6 servicios	●	SI	Activo	Otr				Unidad	Ignacio	0.0
150101M010	Start de 20	●	SI	Activo	Otr				Unidad	Luz Elena	1.0
150101M011	Start de 40	●	SI	Activo	Otr				Unidad	Ignacio	20.0
150101M012	Cable AC	●	SI	Activo	Otr				Unidad		18.0
150101M013	Tomacorriente doble Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad	52460ML	7.0
150101M014	Tapa para tomacorriente Leviton (blanco)	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad	Luz	8.0
150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		4.0
150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65k	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		1.0
150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		39.0
150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pines	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		10.0
150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		18.0
150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		8.0
150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		5.0
150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		9.0
150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		7.0
150101M025	Multitoma 6 servicios	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.0
150101M026	Interruptor doble leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		4.0
150101M027	Interruptor sencillo Leviton blanco	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		8.0
150101M028	Terminal coaxial	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		40.0
150101M029	Bombillo tipo nevera	●	SI	Activo	Otr	O			Unidad		3.0
150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●	SI	Activo	Otr				Unidad		0.0

Imagen 28. Almacén - Ir a Modificación Masiva

Nota: Para continuar con la transacción se debe hacer previamente un Subgrupo, bien sea en el visor de Modificación Masiva o previamente en el Visor del Almacén.

Una vez se ingrese se muestra de la siguiente forma:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaHistoria ArchivadaAdministración

Materiales y Repuestos » Modificar Masivamente

Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz	8.00
150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.00
150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.00
150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		39.00
150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pines	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.00
150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		18.00
150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.00
150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.00
150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		9.00
150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		7.00
150101M035	Tubo de luz negra.	●	SI	Activo	Otr				Tubos		1.00
150101M059	Tubo fluorescente de 32W 41K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.00
150101M105	Tubo fluorescente F-14	●	SI	Activo	Otr				Unidad		0.00
150101M119	Tubo FTE 26w/DBX/PLC 4 pines 41K	●	SI	Activo	Otr				Unidad		10.00
150101M121	Tubo FTE 39W 40/T12	●	SI	Activo	Otr				Unidad		30.00
150101M124	Tubo FTE 28W T8	●	SI	Activo	Otr				Unidad		0.00
150107M169	Tubo de 6 mts tipo L 1"	●	SI	Activo	Otr	0			Metros		1.00
150108M011	Tubo de silicona	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.00
150108M039	Tubo de 6 mts tipo L 1/2"	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.00
150108M040	Tubo de 6 mts tipo M 1/2"	●	SI	Activo	Otr	0			Metros		1.00
150108M041	Tubo de 6 mts tipo L 1 1/2"	●	SI	Activo	Otr	0			Metros		1.00
150108M052	Tubo silicona	●	SI	Activo	Otr	0			Tubos		2.00
150108M061	CORTA TUBO	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		16.00

Registros por página: 1001-23 de 23 / 708

« Primera PáginaAnterior1Siguiente» Última Página »

Imagen 29. Almacén - Visor Modificación Masiva

Para continuar dar un clic en el botón azul **modificación masiva** ubicado en la parte superior izquierda como se indica a continuación:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesParosÓrdenesHistoriaHistoria ArchivadaAdministración

Materiales y Repuestos » Modificar Masivamente

Código ^	Descripción	Indicadores	Inv	Estado	TT	ABC	Casilla	Parte N°	Un. Consumo	Referencia	Cant. Actual
150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad	Luz	8.00
150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		4.00
150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.00
150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		39.00
150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pines	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		10.00
150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		18.00
150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		8.00
150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		5.00
150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		9.00
150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		7.00
150101M035	Tubo de luz negra.	●	SI	Activo	Otr				Tubos		1.00
150101M059	Tubo fluorescente de 32W 41K	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.00
150101M105	Tubo fluorescente F-14	●	SI	Activo	Otr				Unidad		0.00
150101M119	Tubo FTE 26w/DBX/PLC 4 pines 41K	●	SI	Activo	Otr				Unidad		10.00
150101M121	Tubo FTE 39W 40/T12	●	SI	Activo	Otr				Unidad		30.00
150101M124	Tubo FTE 28W T8	●	SI	Activo	Otr				Unidad		0.00
150107M169	Tubo de 6 mts tipo L 1"	●	SI	Activo	Otr	0			Metros		1.00
150108M011	Tubo de silicona	●	SI	Activo	Otr				Unidad		1.00
150108M039	Tubo de 6 mts tipo L 1/2"	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		1.00
150108M040	Tubo de 6 mts tipo M 1/2"	●	SI	Activo	Otr	0			Metros		1.00
150108M041	Tubo de 6 mts tipo L 1 1/2"	●	SI	Activo	Otr	0			Metros		1.00
150108M052	Tubo silicona	●	SI	Activo	Otr	0			Tubos		2.00
150108M061	CORTA TUBO	●	SI	Activo	Otr	0			Unidad		16.00

Registros por página: 1001-23 de 23 / 708

« Primera PáginaAnterior1Siguiente» Última Página »

Imagen 30. Almacén - Ir a Modificación Masiva

A continuación se da una breve explicación de los componentes de la ventana detalle de Modificación Masiva una vez se escoja la opción ☒ Ficha Técnica como se muestra en la imagen:

Imagen 31. Almacén - Ventana Detalle Modificación Masiva

Modificar Solamente Este Repuesto: Al escoger esta opción, se ejecutan los cambios marcados (Estado, Almacén, Unidad de Consumo, Clase, Clasificación A, B, C, O, y Proveedor) al Repuesto o Material que se encuentre seleccionado en el visor.

Modificar Todos los Repuestos en el Visor: Al escoger esta opción, se ejecutan los cambios marcados (Estado, Almacén, Unidad de Consumo, Clase, Clasificación A, B, C, O, y Proveedor) a todos los Repuestos o Materiales que se encuentren en el visor.

Modificar Estado: Se modifica masivamente el estado Activo e Inactivo, de los Repuestos y/o Materiales que están previamente seleccionados en el visor. Los estados predefinidos son: Activo, I-Vencido, I-Otro, I-EOI (Excedente, Obsoleto e Inservible).

Imagen 32. Almacén - MM Modificar Estado

Modificar Almacén: Se modifica masivamente el Almacén, de los Repuestos y/o Materiales que están previamente registrados en el visor. El sistema lista los almacenes que se encuentran creados en la tabla de Almacenes en Infraestructura. Adicional, se debe dejar el switch en la posición de "Cambiar de Almacén".

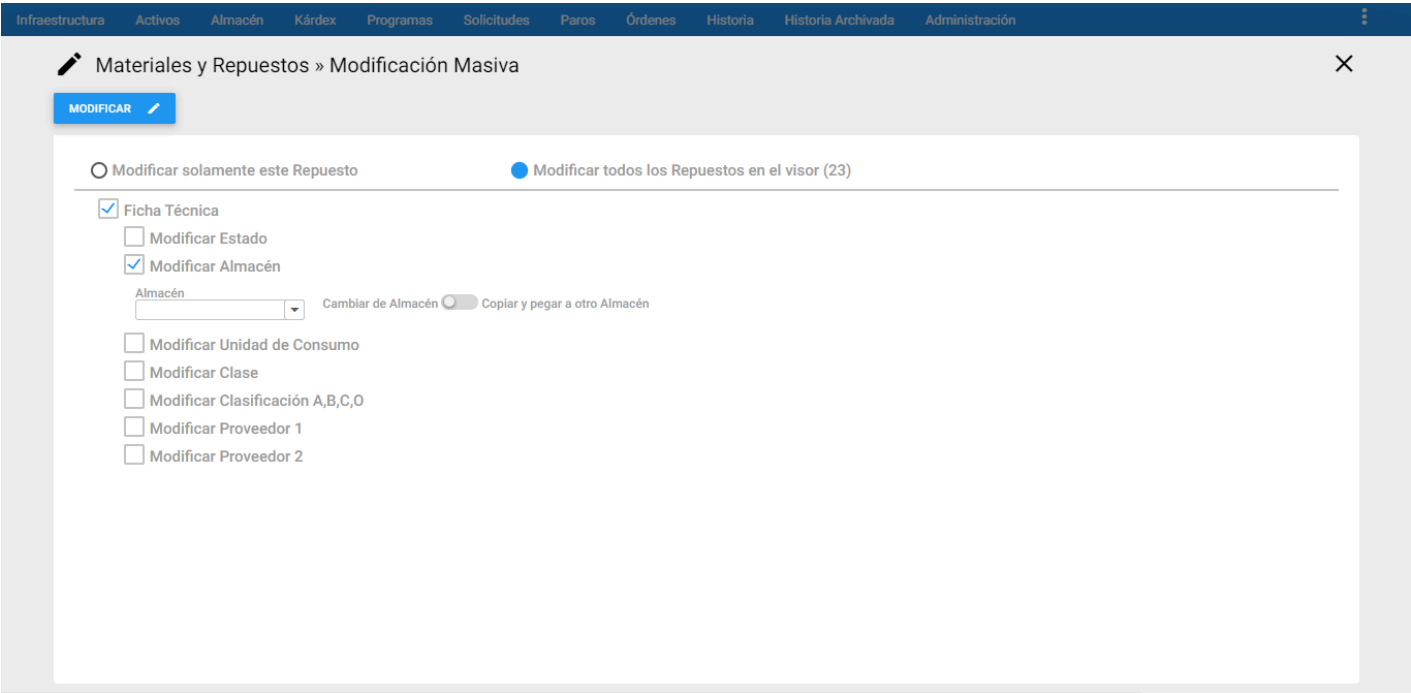


Imagen 33. Almacén - MM Almacén

Cuando se requiera Copiar un Repuesto o Material existente en un Almacén a otro Almacén, se debe hacer solamente a través de esta funcionalidad, para ello se debe elegir en primer lugar el Almacén al cual se va a asociar el Repuesto/Material que se va a ingresar y en segundo lugar se debe llevar el switch a la posición de “Copiar y pegar a otro Almacén”.

Modificar Unidad de Consumo: Se Modifica Masivamente la unidad de consumo de un Repuesto/Material. El sistema lista las unidades de medida que se encuentran creadas en la tabla de Unidades de Medida en Infraestructura.


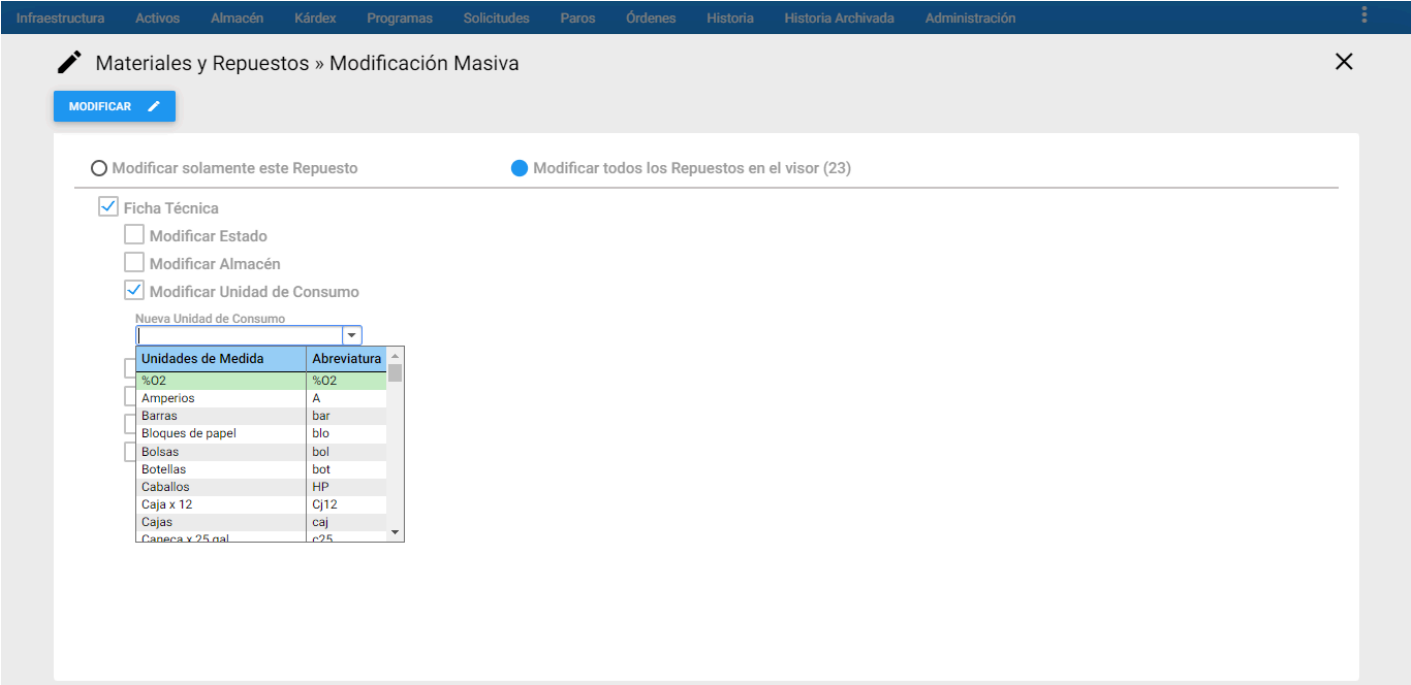


Imagen 34. Almacén - MM Unidad de Consumo

Modificar Clase: Se Modifica Masivamente la clase de un Repuesto/Material. El sistema muestra un campo para que el usuario digite la nueva clase.

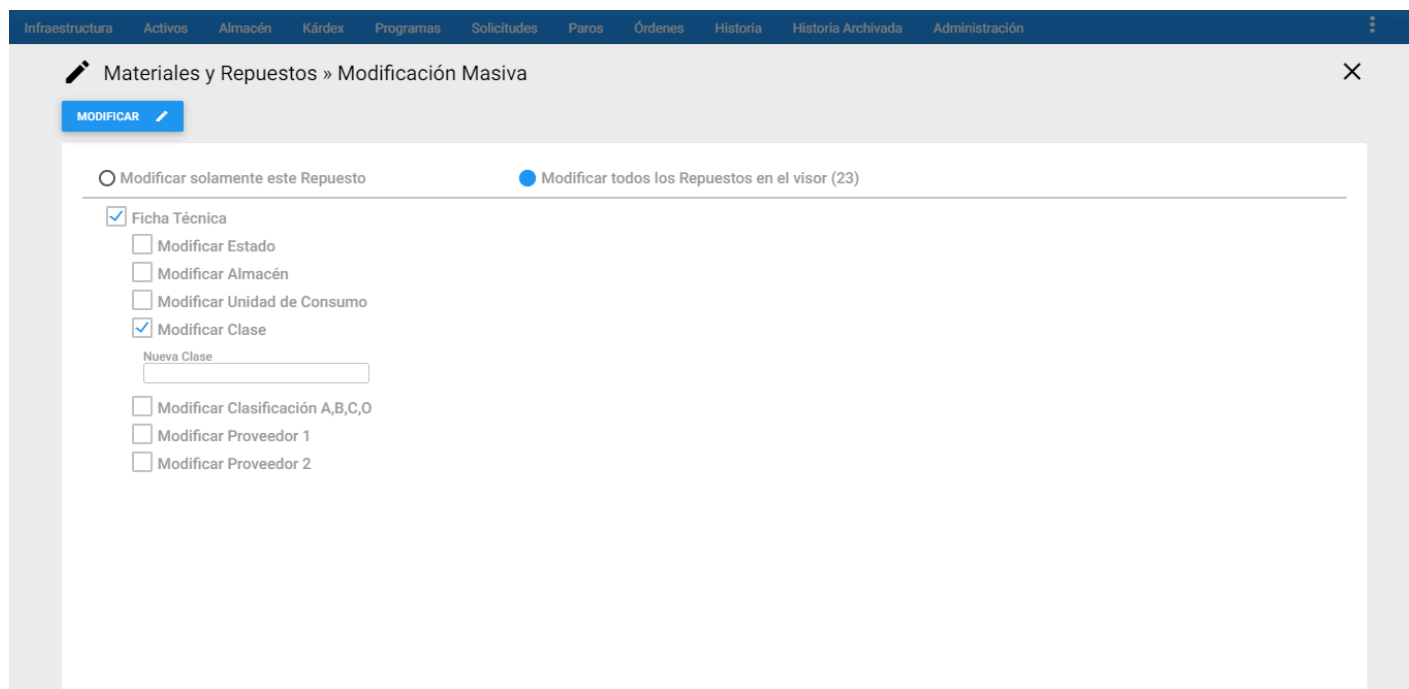

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Materiales y Repuestos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Repuesto ☒ Modificar todos los Repuestos en el visor (23)

☒ Ficha Técnica

- ☐ Modificar Estado
- ☐ Modificar Almacén
- ☐ Modificar Unidad de Consumo
- ☒ Modificar Clase

Nueva Clase


☐ Modificar Clasificación A,B,C,O

☐ Modificar Proveedor 1

☐ Modificar Proveedor 2

Imagen 35. Almacén - MM Clase

Modificar Clasificación A, B, C, O: Se Modifica Masivamente la clasificación A, B, C, O de un Repuesto/Material. El sistema muestra un campo para que el usuario digite la nueva clasificación A,B, C, O. Por defecto, se muestra un campo con la clasificación "O".

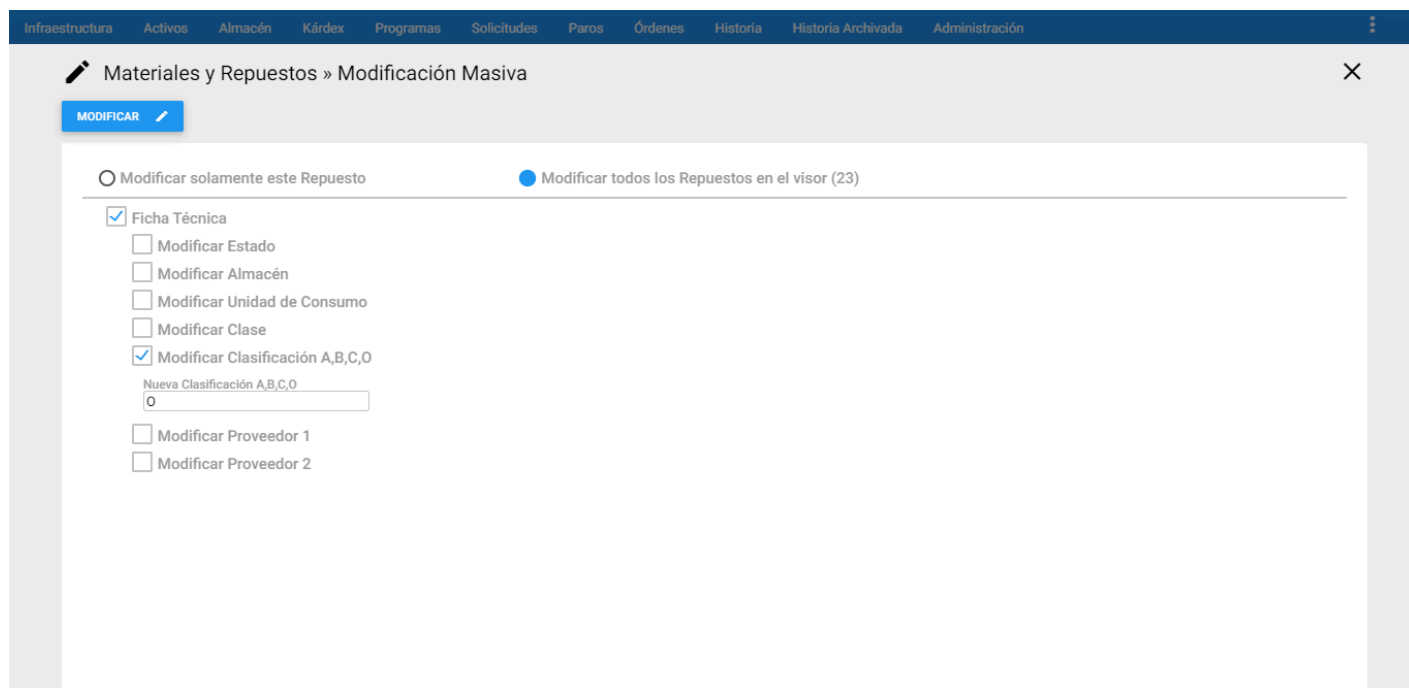

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Materiales y Repuestos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Repuesto ☒ Modificar todos los Repuestos en el visor (23)

☒ Ficha Técnica

- ☐ Modificar Estado
- ☐ Modificar Almacén
- ☐ Modificar Unidad de Consumo
- ☐ Modificar Clase
- ☒ Modificar Clasificación A,B,C,O

Nueva Clasificación A,B,C,O

O

☐ Modificar Proveedor 1

☐ Modificar Proveedor 2

Imagen 36. Almacén - MM Clasificación

Modificar Proveedor 1: Se Modifica Masivamente el Proveedor 1 de un conjunto de Repuestos/Materiales. El sistema lista los Proveedores que se encuentran creados en la tabla de Terceros como tipo PF provenientes módulo de Infraestructura.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Materiales y Repuestos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Repuesto
 ☒ Modificar todos los Repuestos en el visor (23)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Almacén
 ☐ Modificar Unidad de Consumo
 ☐ Modificar Clase
 ☐ Modificar Clasificación A,B,C,O
 ☒ Modificar Proveedor 1

Proveedor 1

Tercero	Identificación
890300292-0	Laboratorios Baxter S.A
890943142-3	Instrumecol Ltda
811013556-1S	Bioservicios
860515402-9	Lexco
800136505-4	Datecsa
860005114-4	Linde Colombia
890924197-7C	EMCO
860026442-5	B. Braun Medical S.A
800244270-1	Los Pinos
890925875-7	Audencol

Imagen 37. Almacén - MM Proveedor 1

Modificar Proveedor 2: Se Modifica Masivamente el Proveedor 2 de un conjunto o un subgrupo Repuestos/Mtaeriales. El sistema lista los Proveedores que se encuentran creados en la tabla de Terceros como tipo PF en el módulo de Infraestructura.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Materiales y Repuestos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Repuesto
 ☒ Modificar todos los Repuestos en el visor (23)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Almacén
 ☐ Modificar Unidad de Consumo
 ☐ Modificar Clase
 ☐ Modificar Clasificación A,B,C,O
 ☐ Modificar Proveedor 1
 ☒ Modificar Proveedor 2

Proveedor 2

Tercero	Identificación
890300292-0	Laboratorios Baxter S.A
890943142-3	Instrumecol Ltda
811013556-1S	Bioservicios
860515402-9	Lexco
800136505-4	Datecsa
860005114-4	Linde Colombia
890924197-7C	EMCO
860026442-5	B. Braun Medical S.A
800244270-1	Los Pinos
890925875-7	Audencol

Imagen 38. Almacén - MM Proveedor 2

Para hacer efectiva la Modificación Masiva, una vez que se haya elegido cualquiera de las opciones anteriores, se debe dar clic en el botón de la parte superior **modificar**, el sistema muestra el primer mensaje de advertencia para el usuario así:

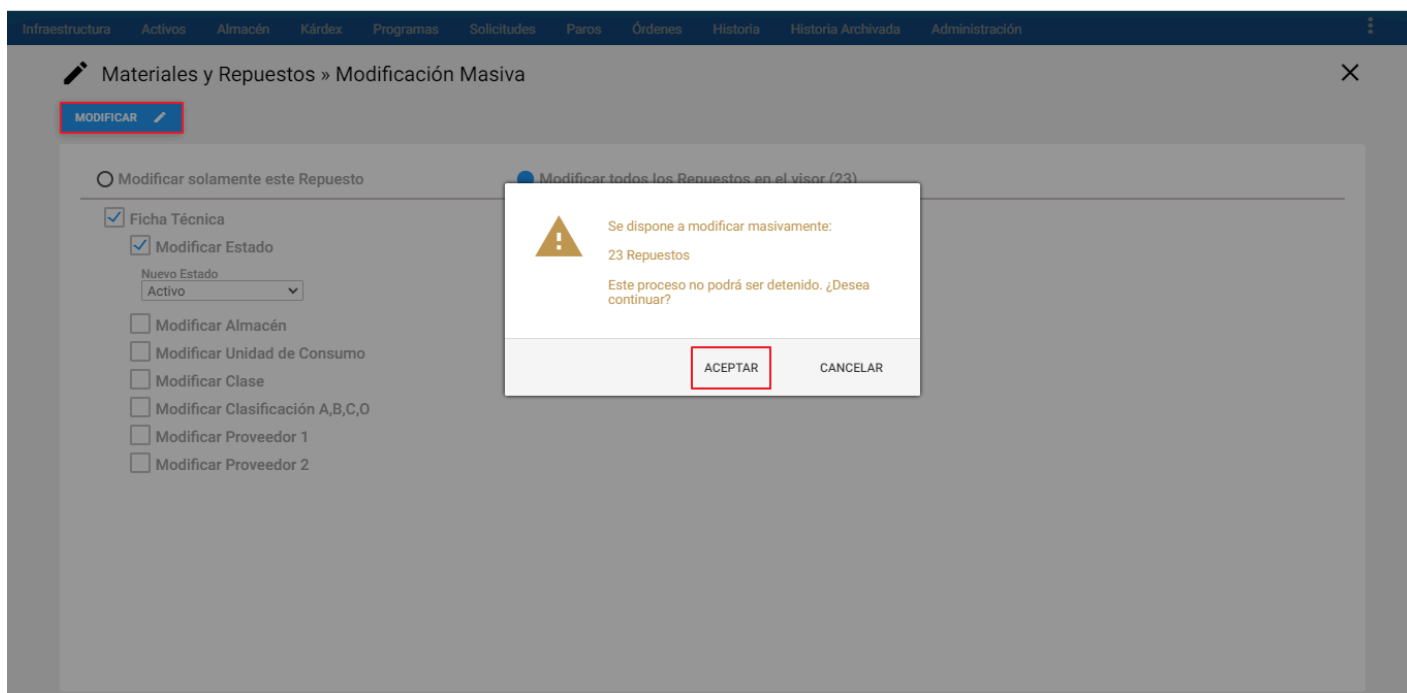


Imagen 39. Almacén - MM Mensaje Alerta 1

Para continuar dar clic en el botón del mensaje alerta [aceptar](#), a continuación por seguridad el sistema el segundo mensaje alerta:

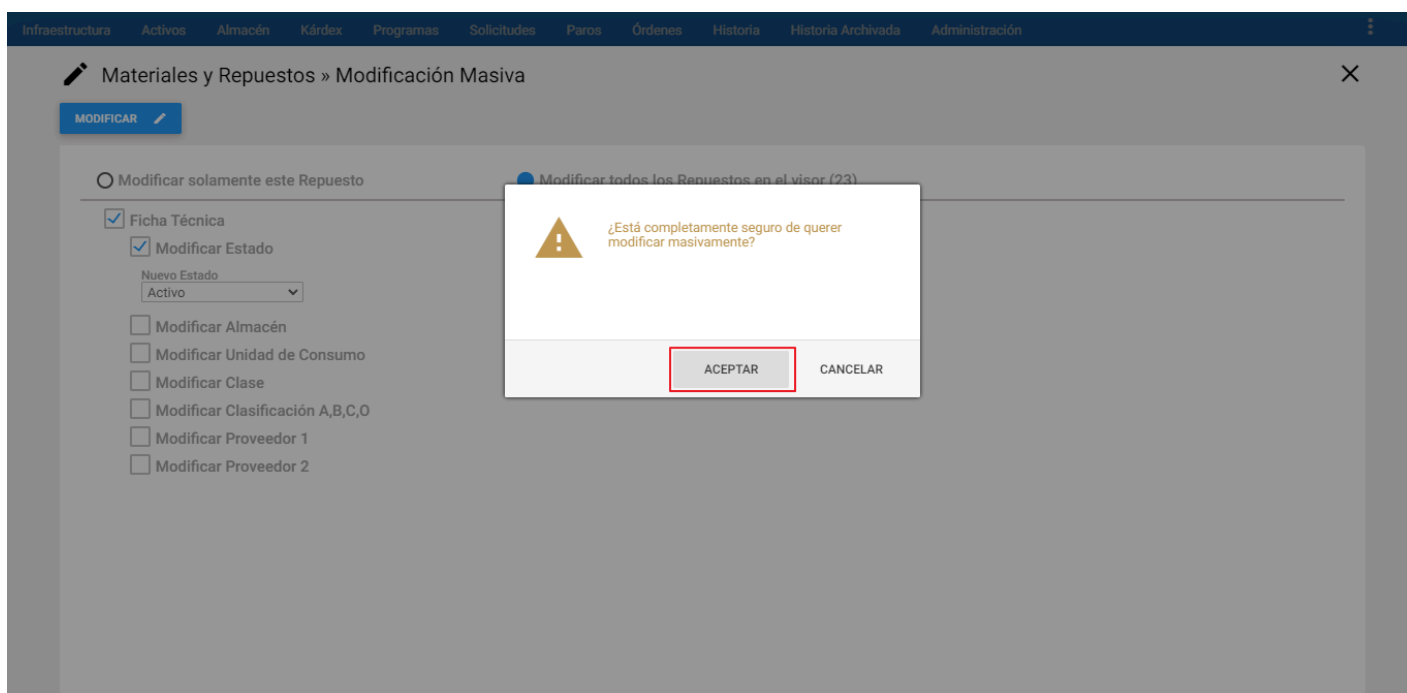


Imagen 40. Almacén - MM Mensaje Alerta 2

Para finalizar dar clic en [aceptar](#), el sistema confirma la transacción con el siguiente mensaje:

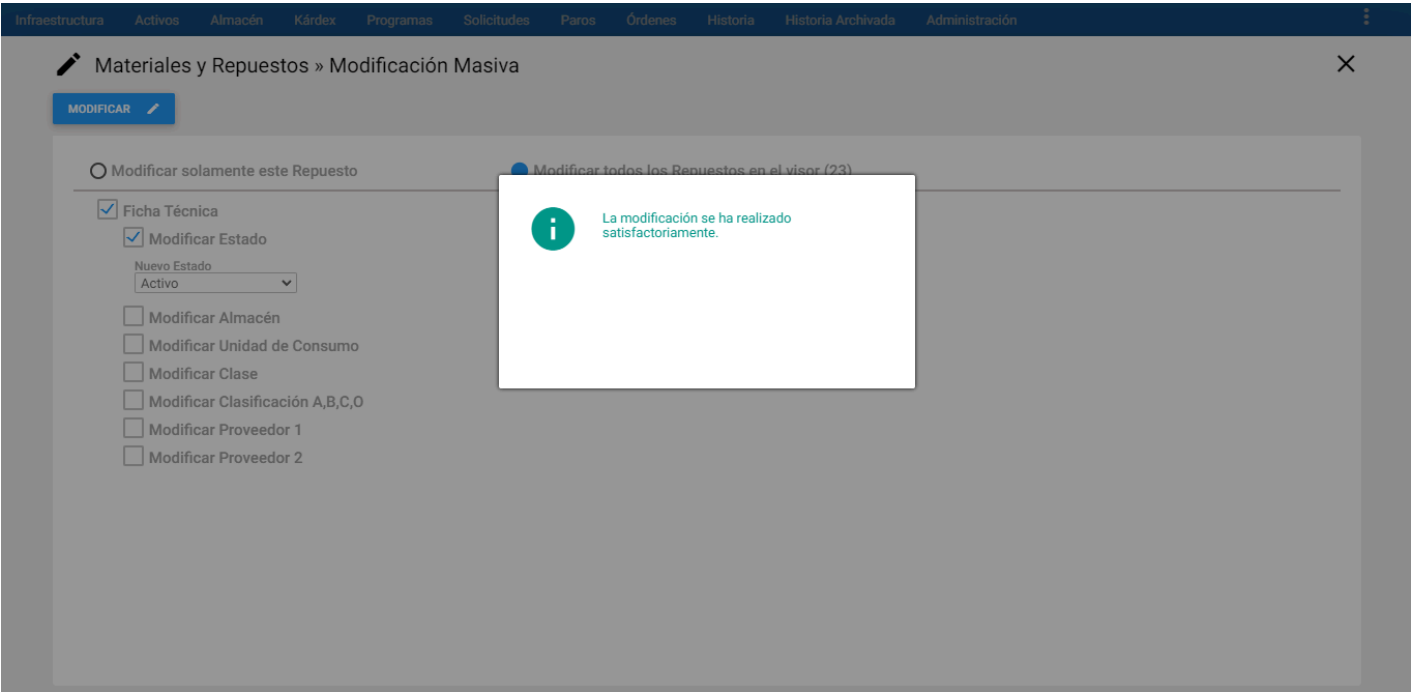


Imagen 41. Almacén - MM Mensaje Alerta 3

Asociar con Activos

El comando Asociar a Activos del submenú Repuestos permite asociar un Repuesto con el o los Activos a los que sirve. Esta asociación es opcional, pero es muy útil en caso de necesitar ubicar con facilidad aquellos Repuestos específicos que solo sirven a Activos específicos.

Para acceder a esta opción se debe contar con los permisos de Repuestos, y a continuación se sobrepone el cursor sobre el Almacén en cuestión, el cual despliega al lado derecho el conjunto de transacciones disponibles para ese Almacén, luego se elige la transacción **Asociar con Activos**, como se indica a continuación:

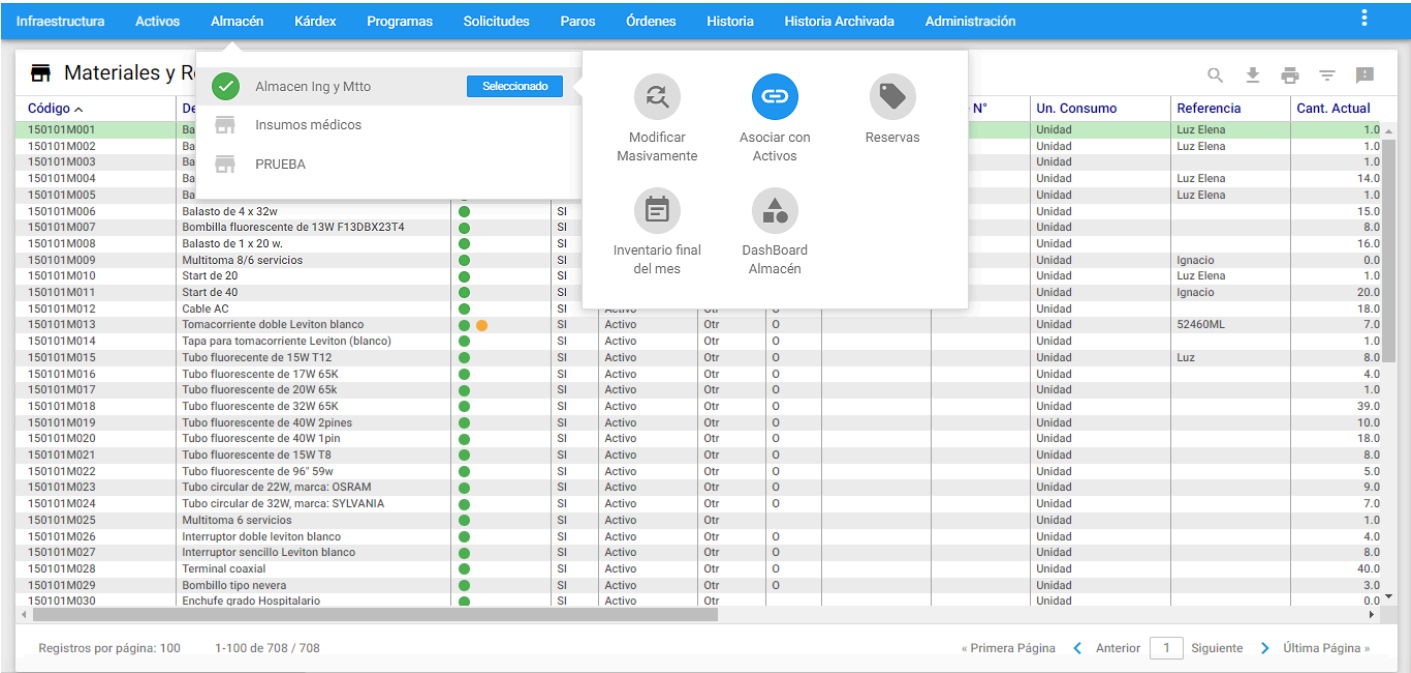


Imagen 42. Almacén - Ir a Asociar con Activos

Al ingresar, en el lado izquierdo se visualizan los Activos y en el derecho los Repuestos existentes en el almacén seleccionado previamente. Para navegar entre las páginas se debe dar clic al icono <> ubicado en la parte inferior derecha de cada recuadro:

Activos

Código	Descripción	Estado	Indicado
BMPE-BM-57	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-48	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-44	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-86	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-87	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-08	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-09	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-10	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-11	BASCULA ADULTO	I - No está en Opera...	●
BMPE-BM-60	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-07	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-17	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-23	BASCULA ADULTO	I - No está en Opera...	●
BMPE-BM-13	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-29	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-30	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-31	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-32	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-12	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-35	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-36	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-40	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-14	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-15	BASCULA ADULTO	I - No está en Opera...	●
BMPE-BM-06	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-18	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-19	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●

Registros por página: 100 301-400 de 6108 / 6108

Materiales y Repuestos

Cantidad	Código	Descripción	Inc
	150101M001	Balasto de 2 x 40 w.	●
	150101M002	Balasto de 2 x 96 w.	●
	150101M003	Balasto para ojos de Buey de 13W	●
	150101M004	Balasto de 2 x 32 w.	●
	150101M005	Balasto de 2 x 40 w.	●
	150101M006	Balasto de 4 x 32w	●
	150101M007	Bombilla fluorescente de 13W F13DBX23T4	●
	150101M008	Balasto de 1 x 20 w.	●
	150101M009	Multitoma 8/6 servicios	●
	150101M010	Start de 20	●
	150101M011	Start de 40	●
	150101M012	Cable AC	●
	150101M013	Tomacorriente doble Leviton blanco	●
	150101M014	Tapa para tomacorriente Leviton (blanco)	●
	150101M015	Tubo fluorescente de 15W T12	●
	150101M016	Tubo fluorescente de 17W 65K	●
	150101M017	Tubo fluorescente de 20W 65K	●
	150101M018	Tubo fluorescente de 32W 65K	●
	150101M019	Tubo fluorescente de 40W 2pin	●
	150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●
	150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●
	150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●
	150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●
	150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●
	150101M025	Multitoma 6 servicios	●
	150101M026	Interruptor doble leviton blanco	●
	150101M027	Interruptor sencillo Leviton blanco	●

Registros por página: 100 1-100 de 708 / 708

Imagen 43. Almacén - Desplazarse en Asociar con Activos

También se visualizan los indicadores correspondientes de cada módulo, además se recomienda hacer subgrupos para facilitar la asociación de cada lado, como se muestra a continuación:

Activos

Código	Descripción	Estado	Indicado
BMPL-AB-01	AGITADOR BASCULANTE	I - No está en Opera...	●
BMPE-BM-66	BASCULA	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-03	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-99	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-54	BASCULA	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-91	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-92	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-94	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-95	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-96	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-39	BASCULA	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-112	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-55	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-53	BASCULA	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-67	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-103	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-104	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-105	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-106	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-102	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-116	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-120	BASCULA	A - En Operación	●
BMPE-BM-90	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-56	BASCULA ADULTO	I - Dado de Baja	●
BMPE-BM-57	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-48	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●
BMPE-BM-44	BASCULA ADULTO	A - En Operación	●

Registros por página: 100 1-77 de 77 / 6108

Materiales y Repuestos

Cantidad	Código	Descripción	Inc
	150104M003	Sensor saturación Datex conector rectangular	●
	150104M004	Sensor saturación Datex conector redondo	●
	150104M005	Sensor Massimo	●
	150104M006	Sensor Nellcor	●
	150104M007	Sensor Nellcor oximax	●
	150104M008	Sensor Novamatrix generico	●
	150104M029	Sensor de flujo Puritan Bennett	●
	150104M030	Sensor de flujo Hamilton Galileo Rafael	●
	150104M053	Sensor de flujo Maquina de Anestesia	●
	150104M086	Sensor de Oxigeno Blease	●

Registros por página: 100 1-10 de 10 / 708

Imagen 44. Almacén - Comandos Asociar con Activos

La asociación de los Repuestos con los Activos, inicia al dar clic a los **check box**

☐ **/a>**, que están al lado izquierdo en la primera columna de la porción de Activos y en la porción derecha de Repuestos. Es posible seleccionar uno o varios al tiempo, de esta manera

Activos

Código	Descripción	Estado	Indicado
APCE-CM-03	CARRO TERMO	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-CM-04	CARRO TERMO	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-CM-05	CARRO TERMO	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-CM-06	CARRO TERMO	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-CP-01	CRISPETERA	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-DJ-01	DISPENSADOR DE JUGOS DE 2 TANQUES	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-FD-01	FREIDORA ELECTRICA DE MESA	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-MW-01	MICROONDAS	A - En Operación	● ● ● ● ●
APCE-MW-02	MICROONDAS	A - En Operación	● ● ● ● ●
APCE-MW-03	MICROONDAS INDUSTRIAL	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-MW-04	MICROONDAS INDUSTRIAL	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCE-SC-01	SANDUCHERA	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCG-EF-01	ESTUFA A GAS	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCG-FD-01	FREIDORA A GAS	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCG-GE-01	MARMITA A GAS Y BAÑO MARÍA	I - Dado de Baja	● ● ● ● ●
APCG-GE-02	BAÑO MARÍA	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCG-GE-03	MARMITA A GAS	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCG-HN-01	HORNO	A - En Operación	● ● ● ● ●
APCG-PF-01	PLANCHA FRY-TOPS	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCG-ST-01	SARTEN A GAS	I - No está en Opera...	● ● ● ● ●
APCO-CO-01	COMPRESOR AIRE MEDICINAL	I - Dado de Baja	● ● ● ● ●
APCO-CO-02	SISTEMA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL	A - En Operación	● ● ● ● ●
APCO-MN-01	MANOMETRO PRESION SALIDA AIRE MEDICINAL	I - Dado de Baja	● ● ● ● ●
APCO-MN-03	MANOMETRO PRESION DE OXIGENO	A - En Operación	● ● ● ● ●
APCO-MN-04	MANOMETRO PRESION DE OXIDO NITROSO	A - En Operación	● ● ● ● ●
APCO-MN-05	MANOMETRO PRESION DE AIRE MEDICINAL	A - En Operación	● ● ● ● ●

Registros por página: 100 401-500 de 6108 / 6108

Materiales y Repuestos

Cantidad	Código	Descripción	Inc
	150101M020	Tubo fluorescente de 40W 1pin	●
	150101M021	Tubo fluorescente de 15W T8	●
	150101M022	Tubo fluorescente de 96" 59w	●
	150101M023	Tubo circular de 22W, marca: OSRAM	●
	150101M024	Tubo circular de 32W, marca: SYLVANIA	●
	150101M025	Multitoma 6 servicios	●
	150101M026	Interruptor doble leviton blanco	●
	150101M027	Interruptor sencillo Leviton blanco	●
	150101M028	Terminal coaxial	●
	150101M029	Bombillo tipo nevera	●
	150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●
	150101M031	Cable telefonico Espiral.	●
	150101M032	cable coaxial tv	●
	150101M033	Cable telefonico plano	●
	150101M034	Pulg telefonico	●
	150101M035	Tubo de luz negra.	●
	150101M036	Cordon-pera para habitación timbre	●
	150101M037	Toma Telefonica	●
	150101M038	Multitoma 6x2	●
	150101M039	Canaleta lisa 20x12	●
	150101M040	Cortafrio	●
	150101M041	Electrodo 2500W-110V para calentar agua.	●
	150101M042	Extension electrica 30mts.	●
	150101M044	Tapa Lisa PVC 2X4	●
	150101M045	Ye telefonica	●
	150101M046	Suiche triple blanco	●
	150101M047	Romhillos 60W 120V	●

Registros por página: 100 1-100 de 708 / 708

ASOCIAR **VER RP ASOCIADOS** **VER AC ASOCIADOS**

Imagen 45. Almacén - Selección Asociar con Activos

En el ejemplo anterior se asociaron tres Repuestos diferentes, de cada uno una unidad para dos Activos.

Para terminar la transacción se da clic al botón ubicado en la parte inferior **asociar** el cual se muestra una notificación confirmando la ejecución de la transacción y se observa el resultado de la asociación realizada de manera resumida así:

Activos

Código	Descripción	Estado	Indicadores
APCE-MW-01	MICROONDAS	A - En Operación	● ● ● ● ●
APCG-HN-01	HORNO	A - En Operación	● ● ● ● ●

Registros por página: 100 1-2 de 2 / 6108

Materiales y Repuestos

Cantidad	Código	Descripción	Indice
1	150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●
1	150101M041	Electrodo 2500W-110V para calentar agua.	●

Registros por página: 100 1-3 de 3 / 708

ASOCIAR **DESASOCIAR** **VER RP ASOCIADOS** **VER AC ASOCIADOS**

La Asociación se ha realizado correctamente

Imagen 46. Almacén - Asociar con Activos

Si el usuario desea ver los repuestos asociados a un Activo, se debe elegir un único Activo del lado izquierdo y se da clic al botón inferior

ver rp asociados, AM mostrará en el lado derecho los Repuestos que fueron asociados al Activo seleccionado, ejemplo:

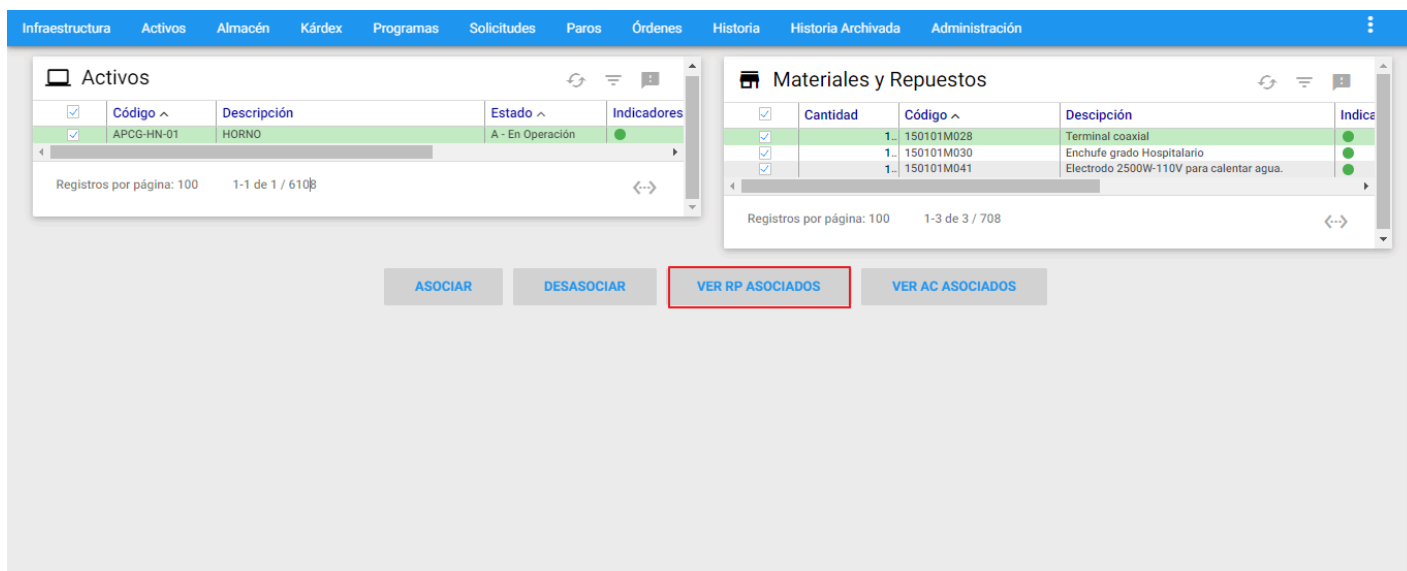


Imagen 47. Almacén - Ver Activo asociado a Repuestos

Nota: Si se eligen dos o más Activos, el sistema mostrará un mensaje indicando que solo se debe seleccionar un solo Activo.

Por otro lado, si el usuario desea ver la asociación que tiene un determinado Repuesto a Activos, se debe elegir un único Repuesto del lado derecho y se da clic al botón inferior **ver ac asociados**, **AM** mostrará en el lado izquierdo los Activos que tienen asociados el Repuesto seleccionado.

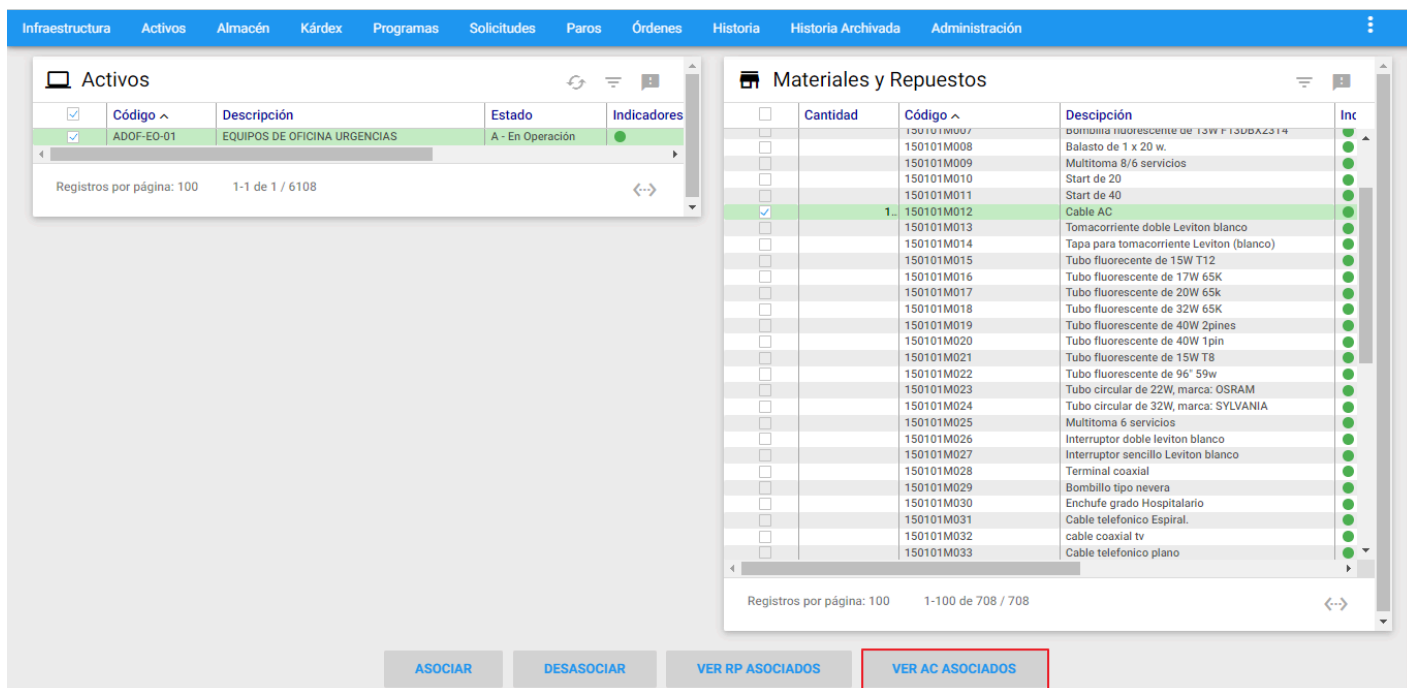


Imagen 48. Almacén - Ver Repuesto asociado a Activos

Nota: Si se eligen dos o más Repuestos, el sistema mostrará un mensaje indicando que solo se debe seleccionar un solo Repuesto.

Si el usuario desea **Desasociar** un Repuesto a uno o varios Activos, se deben elegir primero el Repuesto a través de los check box ☐. Se ilustra un ejemplo:

Activos

Código	Descripción	Estado	Indicado
ADAV-AP-01	AMPLIFICADOR DE SONIDO	A - En Operación	●
ADAV-DW-01	QUEMADOR DE DVD	I - Dado de Baja	●
ADAV-DW-02	QUEMADOR DE DVD	A - En Operación	●
ADAV-GB-01	GRABADORA DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-GB-02	GRABADORA DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-GB-03	GRABADORA DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-GB-04	GRABADORA DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-GB-05	GRABADORA DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-GB-06	GRABADORA DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-GB-07	KIT DE TRANSCRIPCIÓN PARA GRABADORA	I - No está en Opera...	●
ADAV-GB-08	KIT DE TRANSCRIPCIÓN PARA GRABADORA	A - En Operación	●
ADAV-RV-01	LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-RV-02	LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-RV-03	LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-RV-04	LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ	A - En Operación	●
ADAV-VH-01	VHS	I - Dado de Baja	●
ADAV-VH-02	VHS	I - Dado de Baja	●
ADAV-VH-03	VHS	I - Dado de Baja	●
ADAV-VH-04	VHS	I - Dado de Baja	●
ADAV-VH-05	VHS	A - En Operación	●
ADCO-RD-01	RADIO ADMON	I - Dado de Baja	●
ADCO-RD-02	RADIO CONTROL INTERNO	I - Dado de Baja	●
ADCO-RD-03	RADIO CENTRAL DE CAMILLEROS	I - Dado de Baja	●
ADCO-RD-04	RADIO ASIGNACIÓN DE CAMILLEROS	I - Dado de Baja	●

Registros por página: 100 1-100 de 6108 / 6108

Materiales y Repuestos

Cantidad	Código	Descripción	Inc
	150101M027	Interruptor simple Leviton blanco	●
	150101M028	Terminal coaxial	●
	150101M029	Bombillo tipo nevera	●
	150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●
	150101M031	Cable telefonico Espiral.	●
	150101M032	Cable coaxial tv	●
	150101M033	Cable telefonico plano	●
	150101M034	Pulg telefonico	●
	150101M035	Tubo de luz negra.	●
	150101M036	Cordon-pera para habitación timbre	●
	150101M037	Toma Telefonica	●
	150101M038	Multitoma 6x2	●
	150101M039	Canaleta lisa 20x12	●
	150101M040	Cortafrio	●
1	150101M041	Electrodo 2500W-110V para calentar agua.	●
	150101M042	Extension electrica 30mts.	●
	150101M044	Tapa Lisa PVC 2X4	●
	150101M045	Ye telefonica	●
	150101M046	Suiche triple blanco	●
	150101M047	Bombillos 60W 120V	●
	150101M048	Alambre duplex de 2*12mts	●
	150101M049	Caja galvanizada eléctrica 4x4	●
	150101M050	Juego de socket para lámpara Slim-Line	●
	150101M051	Transformador general purpose 1,5 KVA	●
	150101M052	Entrada a caja eléctrica PVC de 3/4"	●
	150101M053	Pulsador de timbre de sobreponer	●

Registros por página: 100 1-100 de 708 / 708

ASOCIAR **VER RP ASOCIADOS** **VER AC ASOCIADOS**

Imagen 49. Almacén - Seleccionar Repuesto asociado a Activos

Activos

Código	Descripción	Estado	Indicadores
APCE-MW-01	MICROONDAS	A - En Operación	●
APCG-HN-01	HORNO	A - En Operación	●

Registros por página: 100 1-2 de 2 / 6108

Materiales y Repuestos

Cantidad	Código	Descripción	Inc
	150101M027	Interruptor simple Leviton blanco	●
	150101M028	Terminal coaxial	●
	150101M029	Bombillo tipo nevera	●
	150101M030	Enchufe grado Hospitalario	●
	150101M031	Cable telefonico Espiral.	●
	150101M032	Cable coaxial tv	●
	150101M033	Cable telefonico plano	●
	150101M034	Pulg telefonico	●
	150101M035	Tubo de luz negra.	●
	150101M036	Cordon-pera para habitación timbre	●
	150101M037	Toma Telefonica	●
	150101M038	Multitoma 6x2	●
	150101M039	Canaleta lisa 20x12	●
	150101M040	Cortafrio	●
1	150101M041	Electrodo 2500W-110V para calentar agua.	●
	150101M042	Extension electrica 30mts.	●
	150101M044	Tapa Lisa PVC 2X4	●
	150101M045	Ye telefonica	●
	150101M046	Suiche triple blanco	●
	150101M047	Bombillos 60W 120V	●
	150101M048	Alambre duplex de 2*12mts	●
	150101M049	Caja galvanizada eléctrica 4x4	●
	150101M050	Juego de socket para lámpara Slim-Line	●
	150101M051	Transformador general purpose 1,5 KVA	●
	150101M052	Entrada a caja eléctrica PVC de 3/4"	●
	150101M053	Pulsador de timbre de sobreponer	●

Registros por página: 100 1-100 de 708 / 708

ASOCIAR **DESASOCIAR** **VER RP ASOCIADOS** **VER AC ASOCIADOS**

Imagen 50. Almacén - Ver AC asociados

Para terminar la transacción **Desasociar** se da clic al botón **desasociar** inmediatamente se muestra un mensaje confirmando la ejecución de la transacción y se observa el resultado de la desasociación realizada.

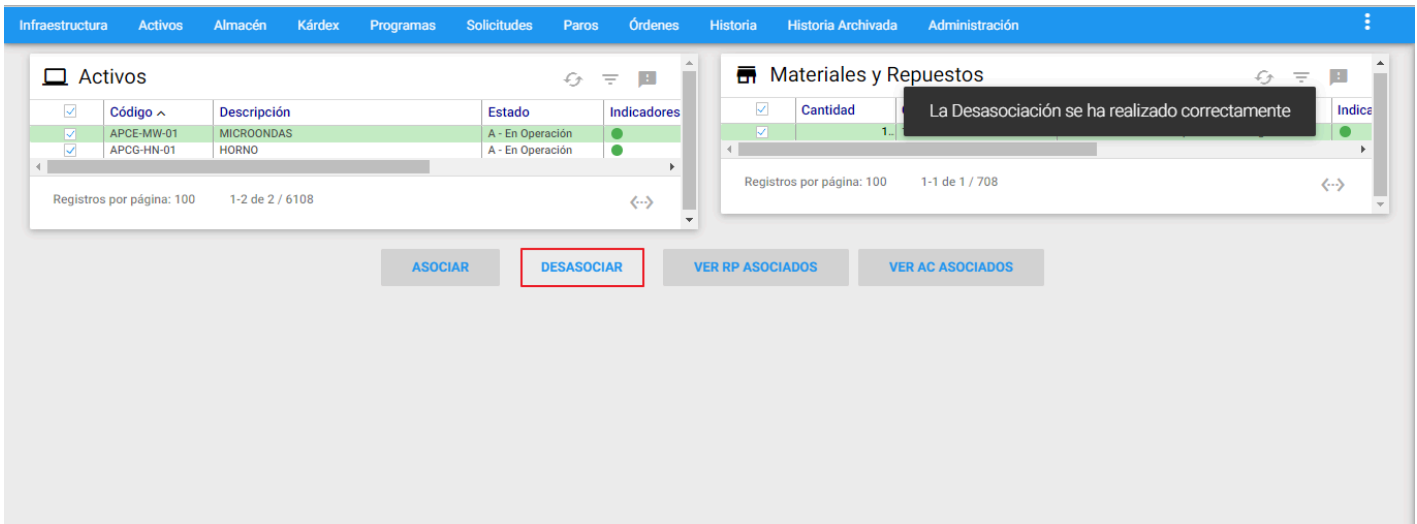


Imagen 51. Almacén - Desasociar

Reservas

Es una transacción en Almacén llamada Reservas, la cual como su nombre lo indica permite registrar y cancelar reservas, del Repuesto o Material seleccionado en el visor. Estas Reservas son realizadas por el departamento de Mantenimiento, posibilitando definir el número de la OT que va a hacer el consumo del Repuesto Reservado.

Para hacer reservas se requieren permisos previos de usuario del Almacén en cuestión para hacer reservas.

Para acceder a esta transacción se sobrepone el cursor sobre el Almacén en cuestión y al lado derecho se despliega el conjunto de transacciones disponibles para ese almacén, luego se elige **“Reservas”** como se muestra a continuación:

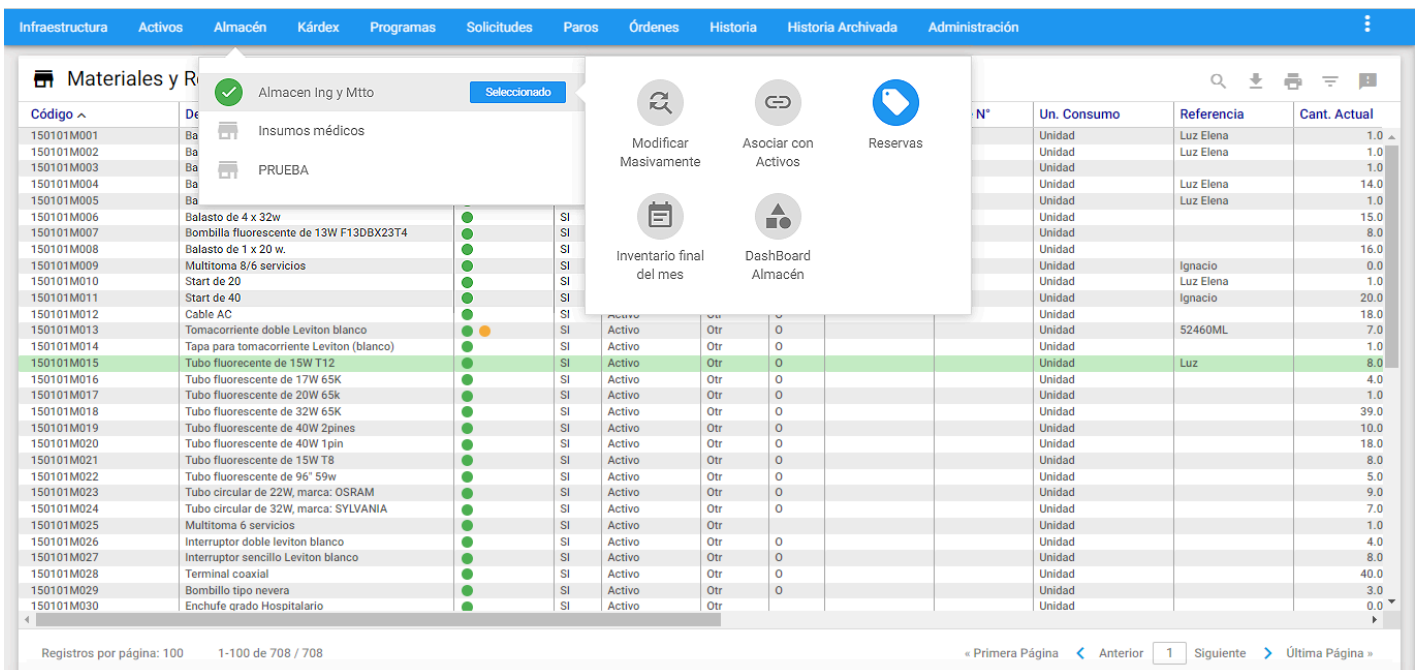


Imagen 52. Almacén - Ir a Reservas

Al ingresar se visualiza la ventana Visor de Reservas, cada título en azul permite organizar la información ascendente/descendente.

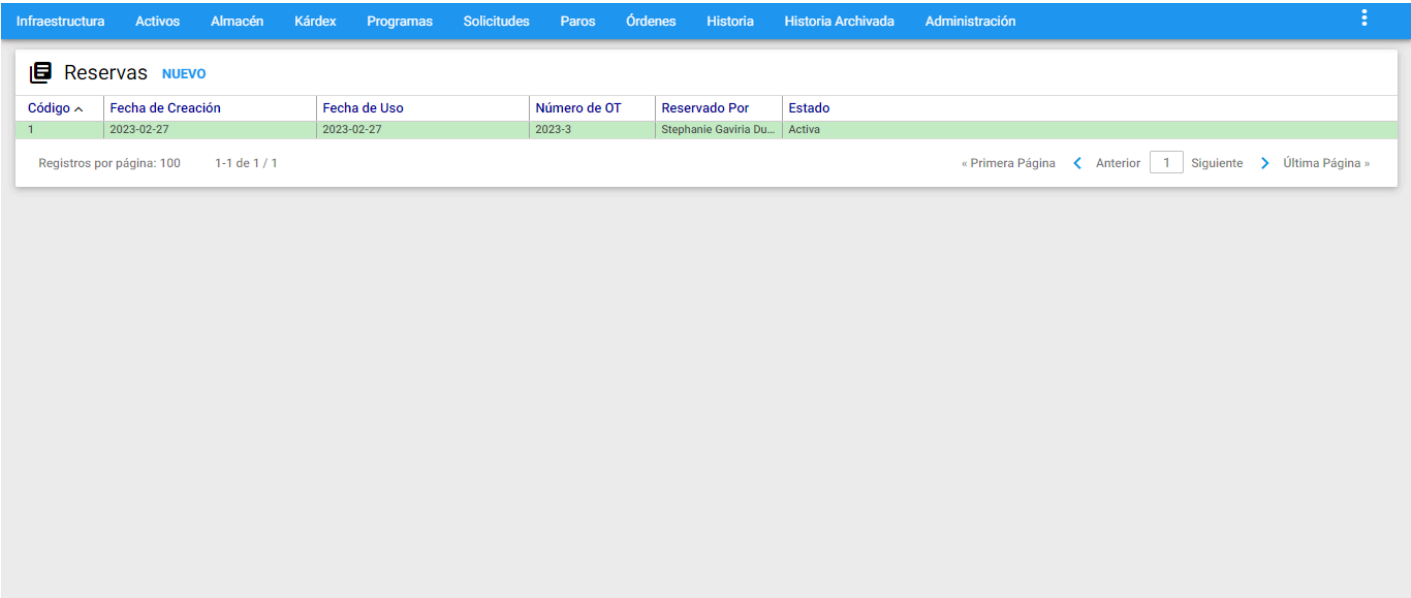


Imagen 53. Almacén - Visor Reservas

Para el detalle de un registro se da clic sobre él y se muestra a continuación la Ventana Detalle de la Reserva:

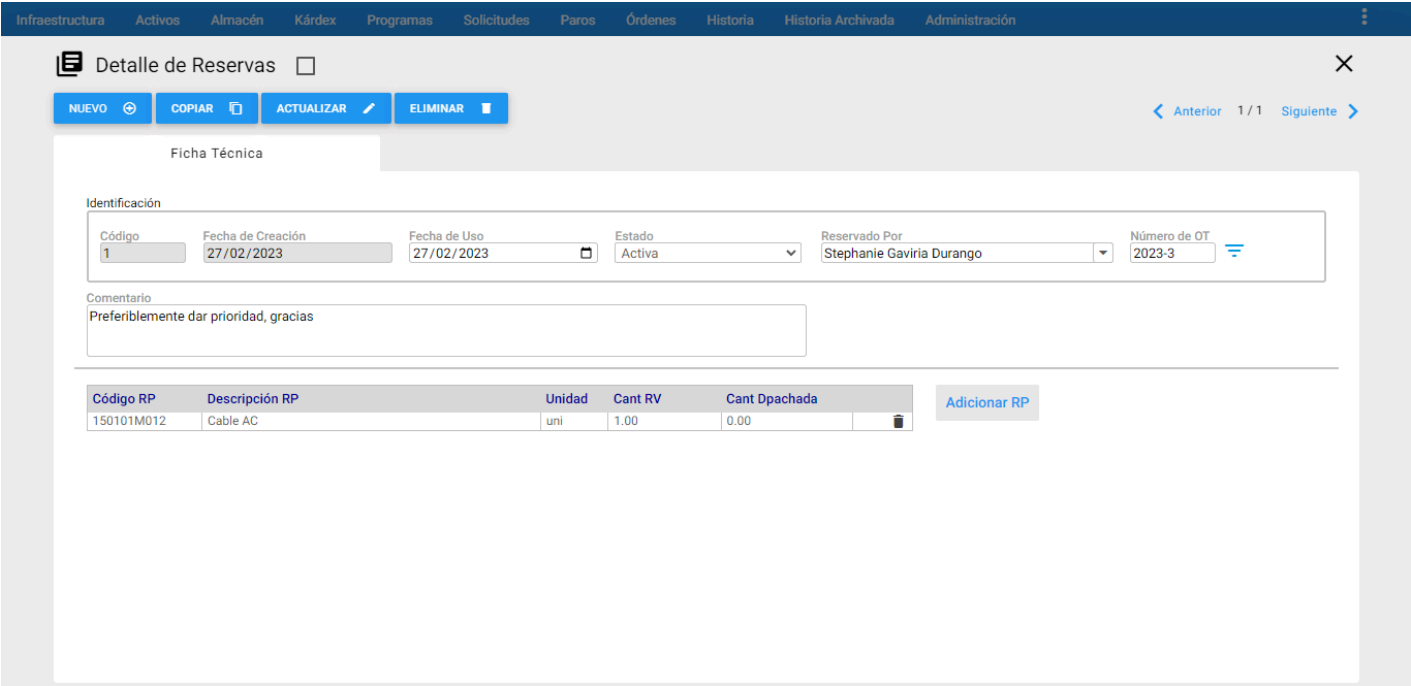


Imagen 54. Almacén - Detalle Reservas

A continuación se describe cada campo:

- Identificación:** Es el recuadro que contiene la información general de la reserva como código, Fecha de Creación, Fecha de uso, Estado de la reserva, Nombre de la persona que hace la reserva y número de OT.
- Código:** Es asignado automáticamente por el sistema, consiste en un ordinal. Este campo no es modificable por el usuario.
- Fecha de Creación:** Es la fecha en la que se realiza la reserva del Repuesto seleccionado en el visor. No se puede modificar. El programa la asigna desde la fecha del sistema.
- Fecha de Uso:** Es la fecha en la que se tiene planeado utilizar el Repuesto seleccionado en el visor. De acuerdo con esta fecha, la persona encargada del Almacén debe mantener las unidades reservadas, disponibles sólo para quién registró la reserva. Se permite poner desde la fecha actual en adelante.
- Estado:** Informa acerca del curso de la Reserva. Puede ser Activa, Finalizada o Cancelada.

Reservado por: Es la persona que registra la Reserva de las unidades del Repuesto seleccionado.

Número de OT: Este es un campo, obligatorio que exige un consecutivo de OT para hacer la reserva y así el Almacenista pueda ejecutar la transacción en el módulo de Kardex. Es posible escribir directamente el número de la OT o elegir una OT a través del Subgrupo al lado derecho del campo. ⇅ el cual la ventana visor de Órdenes.

Cantidad: Es el número de unidades del Repuesto que se desea Reservar.

Comentario: Se pueden agregar aquí, observaciones o comentarios referentes a la reserva.

Nota: El estado Finalizada, solo se actualiza desde el módulo de Kárdex a través de la transacción de Salida tipo Reservas para la OT en cuestión (este tipo de salida se configura desde la tabla de infraestructura - Conceptos de Kardex).

A continuación se describe como adicionar Repuestos a la reserva:

Adicionar Repuestos

Esta opción permite definir los Repuestos que serán reservados. En la parte izquierda de la ventana aparece un nuevo Visor en el que irán apareciendo los Repuestos que se van creando en la ventana Detalle, mientras que en la parte derecha aparece los campos para crear o actualizar la información de los Repuestos a reservar. Para continuar dar clic en el botón **adicionar rp** y a continuación se abre el siguiente formulario:

Imagen 55. Almacén - Adicionar RP Reservas

A continuación se describen los campos que componen esta porción de información adicional:

Código RP: En este campo se elige el código del Repuesto, desde una ventana de selección de Repuestos a través de un clic en el Subgrupo ⇅ que se encuentra al lado derecho del campo. Este comando trae el visor de Repuestos, para añadir el Repuesto se debe dar un doble clic sobre la selección, luego de esto, aparece automáticamente diligenciados la descripción del Repuesto, la cantidad actual y la disponible.

Descripción RP: En este campo se visualiza la información de la descripción del Repuesto seleccionado. No se puede modificar por parte del usuario.

Cantidad Actual: En este campo se muestra la cantidad en existencia del Repuesto seleccionado. No se puede modificar por parte del usuario.

Cantidad Disponible: En este campo se observa la cantidad disponible del Repuesto seleccionado, es decir, se visualiza la diferencia entre "Existencia Inventario" menos "Cantidad Reservada". Este campo no es modificable por el usuario.

Cantidad a Reservar: En este campo se define la cantidad que se desea reservar del Repuesto seleccionado. En caso de elegir una cantidad a reservar mayor a la cantidad disponible, el sistema muestra un mensaje de alerta indicando que la cantidad a reservar no está disponible.

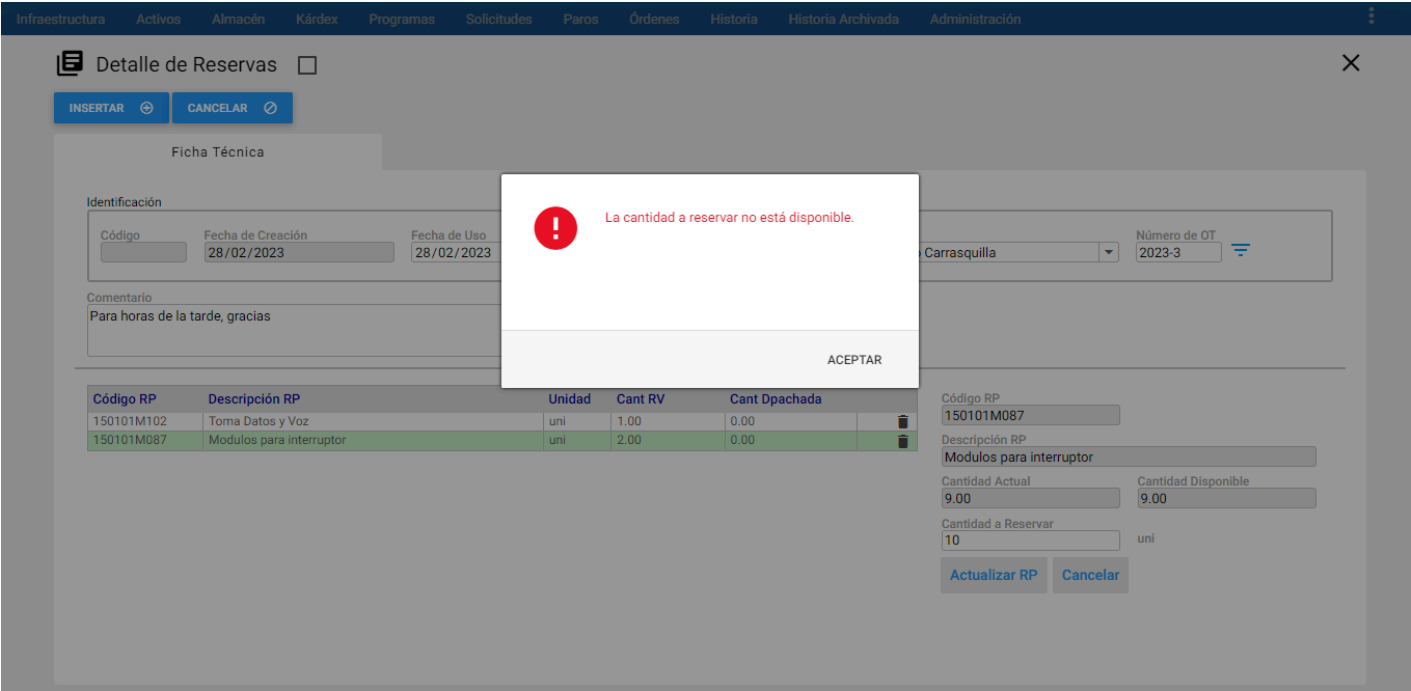


Imagen 56. Almacén - Mensaje Alerta Reservas

Una vez diligenciado el formulario dar clic en el botón  en el cual se visualizan los repuestos en la parte izquierda en el orden que se adicionen:

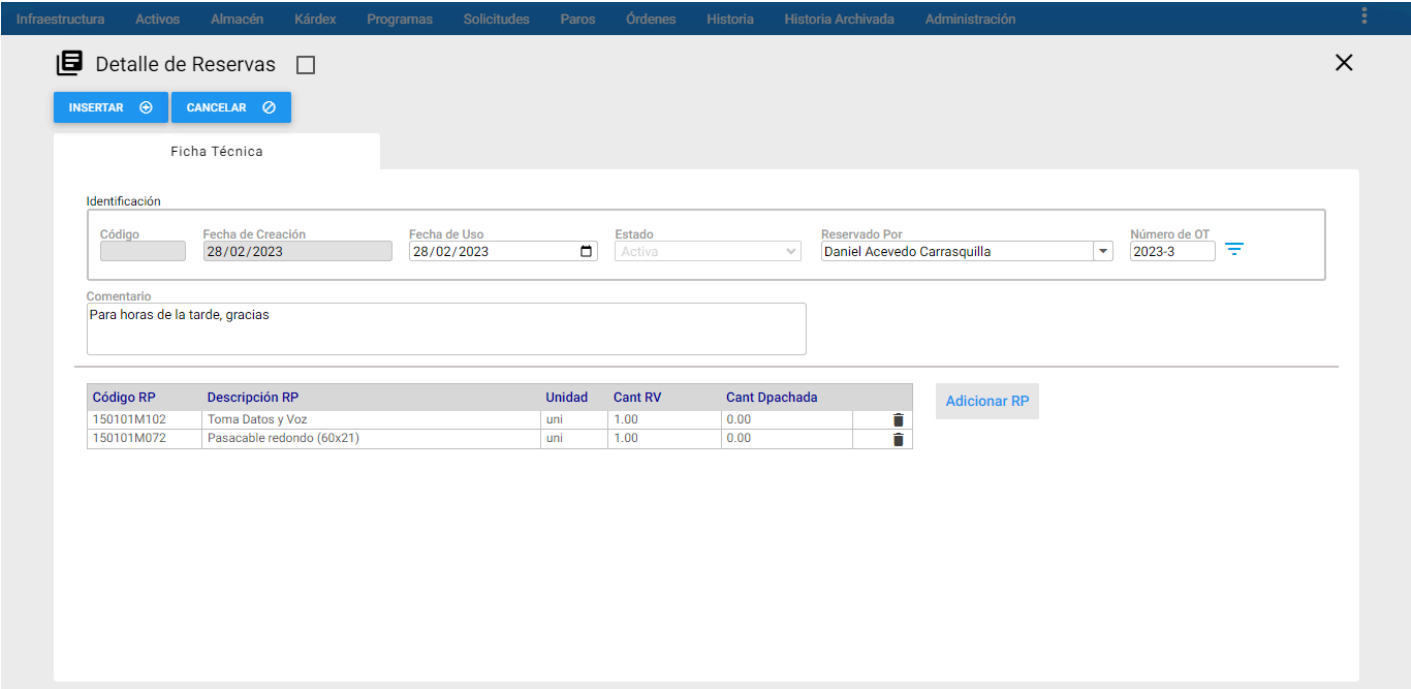


Imagen 57. Almacén - Repuestos Reservados

Para actualizar la cantidad del Repuesto de debe dar clic sobre él asegurándose de estar sombreado en verde:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Detalle de Reservas

INSERTAR CANCELAR

Ficha Técnica

Identificación

Código Fecha de Creación 01/03/2023 Fecha de Uso 01/03/2023 Estado Activa Reservado Por Practicante Ingeniería biomédica Número de OT 2023-3

Comentario

Comentario de Prueba.

Código RP	Descripción RP	Unidad	Cant RV	Cant Dpachada
150101M012	Cable AC	uni	1.00	0.00
150101M040	Cortafrio	uni	1.00	0.00

Código RP 150101M012

Descripción RP Cable AC

Cantidad Actual 16.00 Cantidad Disponible 16.00

Cantidad a Reservar 2 uni

Actualizar RP Cancelar

Imagen 58. Almacén - Actualizar cantidad a Reservar

Para terminar la transacción, dar clic en el botón **Insertar** ubicado en la parte superior izquierda, el sistema abrirá un mensaje alerta antes de insertar la nueva reserva, para continuar **aceptar** :

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Detalle de Reservas

INSERTAR CANCELAR

Ficha Técnica

Identificación

Código Fecha de Creación 01/03/2023 Fecha de Uso 01/03/2023 Estado Activa Reservado Por Practicante Ingeniería biomédica Número de OT 2023-3

Comentario

Comentario de Prueba.

Código RP	Descripción RP	Unidad	Cant RV	Cant Dpachada
150101M012	Cable AC	uni	2.00	0.00
150101M040	Cortafrio	uni	1.00	0.00

Adicionar RP

¿Está seguro de querer insertar esta reserva?

ACEPTAR CANCELAR

Imagen 59. Almacén - Mensaje Alerta Insertar Reserva

Si la OT ya está asignada a una reserva aparece un mensaje alerta a lo cual el usuario que hace la reserva debe asegurarse de hacer la reserva de varios Repuestos en un mismo registro:

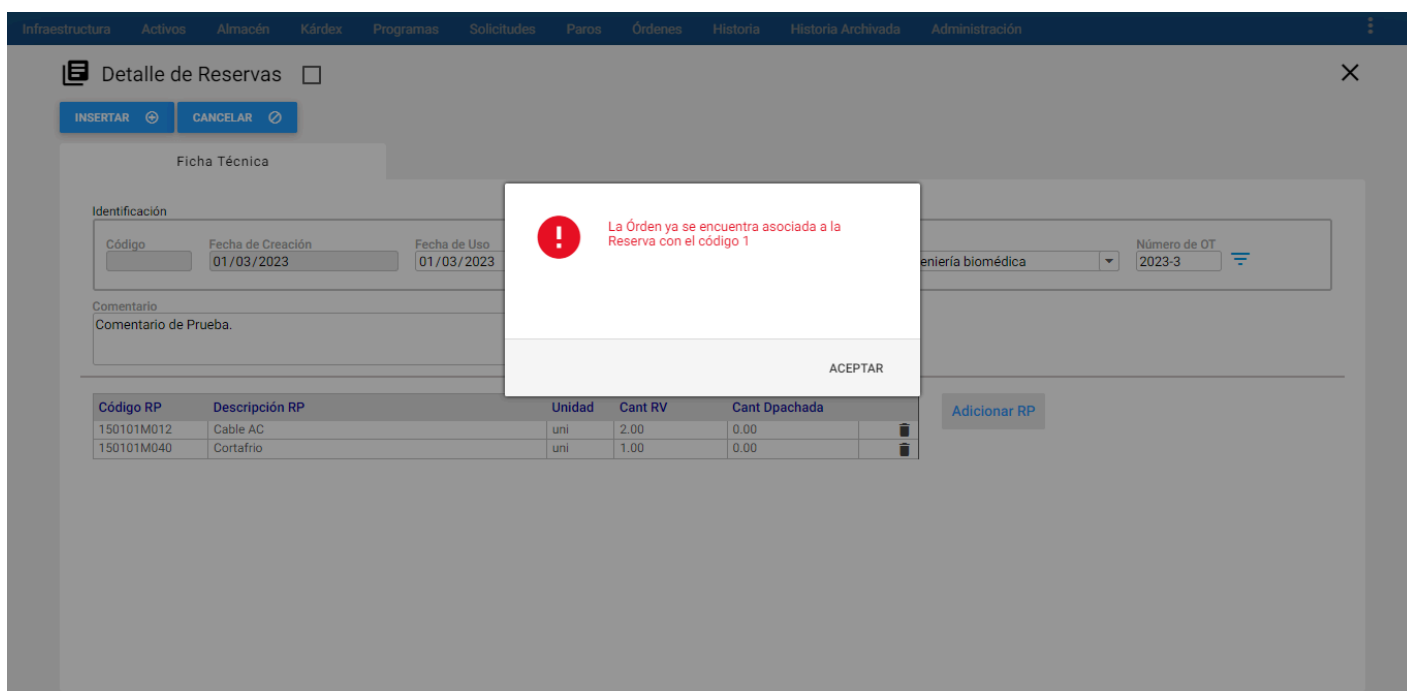


Imagen 60. Almacén - Mensaje Error Insertar Reserva

Una vez se inserte la reserva el sistema muestra nuevamente el visor.

Inventario al Final del Mes

Esta transacción se lleva a cabo para realizar el cierre de inventario del mes y consiste en tomar una fotografía del inventario hasta la fecha de realizar el cierre de inventario.

A esta opción se llega al sobreponer el cursor sobre un almacén y al lado derecho se despliega el conjunto de transacciones disponibles para ese almacén, luego se elige la transacción "Inventario final del mes".


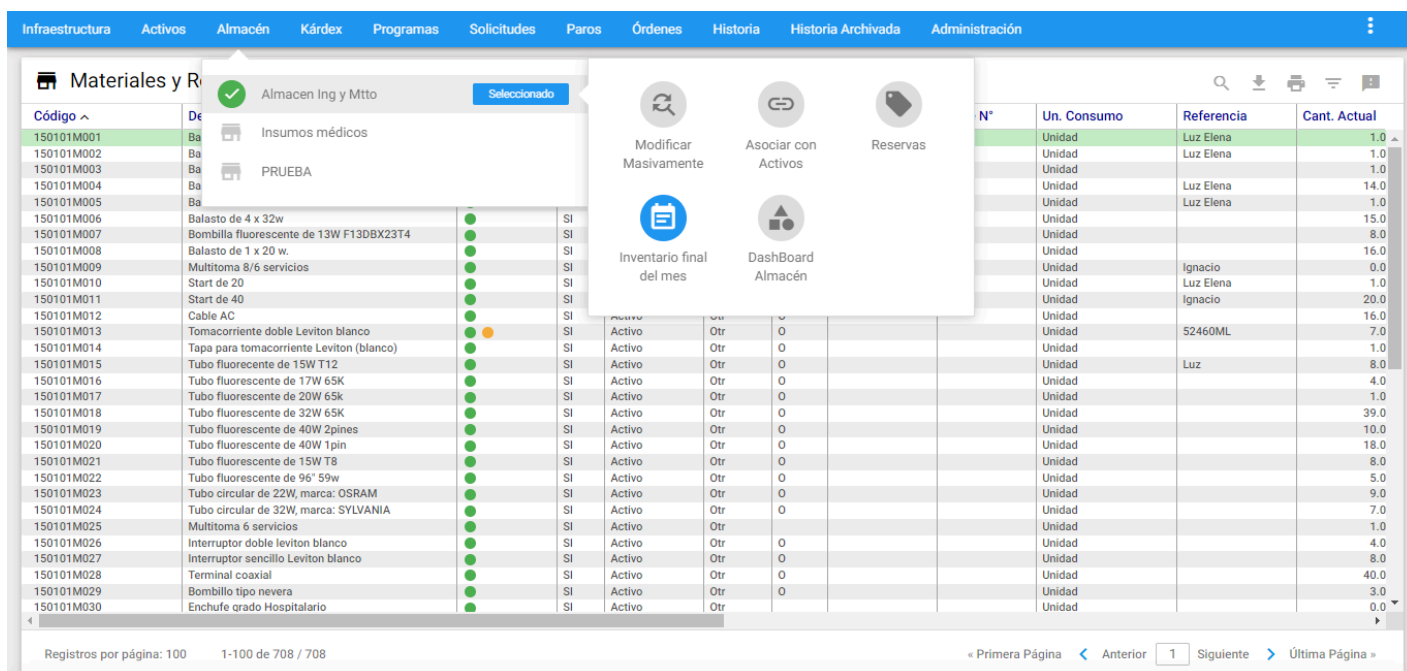


Imagen 61. Almacén - Ir a Inventario

El proceso se realiza eligiendo la opción "Inventario final del mes", se abre una ventana donde se muestran dos campos desplegables, uno para seleccionar el año y otro para el mes a realizar el cierre de inventario, respectivamente. Los meses que despliega son todos los meses del año. Se debe escoger el año correspondiente con el mes a cerrar, en el botón "Cerrar Inventario" y aparecerá una ventana solicitando confirmación de la operación a realizar, como se muestra a continuación.

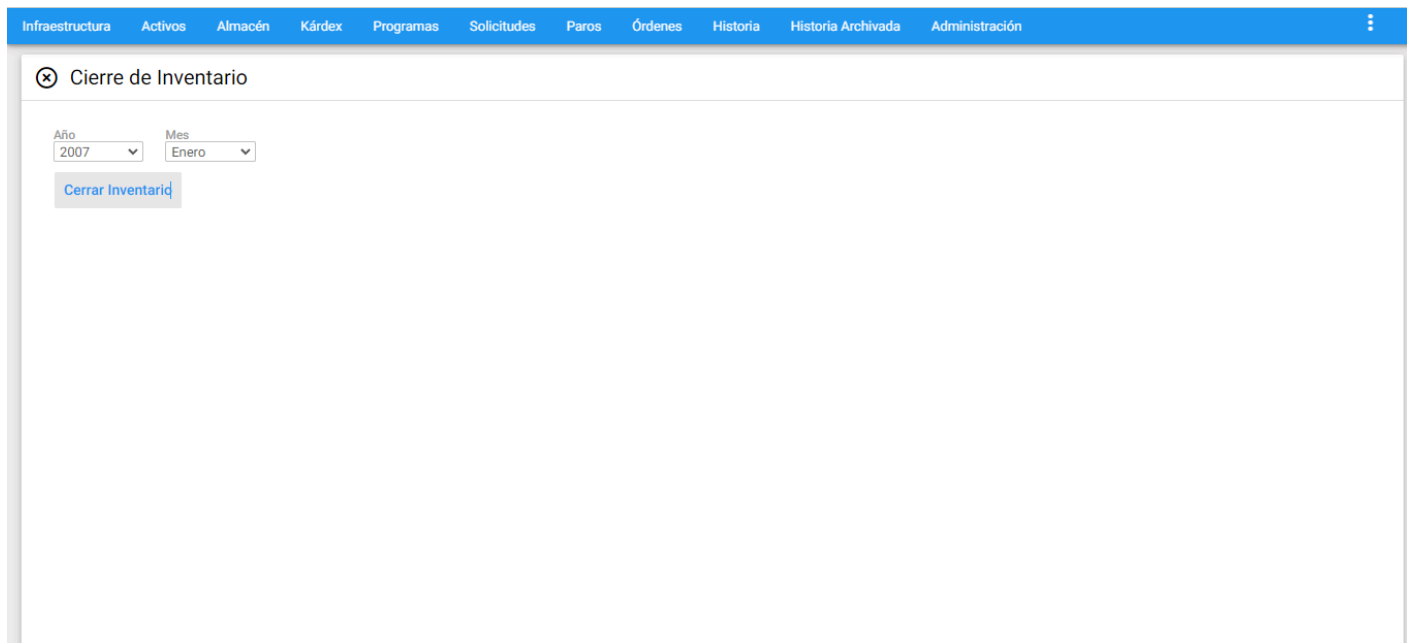


Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

⊗ Cierre de Inventario

Año: 2007 Mes: Enero

Cerrar Inventario

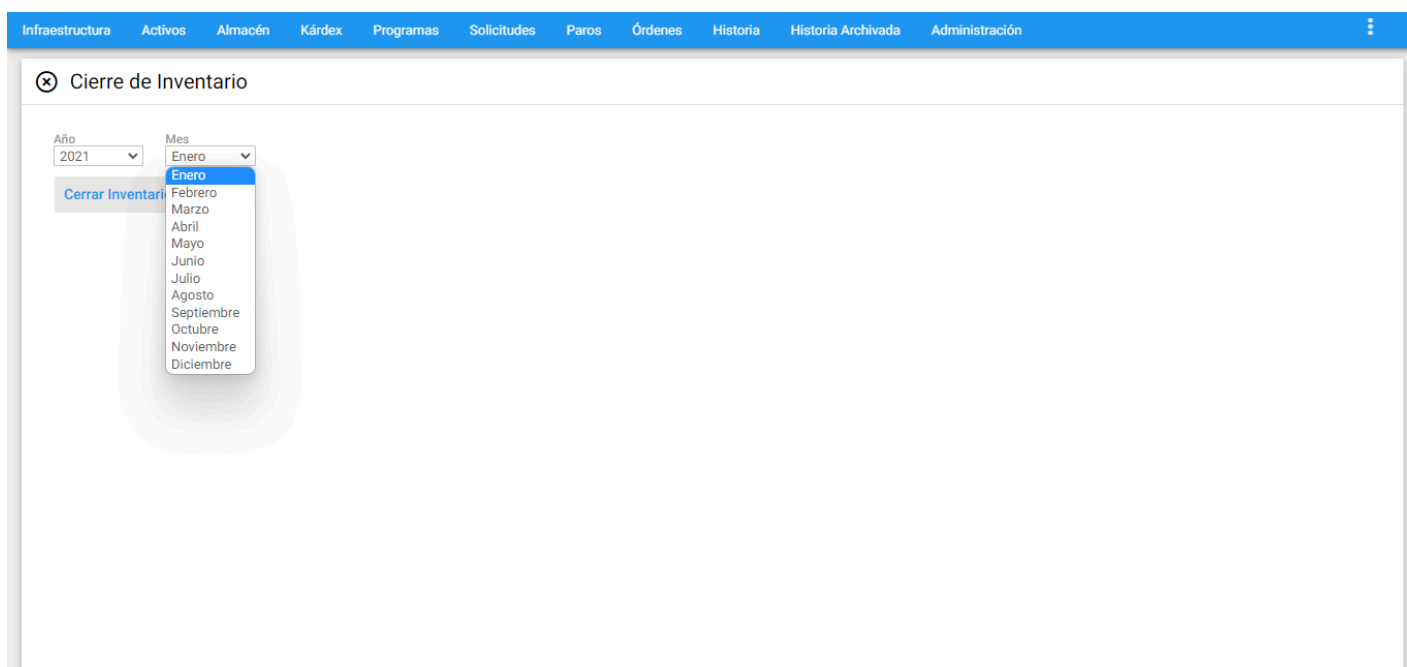Imagen 62. Almacén - Detalle Inventario

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

⊗ Cierre de Inventario

Año: 2021 Mes: Enero

Cerrar Inventario

- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre

Imagen 63. Almacén - Cierre de Inventario

Para finalizar la transacción dar clic en el botón **cerrar inventario**

El sistema muestra un mensaje alerta confirmando la transacción:

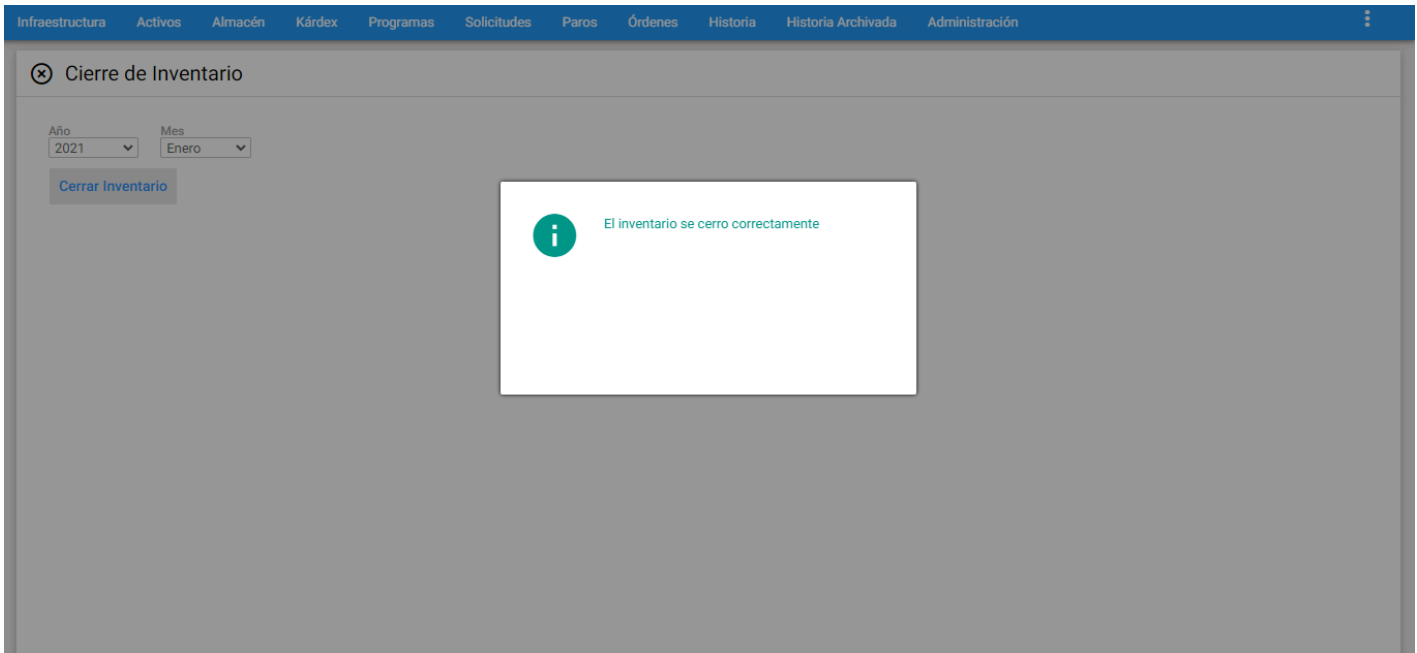


Imagen 64. Almacén - Mensaje Inventario

Nota: Solo se puede ejecutar esta transacción una vez, de lo contrario el sistema muestra un aviso alerta.

El cierre de inventario en **AM** no prohíbe su funcionamiento. Es decir, existen software que hasta no cerrar inventario, hasta que no pase de mes, no permite que se realice ingreso de información solo lo hacen de modo consulta. **AM** está habilitado para seguir su funcionamiento después de haberse ejecutado la transacción Inventario final del mes. Para la realización de este proceso, "Inventario final del mes", se debe tener los permisos adecuados los cuales permiten ejecutar y volver a iniciar el proceso. Estos permisos se configuran por usuario en el módulo de Administración.

DashBoard Almacén

Esta transaccion permite ver indicadores gráficos básicos sobre la información de los Repuestos/Materiales. Para acceder a esta opción se sobrepone el cursor sobre el módulo de Almacén de interés, en el menú principal se despliega un submenú de transacciones disponibles y luego dar clic en "DashBoard Almacén".

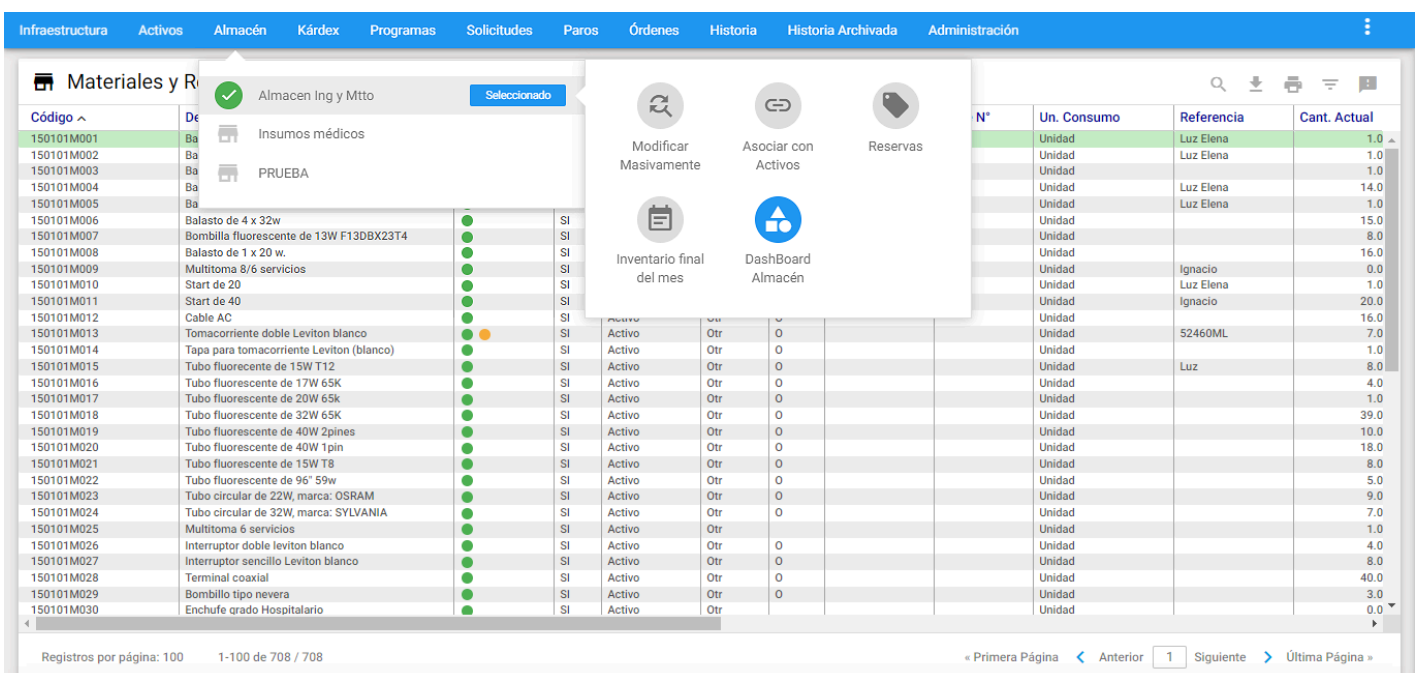


Imagen 65. Almacén - ir a DashBoard

Este comando permite visualizar en tiempo real el comportamiento de los Repuestos/Materiales con el fin de usarse como una herramienta para análisis y toma de decisiones rápidas.

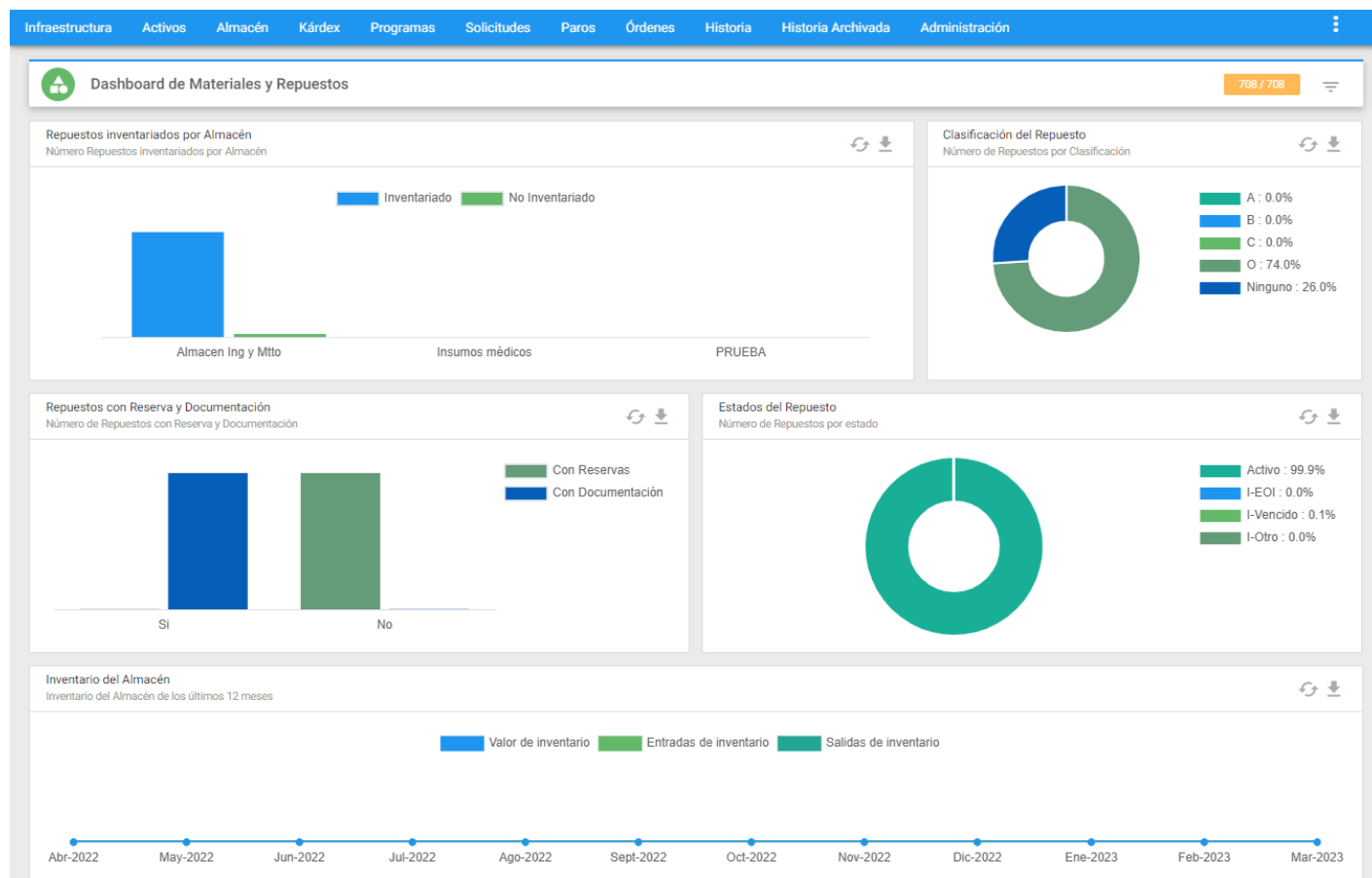


Imagen 66. Almacén - DashBoard

La información del rectángulo de color naranja ubicado en la parte superior derecha como guía a modo de fracción (N/M), indica el número de registros del subgrupo en el visor(N) sobre el número total de registros de Activos exx istentes en la base de datos (M). Si no hay preselección, los dos números en sus totales son los mismos. También un indicador de la existencia de un subgrupo, es el ícono ☰ con una pelota de color rojo que se ubica al lado derecho de dicha fracción.

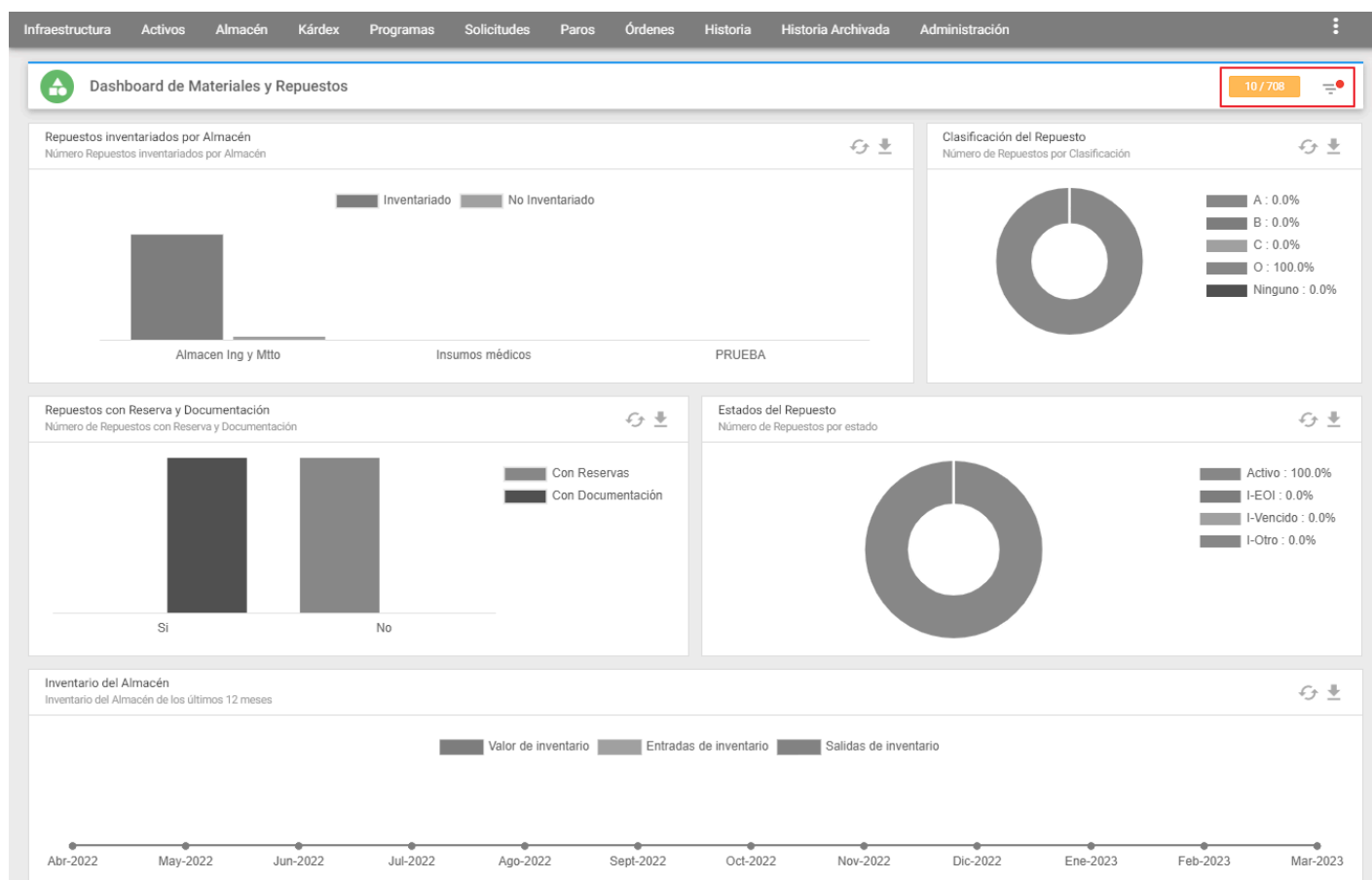


Imagen 67. Almacén - Dashboard Subgrupos

Para personalizar la vista de los gráficos o tener una información específica se recomienda hacer subgrupos a través del ícono . Asimismo los DashBoards permiten ocultar información con solo dar un clic sobre sus rectángulos de colores como se muestra en la siguiente imagen:

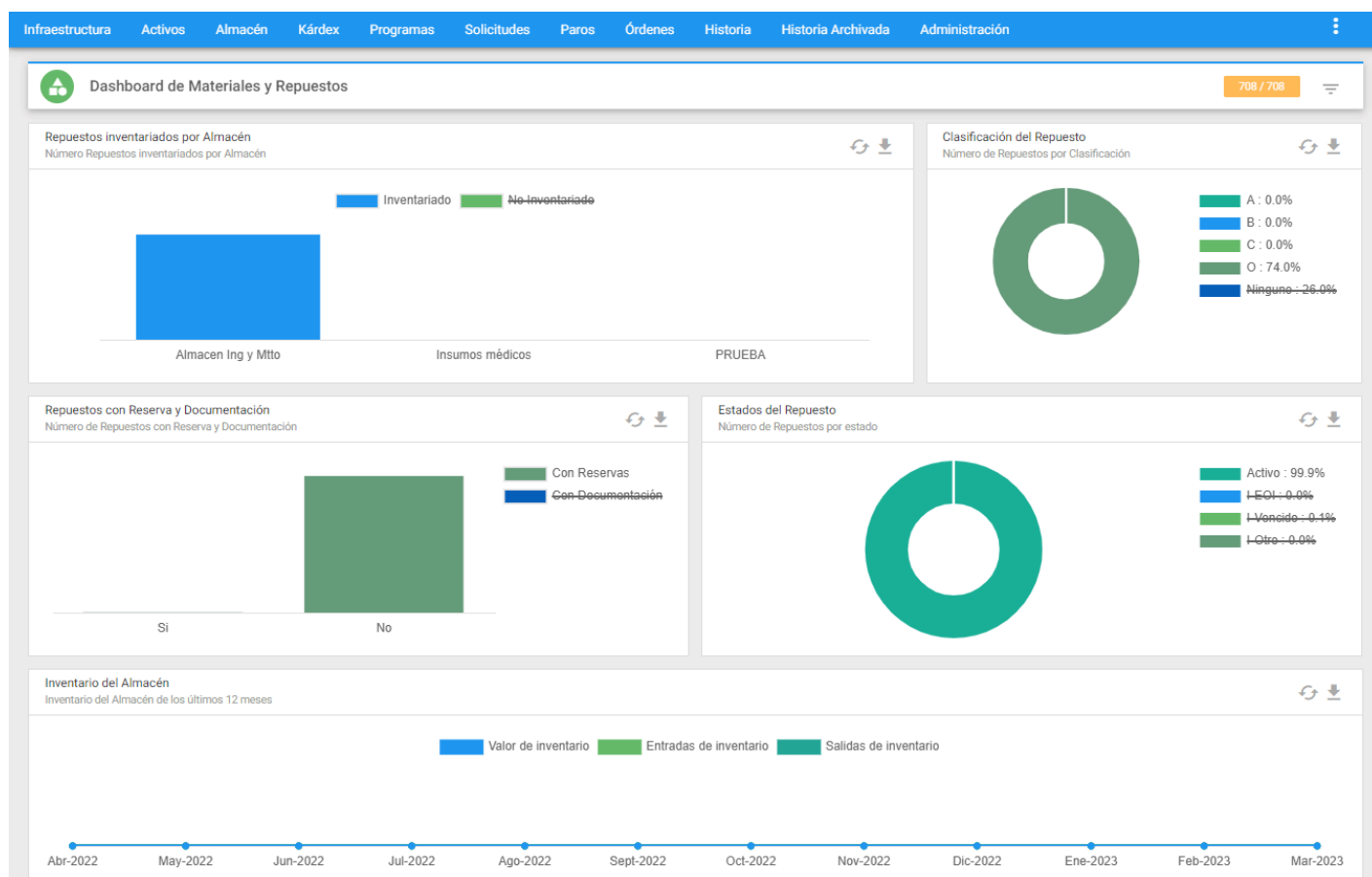


Imagen 68. Almacén - Dashboard personalizado

Sí se desea restablecer la información, se debe dar clic al icono ↺ (actualizar). En cambio, si se desea exportar el gráfico en un formato de imagen, es posible dando clic al ícono de la flecha hacia abajo ⬇ como se muestra a continuación:

