

Transacciones

Se explican las transacciones que componen el submódulo de Activos.



Escrito por WIN Software

Transacciones

Modificar Masivamente

A esta opción se llega al sobreponer el cursor del mouse sobre el módulo de Activos y en la parte inferior del título se despliega el conjunto de transacciones disponibles que componen el submódulo de Activos.

A continuación se elige la transacción “**Modificar Masivamente**”.

Código	Descripción	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Referencia	Serial	Activo Fijo	Alias
** FT NKR **				SG-Transito Mejoras	Patio Anexo	LVDIE2002			
** FT NPR ***				SG-Transito Mejoras	Patio Anexo	LVDIE2002			
0001bombillo				BP-Bascula y Pesaje, KIKO	Adm.-Sistemas	Lexus	737373	727272	Bombillo
0013673				DA-Manufactura	Adm.-Gerencia	Lexus	627272		Marasol
001maghide033				DA-Manufactura	Area de Cirugia, Sala 1	0120	7383838		
001recubridora...				DA-Manufactura	Adm.-Personal	Re124	72727272	123456	Recubridora
01hid				DA-Linea Agrícola	Adm.-Gerencia	82822	616161	62626	tonic
123466				CENTRO LABORATORIOS	CLIS-P01-URGENCIAS.C...	1244			
200.232.01INT				DA-Manufactura	ASTILLERO DH	EATON MOELLER			
200.232.02INT				DA-Manufactura	ASTILLERO DH	EATON MOELLER			
2101				DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento				
210101				DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento				
2101M01				DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento				
2101M02				DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento				
2101M03				DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento				
2101M04				DA-Discos Diamantados	CLIS-P01-URGENCIAS.C...				
2101RD				DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento				
2101RD				DA-Linea Agrícola	ELAB-Cocimiento				
2105				DA-Manufactura	ELAB-Cocimiento		0225		
2105P1				DA-Manufactura	unidad con uno	321DE	HU65ER32	23-45678	BOMBON
300.303.01INT				PE-Platos de presión	FC-FUN L1.ENROLLADO	321DE	HU65ER32	23-45678	BOMBON
3201				ALGODON	ASTX-ACABADO	EATON MOELLER			
3201BO				DS-Departamento Servicios	BELFAST.CARRERA 34 N...	0225	796TGIGUIT8RT786	AFCAL3201	NEGRITA
3201PM				DA-Manufactura	UNI-Costado Oriental Inte...	0225	796TGIGUIT8RT786		
3201QM				DS-Departamento Servicios	BOG-BBL P03-DESPACHO	0225	796TGIGUIT8RT786		
3203				DS-Departamento Servicios	BOG-BBL P03-DESPACHO	0225	796TGIGUIT8RT786		
3203BO				ACABADO	BOG-BBL P03-DESPACHO	0225	796TGIGUIT8RT786		
3221				ALGODON	BOG-BBL P03-DESPACHO	0225	796TGIGUIT8RT786		
35900				DS-Departamento Servicios	BASE PALANQUERO	0225	796TGIGUIT8RT786		
35901				CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	0225	796TGIGUIT8RT786		
35901.13				CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	0225	796TGIGUIT8RT786		
35901.13				CO-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	0225	796TGIGUIT8RT786		

Imagen 26. Activos - Modificar Masivamente

Esta transacción permite cambiar masivamente el Estado, Descripción, Ubicación Física, Centro de Costos, Encargado, Comentarios, Proveedor y Fabricante, Marca, Modelo, Grupo de los registros previamente seleccionados en un filtro o subgrupo o aquellos que se encuentran en el

Visor. Para ello se debe dar clic al link en azul **Modificar Masivamente** ubicado al lado superior izquierdo de la ventana, seguidamente se muestra el conjunto de opciones de modificación masiva disponibles.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia

Activos » **Modificar Masivamente**

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo

☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ **Ficha Técnica**

- ☐ Modificar Descripción
- ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
- ☐ Modificar Activo Padre
- ☐ Modificar Centro de Costo
- ☐ Modificar Ubicación Física
- ☐ Modificar Clasificación por Proceso
- ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
- ☐ Modificar Proveedor
- ☐ Modificar Fabricante
- ☐ Modificar Marca
- ☐ Modificar Modelo
- ☐ Modificar Tipo
- ☐ Modificar Encargado
- ☐ Modificar Estado
- ☐ Modificar Componente Intercambiable
- ☐ Modificar Ruta
- ☐ Modificar Grupo del Activo
- ☐ Modificar Comentarios

☒ **Vida Útil**

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☐ Modificar Contrato
- ☐ Modificar Número de Póliza
- ☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
- ☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☒ **Info. Biomédica**

- ☐ Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización
- ☐ Modificar Impacto en el Proceso
- ☐ Modificar Clasificación por Riesgo



Imagen 27. Activos - Criterios Modificación Masiva

En la gráfica anterior, Modificar Masivamente, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos.


A continuación se describen los campos que componen esta transacción:

Modificar Solamente Este Activo: Al escoger esta opción, se ejecutan los cambios marcados (Ficha Técnica, Vida Útil e Info. Biomédica) al Activo/Equipo que se encuentre seleccionado en el visor.

Modificar Todos los Activos en el Visor: Al escoger esta opción, se ejecutan los cambios marcados (Ficha Técnica, Vida Útil e Info. Biomédica) a todos los Activos/Equipos que se encuentren en el visor.

FICHA TÉCNICA

Modificar Descripción: Se Modifica Masivamente la Descripción del o los Activos que están previamente seleccionados en el visor.

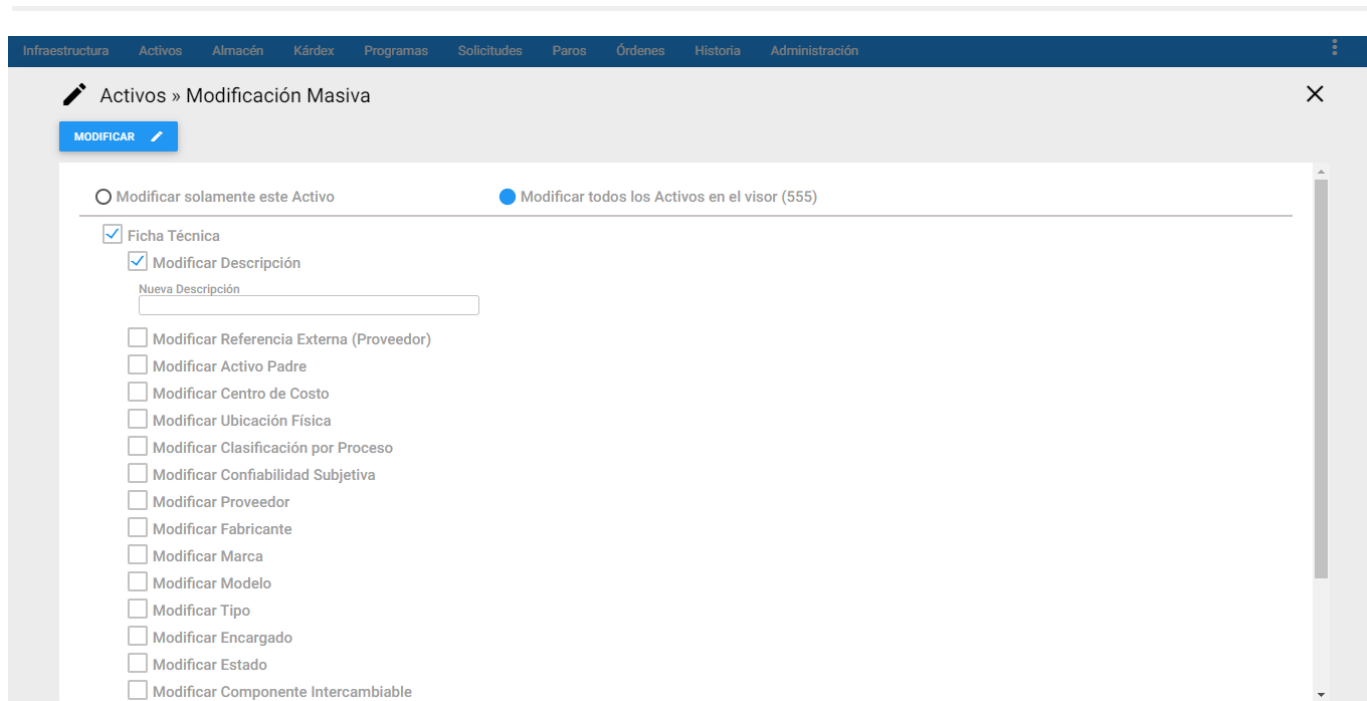

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR


☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☒ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Nueva Descripción

Imagen 28. Activos - Modificar Descripción

Modificar Referencia Externa (Proveedor): Se Modifica Masivamente la referencia externa proveedor del o los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

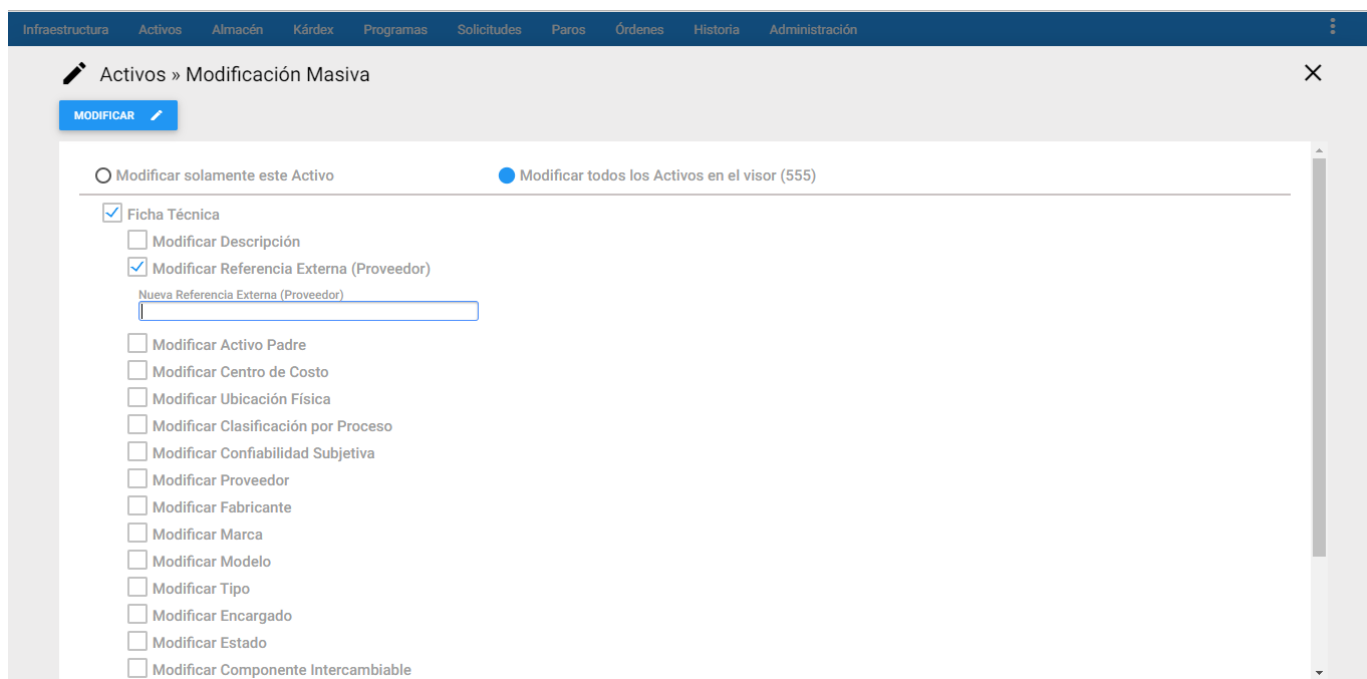

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR


☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☒ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Nueva Referencia Externa (Proveedor)

Imagen 29. Activos - Modificar Referencia Externa

Modificar Activo Padre: Se Modifica Masivamente el Activo/Equipo Padre de los registros que están previamente seleccionados en el visor. Al seleccionar el Activo Padre, se asigna automáticamente el Centro de Costo y la Ubicación Física asociados al Activo Padre seleccionado.

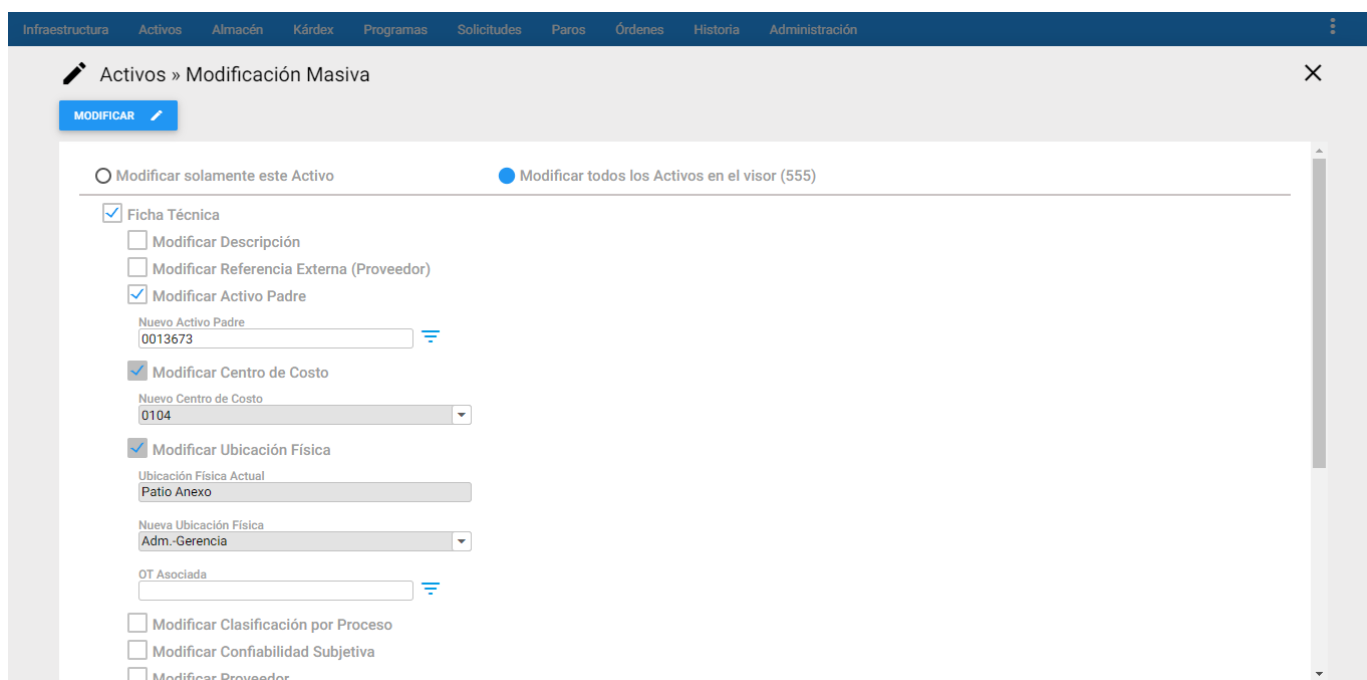

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☒ Modificar Activo Padre

Nuevo Activo Padre
0013673

☒ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física

Nuevo Centro de Costo
0104

Ubicación Física Actual
Patio Anexo


Nueva Ubicación Física
Adm.-Gerencia

OT Asociada

☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor

Imagen 31. Activos - Modificar Activo Padre

Modificar Centro de Costo: Se Modifica Masivamente el Centro de Costo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

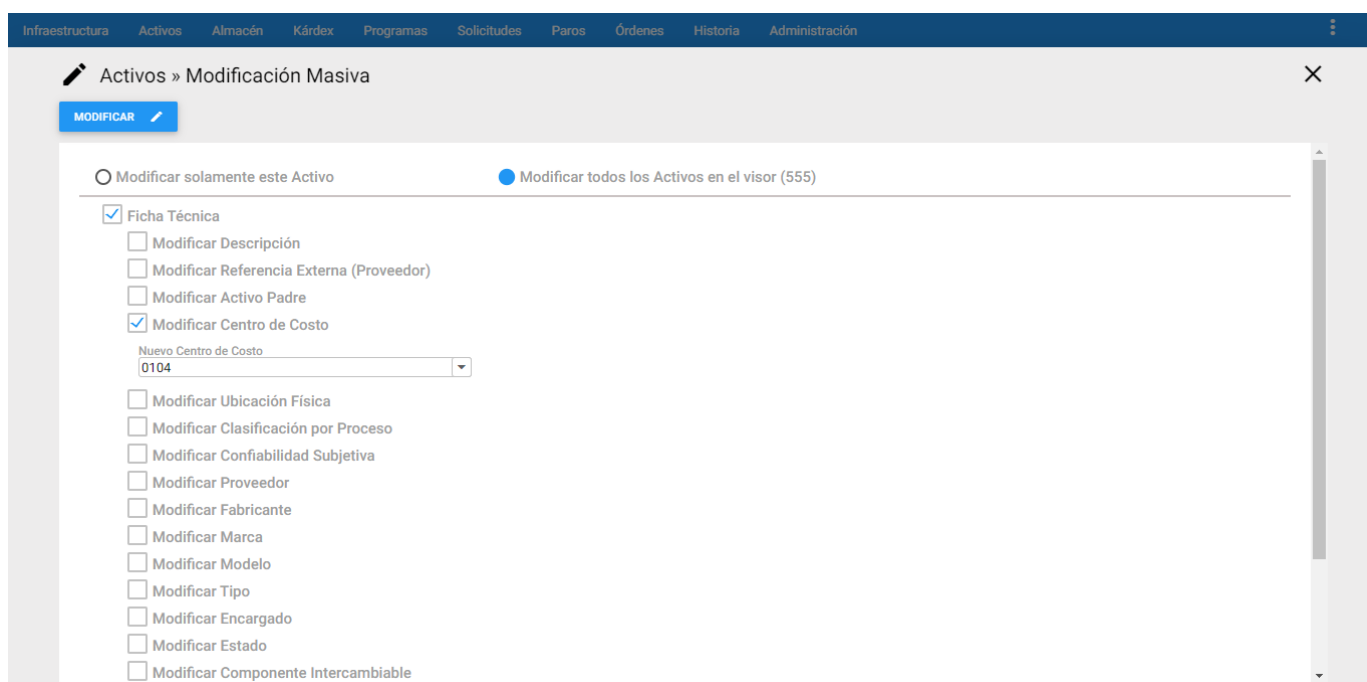

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☒ Modificar Centro de Costo

Nuevo Centro de Costo
0104

☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 32. Activos - Modificar Centro de Costo

Modificar Ubicación Física: Se Modifica Masivamente la Ubicación Física de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

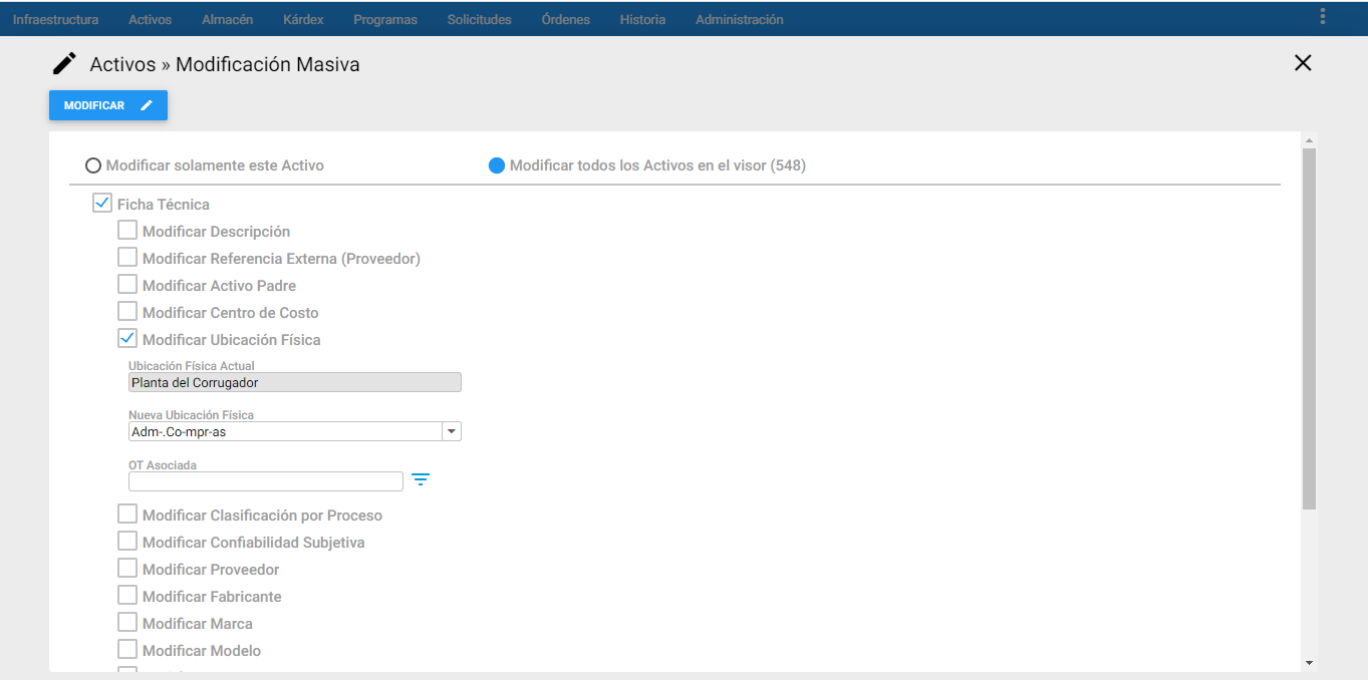


Imagen 33. Activos - Modificar Ubicación Física

Modificar Clasificación por Proceso: Se Modifica Masivamente la Clasificación por Proceso de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.


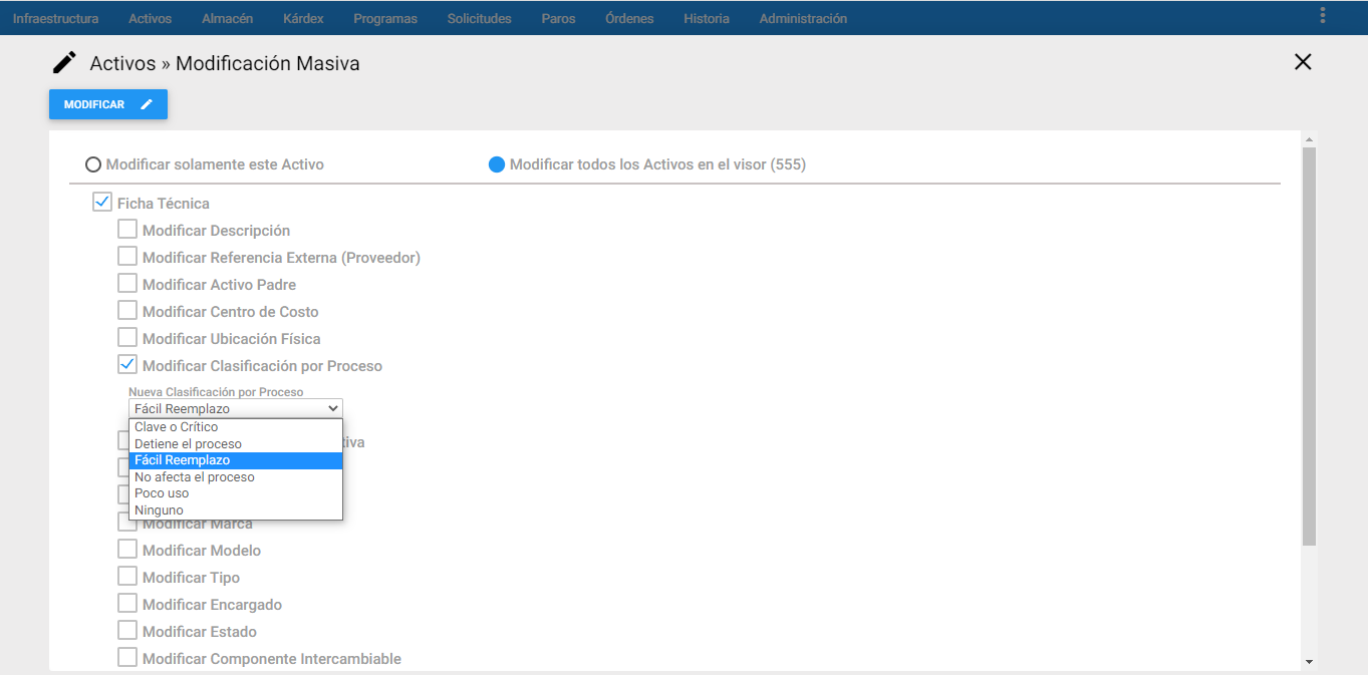


Imagen 34. Activos - Modificar Clasificación por Proceso

Modificar Confiabilidad Subjetiva: Se Modifica Masivamente la Confiabilidad Subjetiva de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

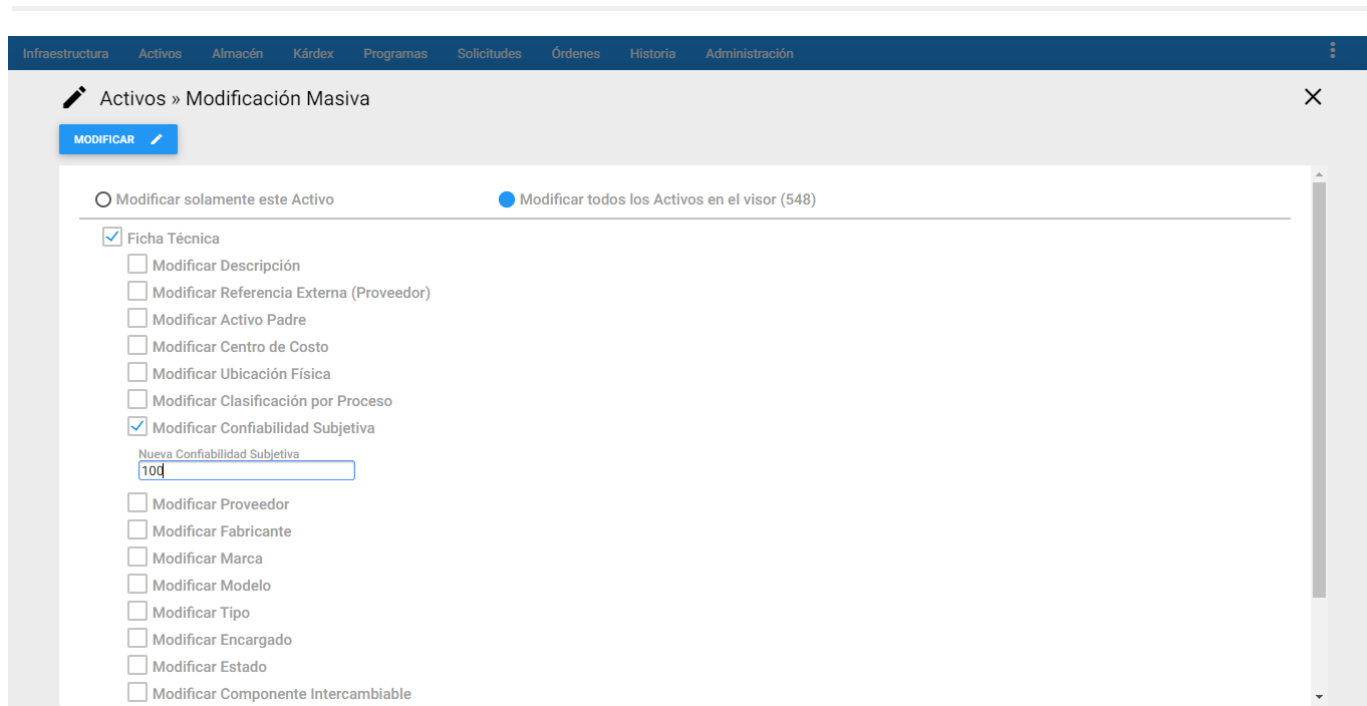

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (548)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☒ Modificar Confiabilidad Subjetiva


Nueva Confiabilidad Subjetiva

100

☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 35. Activos - Modificar Confiabilidad Subjetiva

Modificar Proveedor: Se modifica Masivamente el Proveedor de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

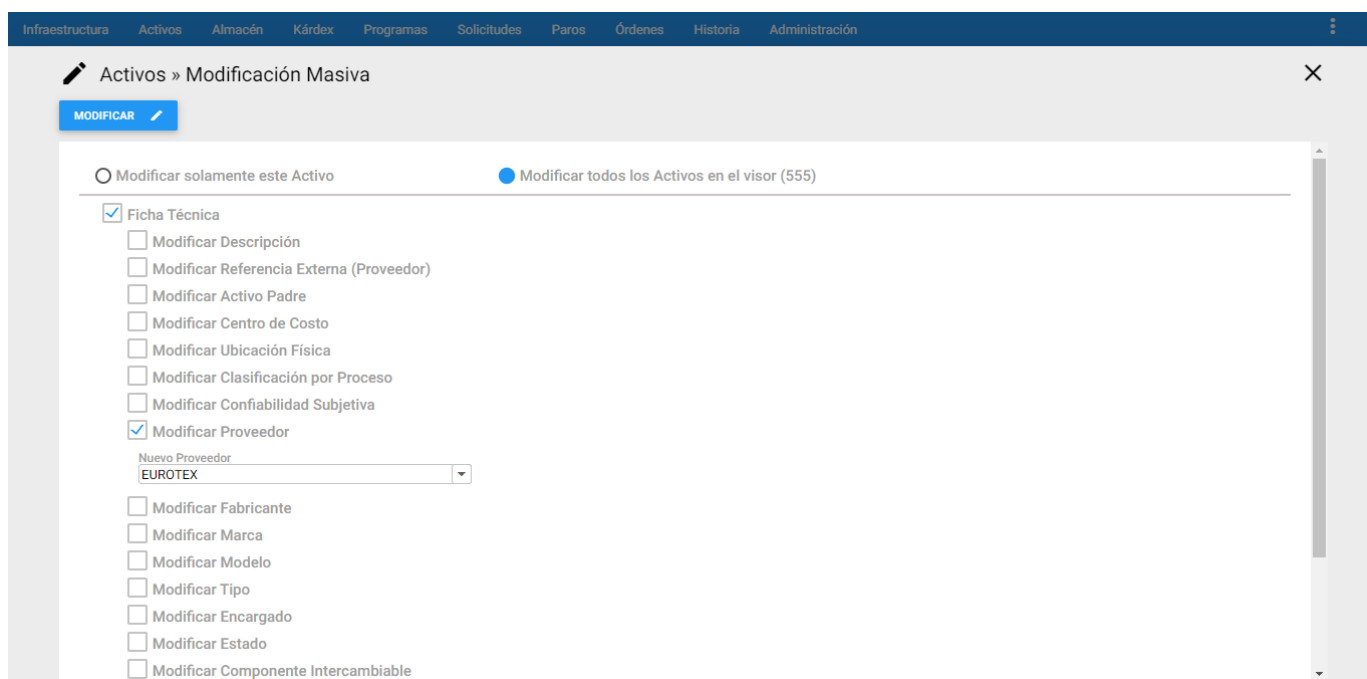

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☒ Modificar Proveedor


Nuevo Proveedor

EUROTEX

☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 36. Activos - Modificar Proveedor

Modificar Fabricante: Se modifica Masivamente el Fabricante de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

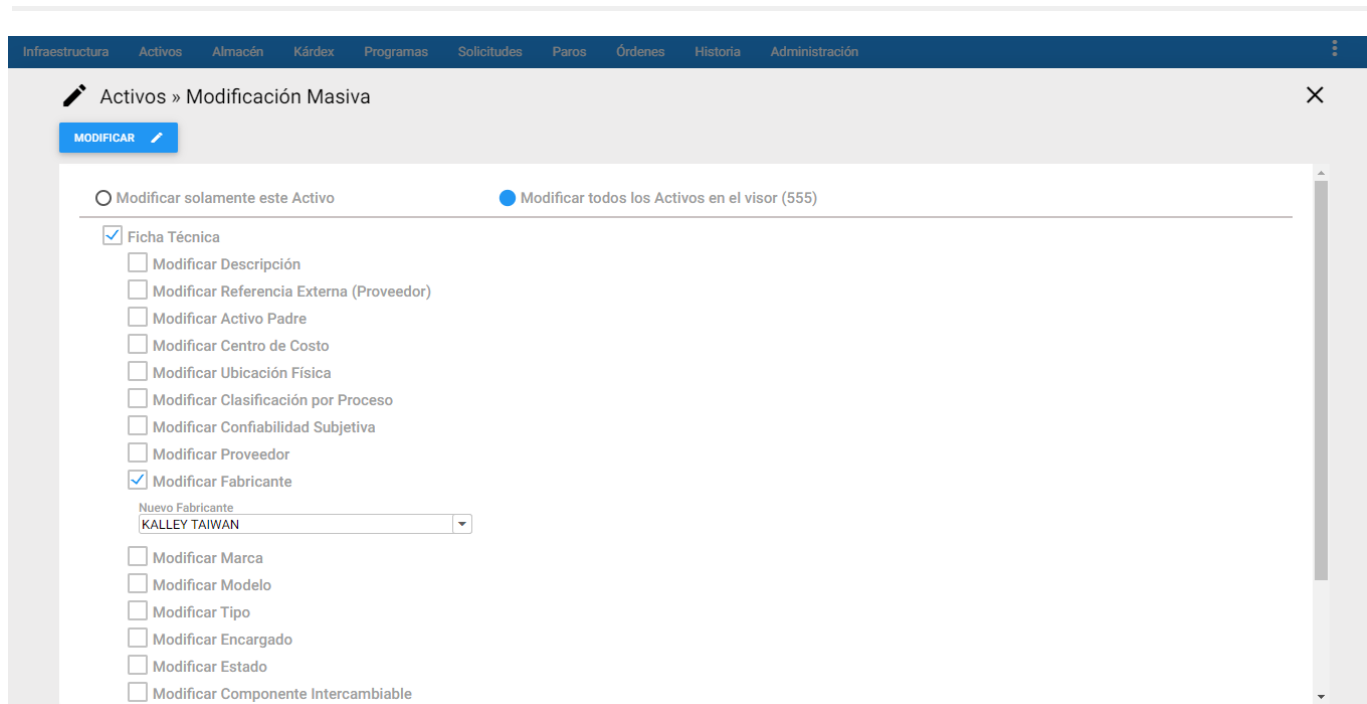

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)


☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☒ Modificar Fabricante

Nuevo Fabricante
KALLEY TAIWAN

☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 37. Activos - Modificar Fabricante

Modificar Marca: Se modifica Masivamente la Marca de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

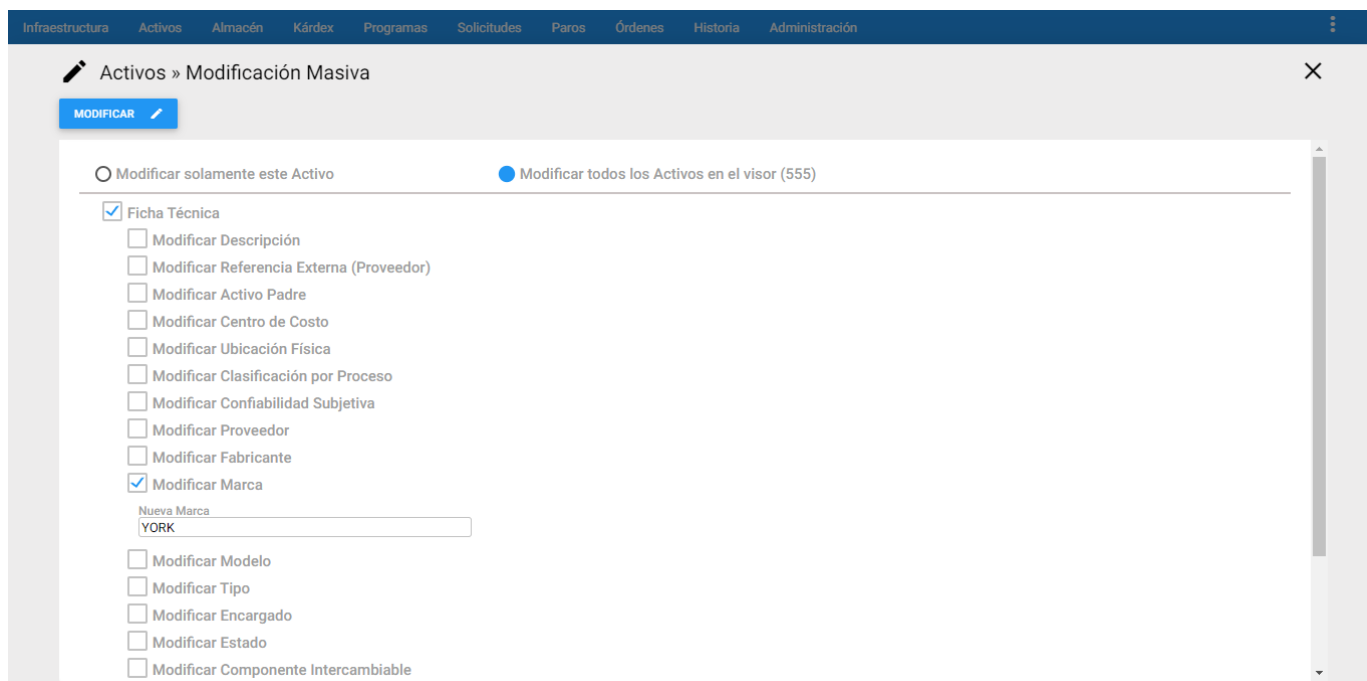

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)


☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☒ Modificar Marca

Nueva Marca
YORK

☐ Modificar Modelo
 ☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 38. Activos - Modificar Marca

Modificar Modelo: Se Modifica Masivamente el Modelo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

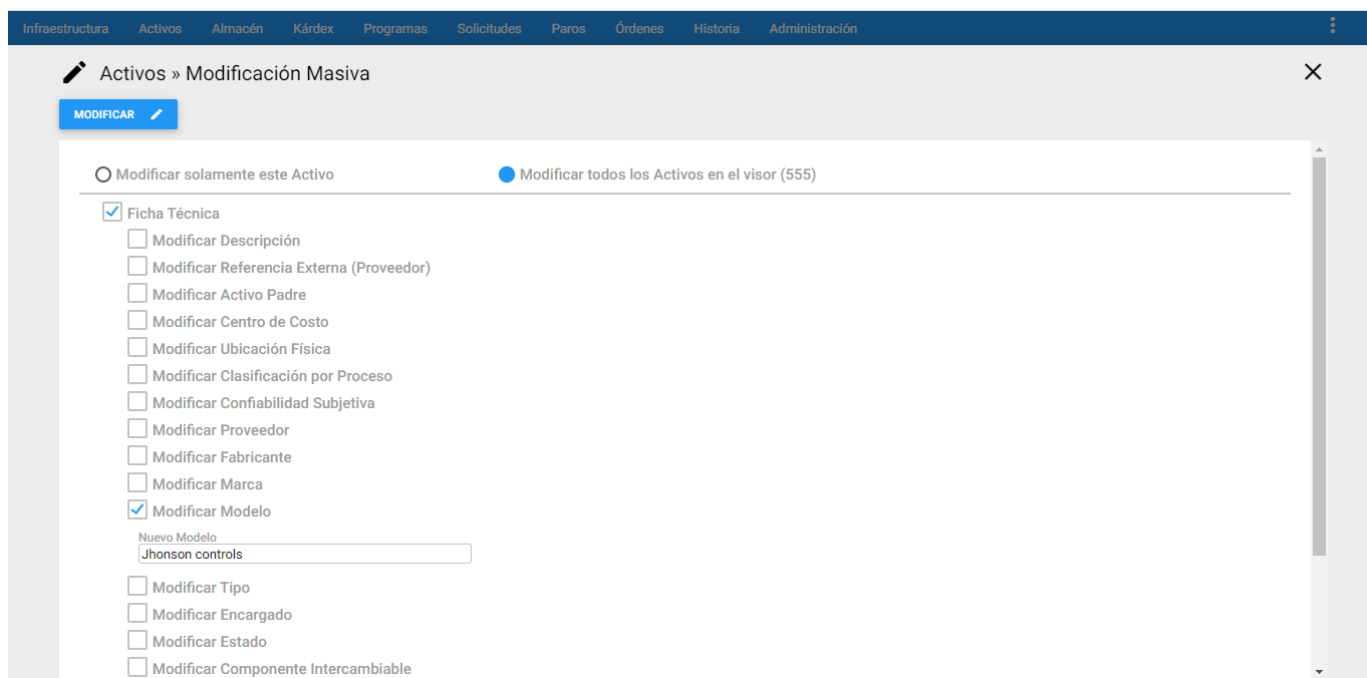

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)


☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☒ Modificar Modelo

Nuevo Modelo
Jhonson controls

☐ Modificar Tipo
 ☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 39. Activos - Modificar Modelo

Modificar Tipo: Se Modifica Masivamente el Tipo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

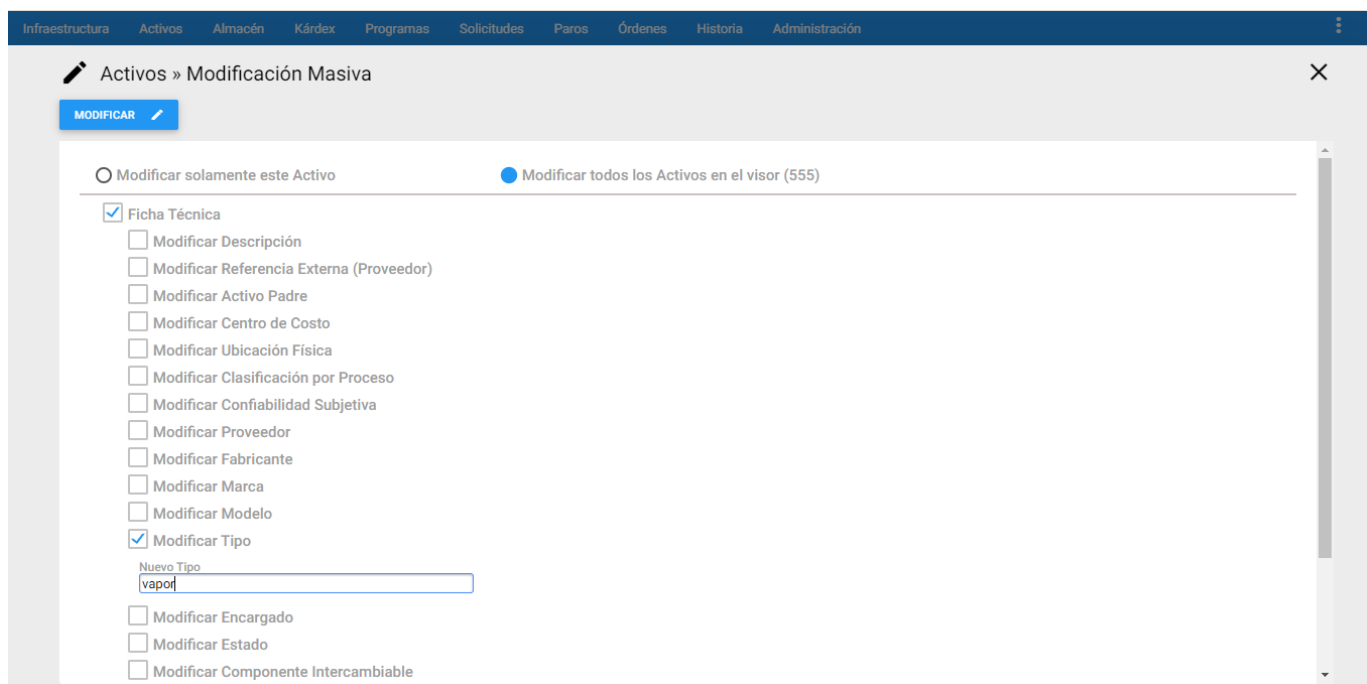

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)


☒ Ficha Técnica
 ☐ Modificar Descripción
 ☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)
 ☐ Modificar Activo Padre
 ☐ Modificar Centro de Costo
 ☐ Modificar Ubicación Física
 ☐ Modificar Clasificación por Proceso
 ☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva
 ☐ Modificar Proveedor
 ☐ Modificar Fabricante
 ☐ Modificar Marca
 ☐ Modificar Modelo
 ☒ Modificar Tipo

Nuevo Tipo
vapor

☐ Modificar Encargado
 ☐ Modificar Estado
 ☐ Modificar Componente Intercambiable

Imagen 40. Activos - Modificar Tipo


Modificar Encargado: Se Modifica Masivamente el Encargado de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

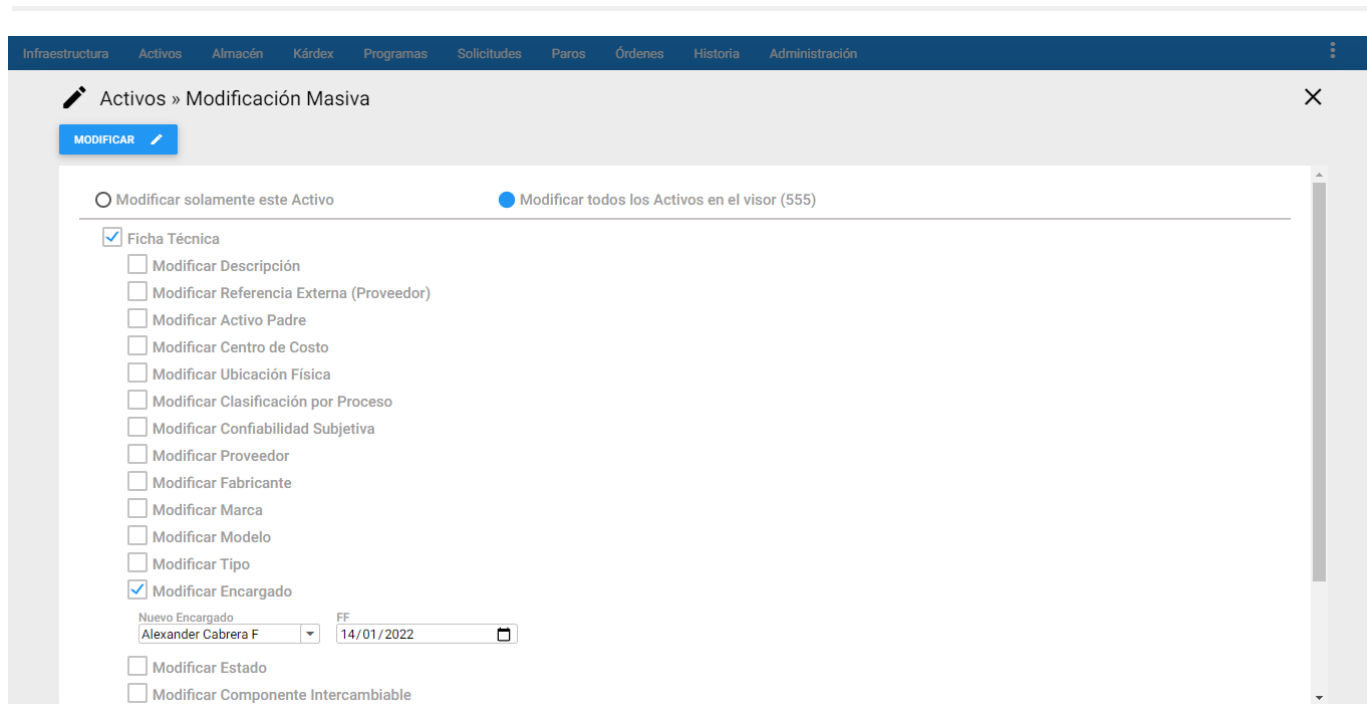

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. There is a 'MODIFICAR' button with a pencil icon. Below the button, there are two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Under the selected radio button, there is a list of checkboxes for various modification options. The 'Ficha Técnica' checkbox is checked. Below it, there are several unchecked checkboxes: 'Modificar Descripción', 'Modificar Referencia Externa (Proveedor)', 'Modificar Activo Padre', 'Modificar Centro de Costo', 'Modificar Ubicación Física', 'Modificar Clasificación por Proceso', 'Modificar Confiabilidad Subjetiva', 'Modificar Proveedor', 'Modificar Fabricante', 'Modificar Marca', 'Modificar Modelo', 'Modificar Tipo', 'Modificar Encargado', and 'Modificar Estado'. The 'Modificar Encargado' checkbox is checked. Below it, there is a dropdown menu for 'Nuevo Encargado' with the value 'Alexander Cabrera F' and a date field for 'FF' with the value '14/01/2022'. At the bottom, there are two more unchecked checkboxes: 'Modificar Componente Intercambiable' and 'Modificar Estado'.

Imagen 41. Activos - Modificar Encargado

Modificar Estado: Se Modifica Masivamente el estado Activo – Inactivo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

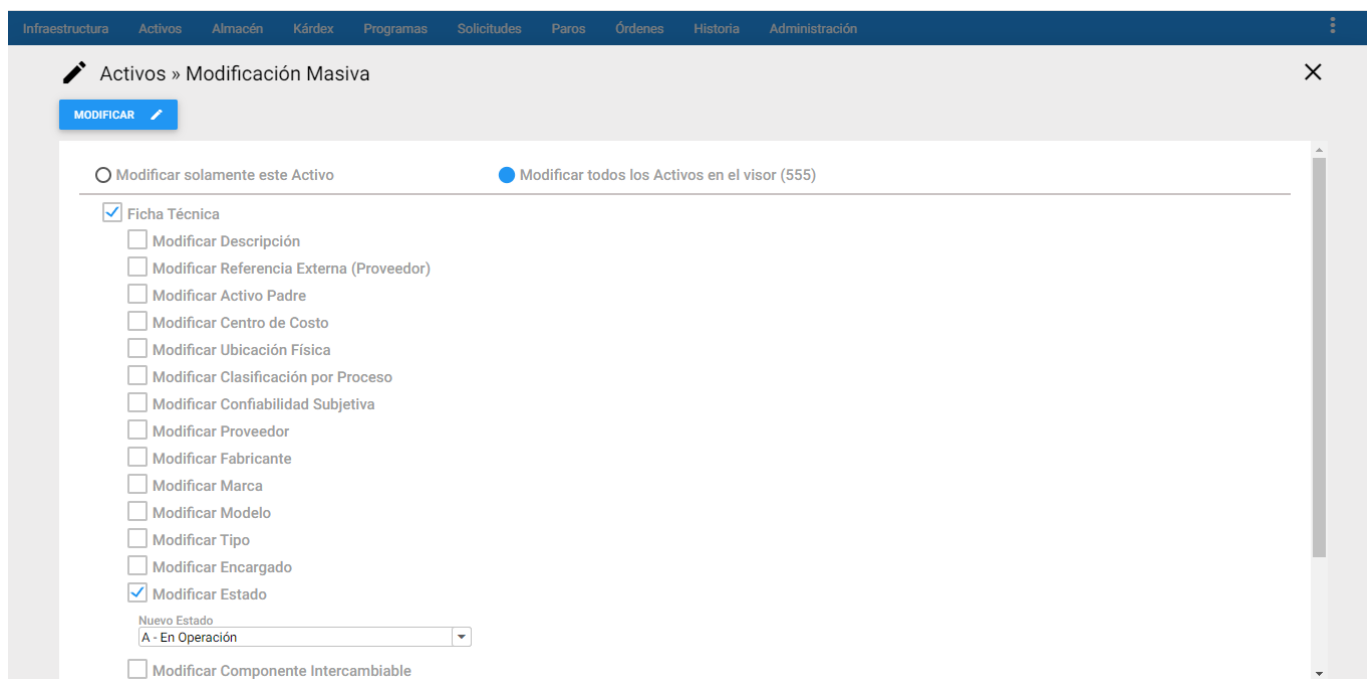

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. There is a 'MODIFICAR' button with a pencil icon. Below the button, there are two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Under the selected radio button, there is a list of checkboxes for various modification options. The 'Ficha Técnica' checkbox is checked. Below it, there are several unchecked checkboxes: 'Modificar Descripción', 'Modificar Referencia Externa (Proveedor)', 'Modificar Activo Padre', 'Modificar Centro de Costo', 'Modificar Ubicación Física', 'Modificar Clasificación por Proceso', 'Modificar Confiabilidad Subjetiva', 'Modificar Proveedor', 'Modificar Fabricante', 'Modificar Marca', 'Modificar Modelo', 'Modificar Tipo', 'Modificar Encargado', and 'Modificar Estado'. The 'Modificar Estado' checkbox is checked. Below it, there is a dropdown menu for 'Nuevo Estado' with the value 'A - En Operación'. At the bottom, there is one more unchecked checkbox: 'Modificar Componente Intercambiable'.

Imagen 42. Activos - Modificar Estado

Modificar Componente Intercambiable: Se Modifica Masivamente el Componente Intercambiable de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

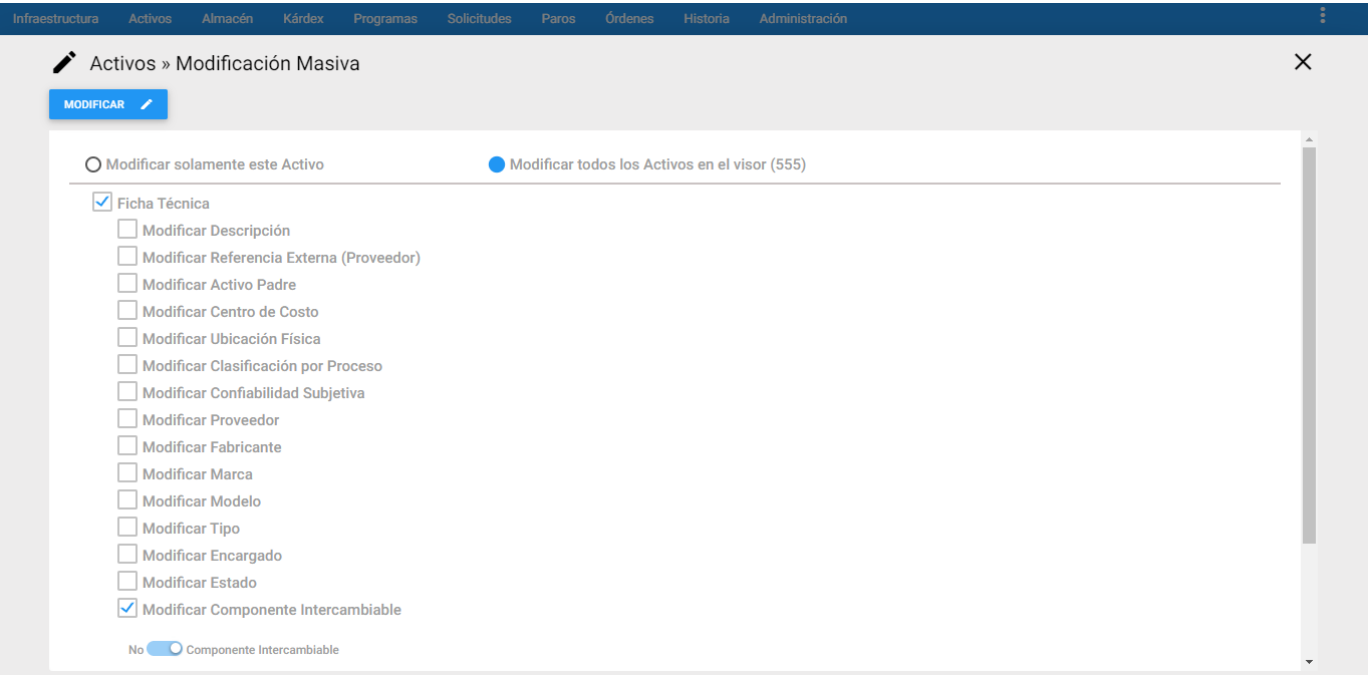


Imagen 43. Activos - Modificar Modificar Componente Intercambiable

Modificar Ruta: Se Modifica Masivamente la Ruta de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

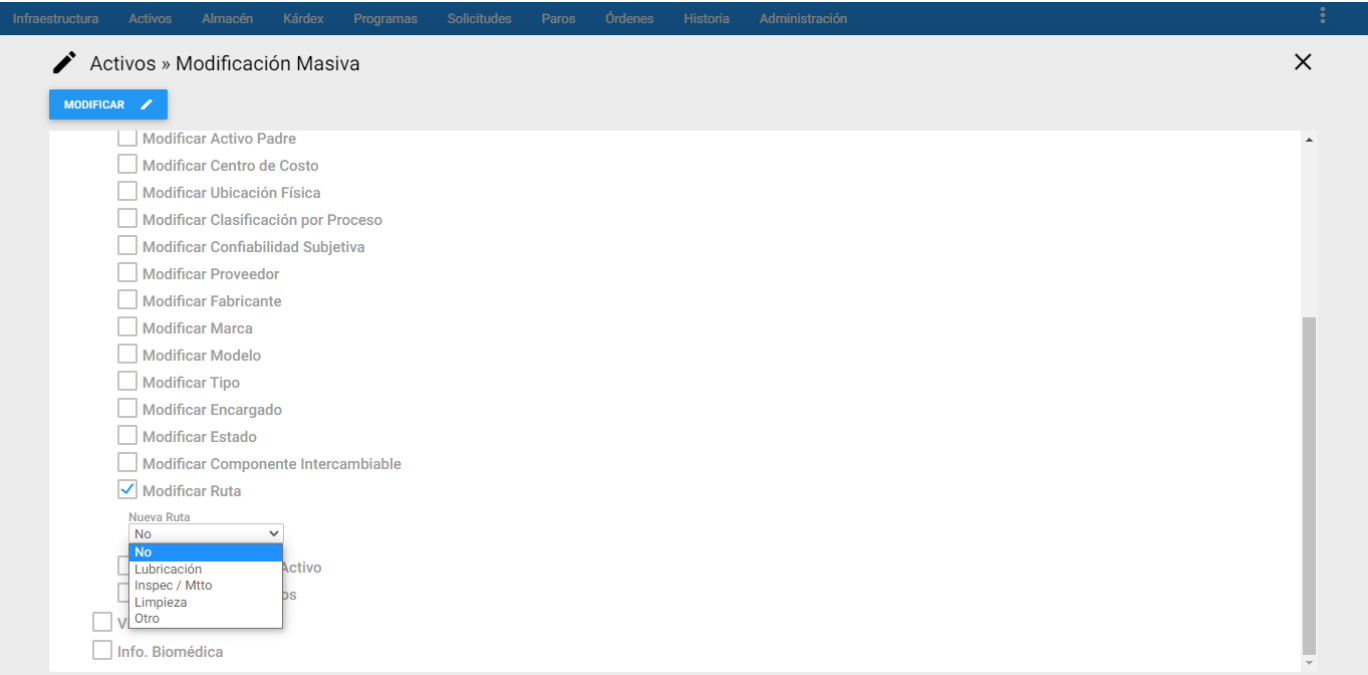


Imagen 44. Activos - Modificar Ruta

Modificar Grupo del Activo: Se Modifica Masivamente el grupo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

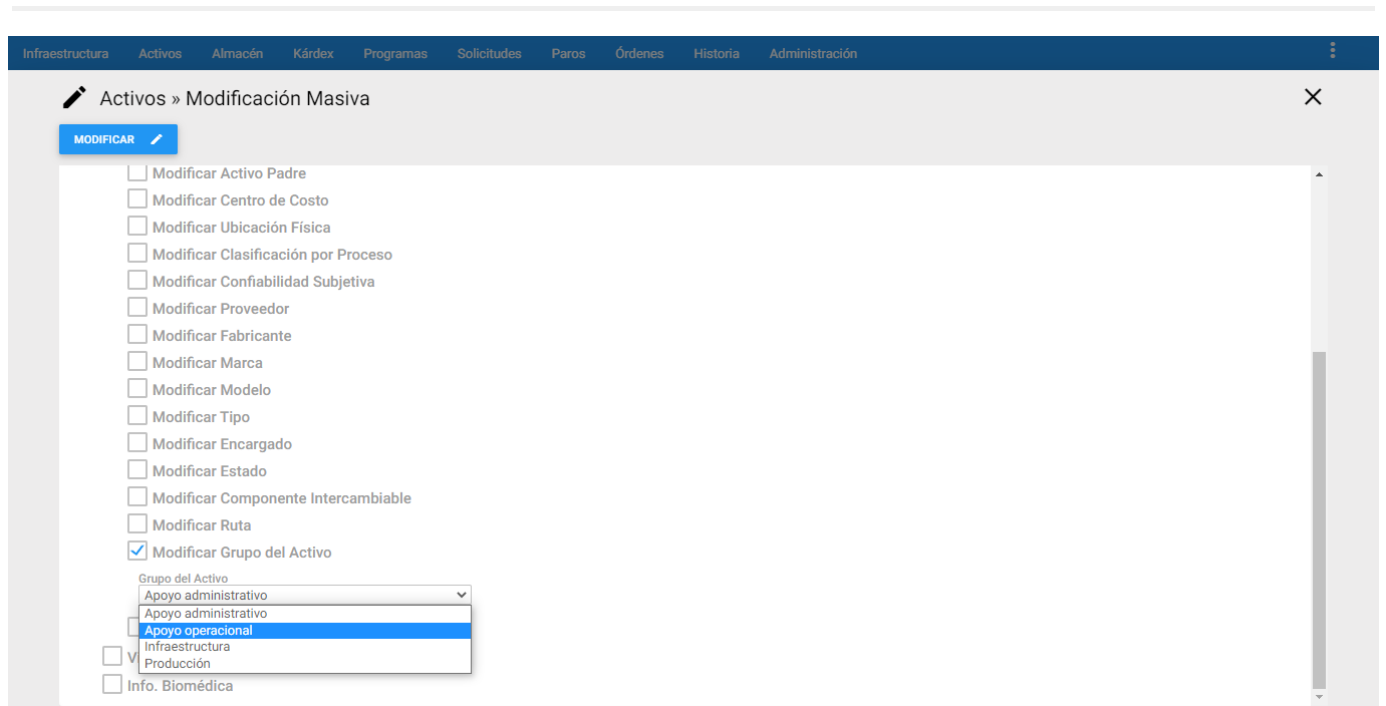


Imagen 45. Activos - Modificar Grupo del Activo

Modificar Comentarios: Se Modifican Masivamente los Comentarios, que están previamente seleccionados en el visor

Infraestructura

Activos

Almacén

Kárdex

Programas

Solicitudes

Paros

Órdenes

Historia

Activos » Modificar Masivamente

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo

☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☒ Ficha Técnica

☐ Modificar Descripción

☐ Modificar Referencia Externa (Proveedor)

☐ Modificar Activo Padre

☐ Modificar Centro de Costo

☐ Modificar Ubicación Física

☐ Modificar Clasificación por Proceso

☐ Modificar Confiabilidad Subjetiva

☐ Modificar Proveedor

☐ Modificar Fabricante

☐ Modificar Marca

☐ Modificar Modelo

☐ Modificar Tipo

☐ Modificar Encargado

☐ Modificar Estado

☐ Modificar Componente Intercambiable

☐ Modificar Ruta

☐ Modificar Grupo del Activo

☒ Modificar Comentarios

Nuevo Comentario

Use medidas de seguridad


☐ Vida Útil

☐ Info. Biomédica

Imagen 46. Activos - Modificar Comentarios

VIDA ÚTIL

Modificar FF Registro: Se Modifica Masivamente la fecha de registro ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

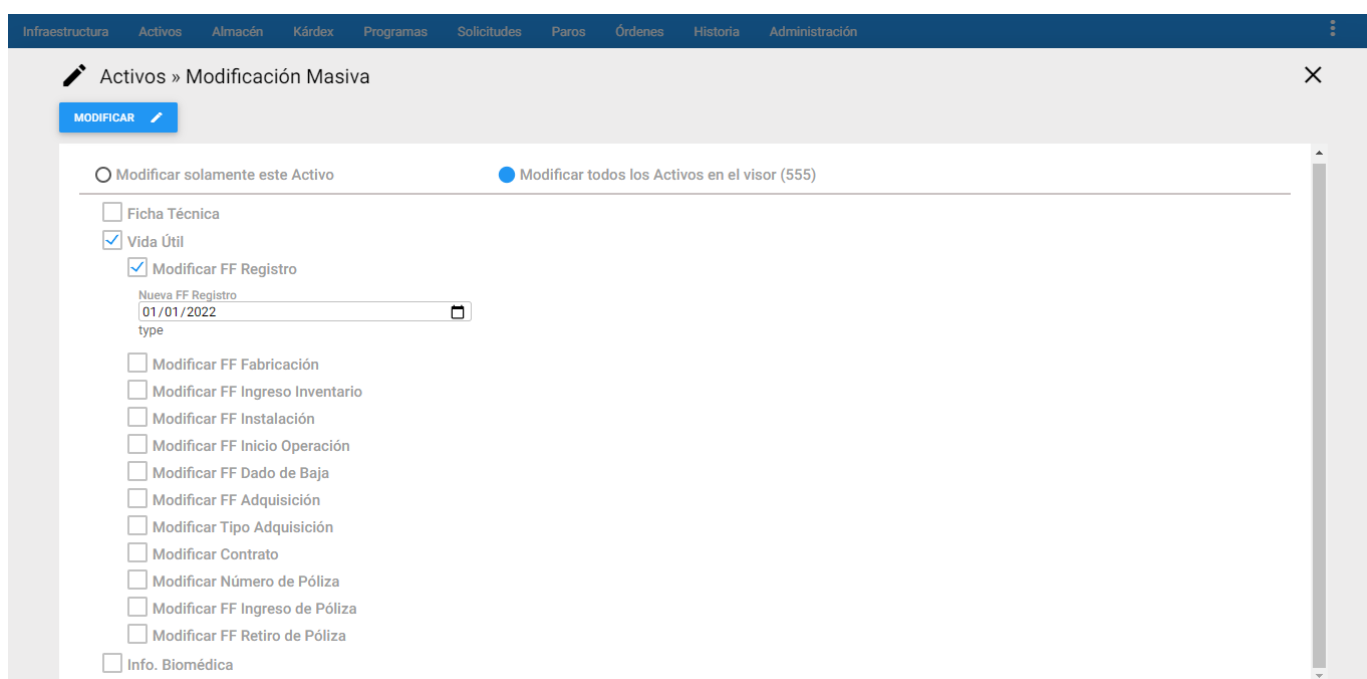

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica

☒ Vida Útil

☒ Modificar FF Registro

Nueva FF Registro
01/01/2022

type

☐ Modificar FF Fabricación

☐ Modificar FF Ingreso Inventario

☐ Modificar FF Instalación

☐ Modificar FF Inicio Operación

☐ Modificar FF Dado de Baja

☐ Modificar FF Adquisición

☐ Modificar Tipo Adquisición

☐ Modificar Contrato

☐ Modificar Número de Póliza


☐ Modificar FF Ingreso de Póliza

☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 47. Activos - Modificar FF Registro

Modificar FF Fabricación: Modifica Masivamente la fecha de fabricación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

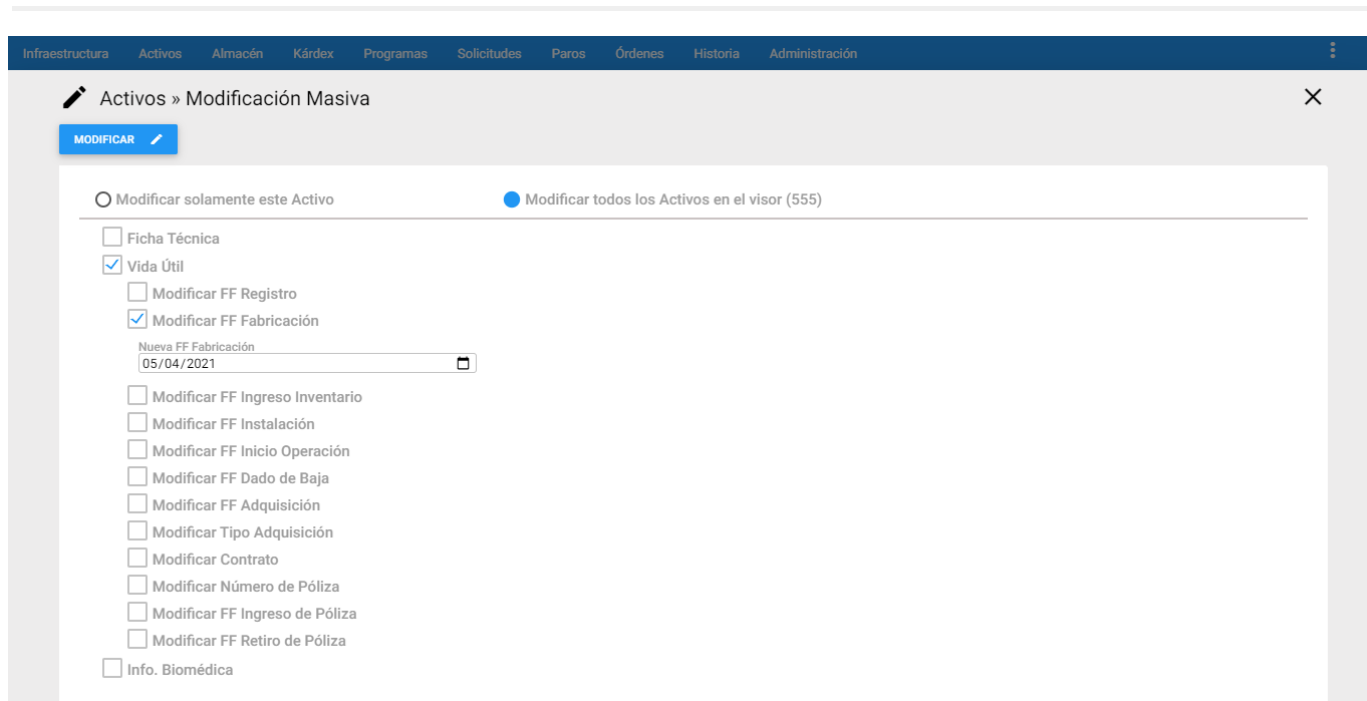

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR


☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil
☐ Modificar FF Registro
☒ Modificar FF Fabricación
 Nueva FF Fabricación
 05/04/2021

☐ Modificar FF Ingreso Inventario
☐ Modificar FF Instalación
☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza
☐ Info. Biomédica

Imagen 48. Activos - Modificar FF Fabricación

Modificar FF Ingreso Inventario: Se Modifica Masivamente la fecha de ingreso al inventario ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

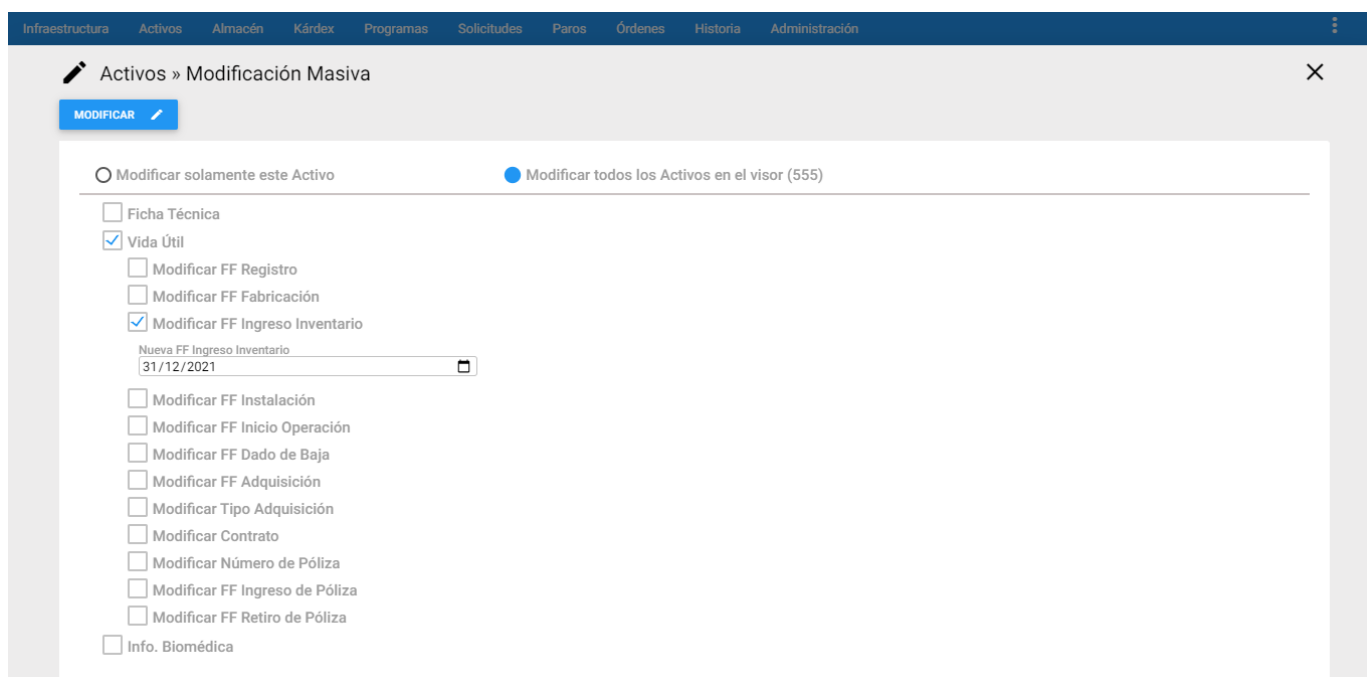

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR


☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil
☐ Modificar FF Registro
☐ Modificar FF Fabricación
☒ Modificar FF Ingreso Inventario
 Nueva FF Ingreso Inventario
 31/12/2021

☐ Modificar FF Instalación
☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza
☐ Info. Biomédica

Imagen 49. Activos - Modificar FF Ingreso Inventario

Modificar FF Instalación: Se Modifica Masivamente la fecha de instalación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

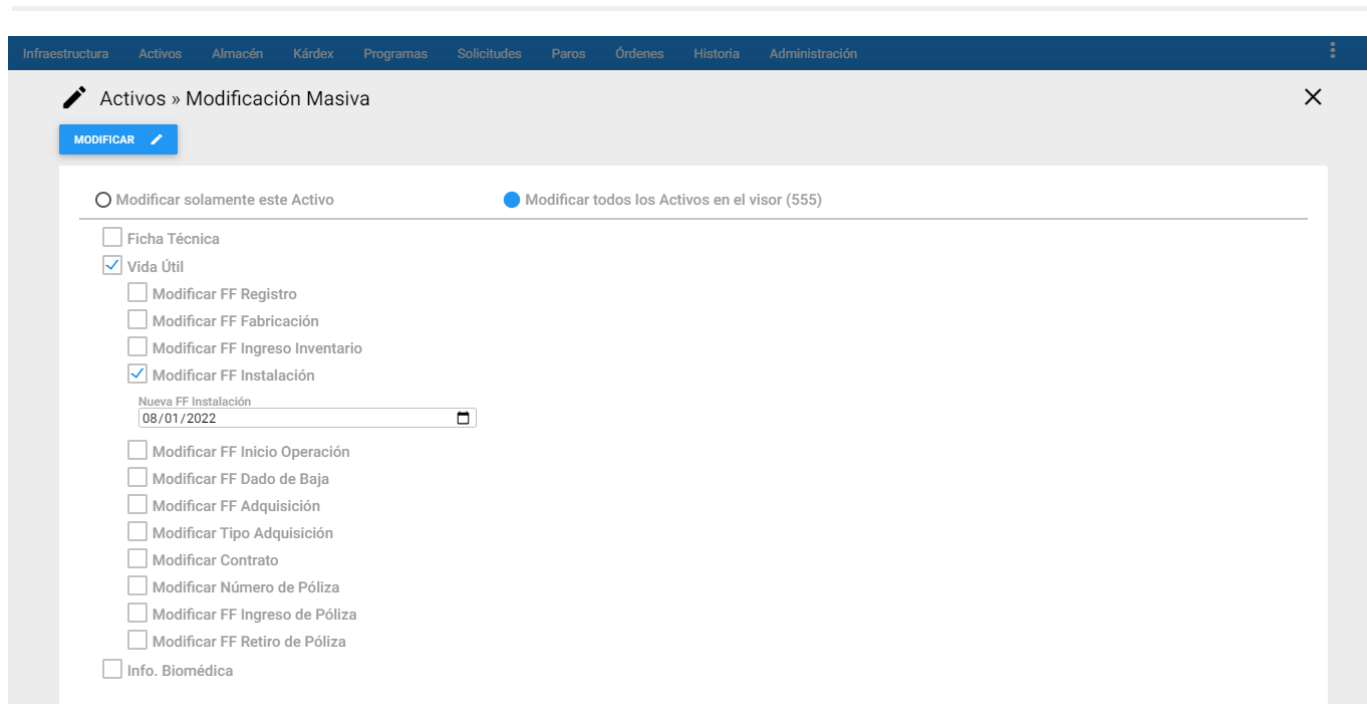

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☒ Modificar FF Instalación


Nueva FF Instalación
08/01/2022

☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 50. Activos - Modificar FF Ingreso Inventario

Modificar FF Inicio Operación: Se Modifica Masivamente la fecha de inicio de operación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

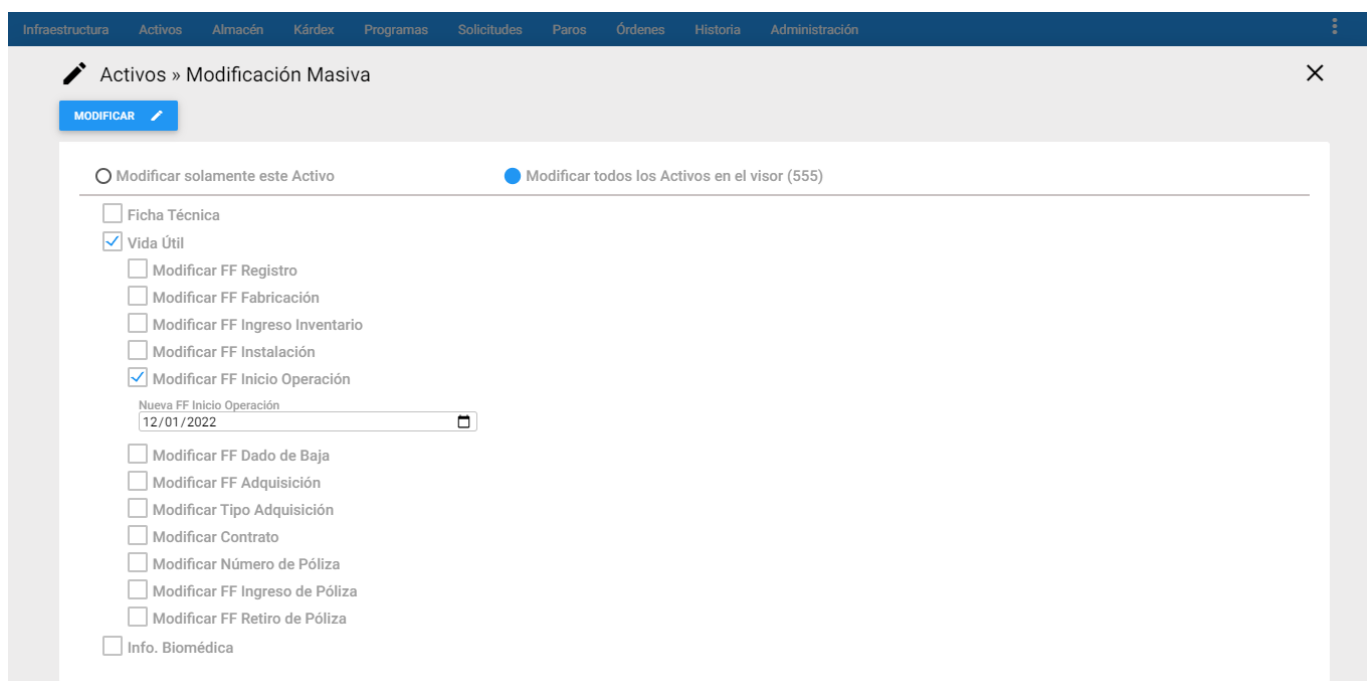

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☒ Modificar FF Inicio Operación


Nueva FF Inicio Operación
12/01/2022

☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 51. Activos - Modificar FF Inicio Operación

Modificar FF Dado de Baja: Se Modifica Masivamente la fecha de dada de baja en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

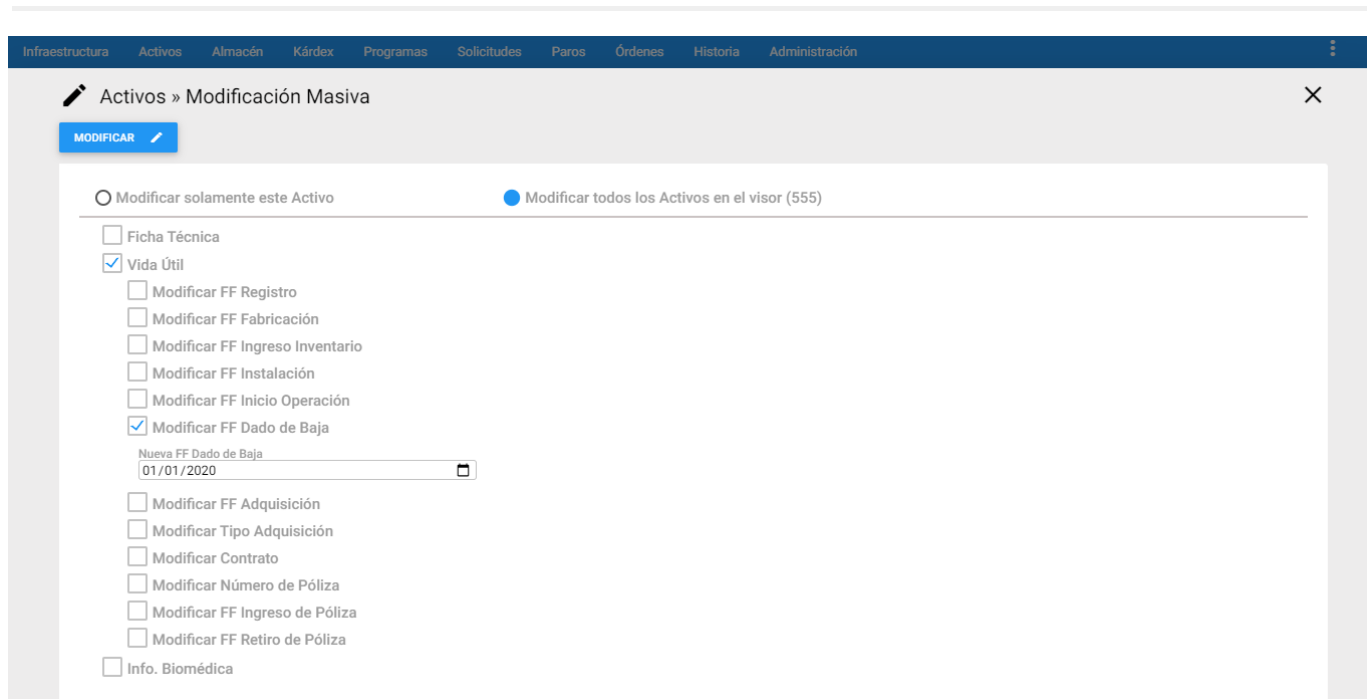

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil


- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☒ Modificar FF Dado de Baja

Nueva FF Dado de Baja
01/01/2020
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☐ Modificar Contrato
- ☐ Modificar Número de Póliza
- ☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
- ☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 52. Activos - Modificar FF Dado de Baja

Modificar FF Adquisición: Se Modifica Masivamente la fecha de adquisición ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

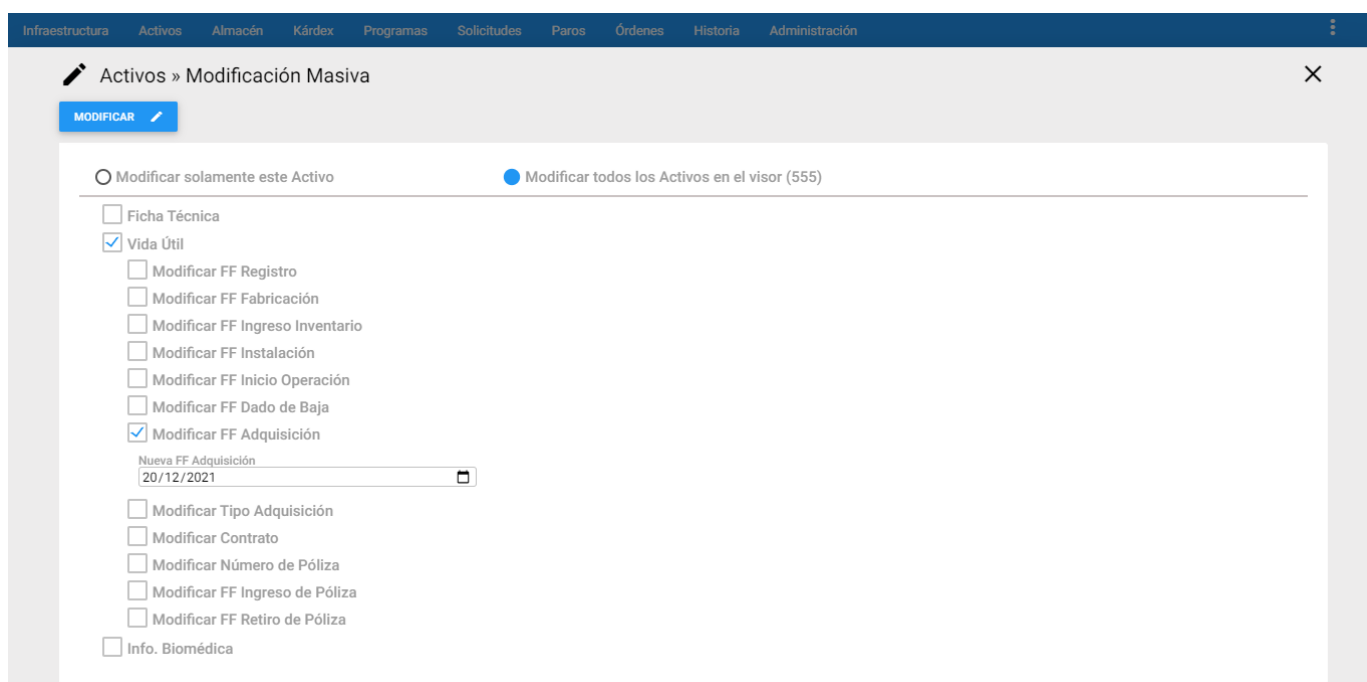

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil


- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☒ Modificar FF Adquisición

Nueva FF Adquisición
20/12/2021
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☐ Modificar Contrato
- ☐ Modificar Número de Póliza
- ☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
- ☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 53. Activos - Modificar FF Adquisición

Modificar Tipo Adquisición: Se Modifica Masivamente el tipo de adquisición seleccionado de la lista desplegada y que está ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

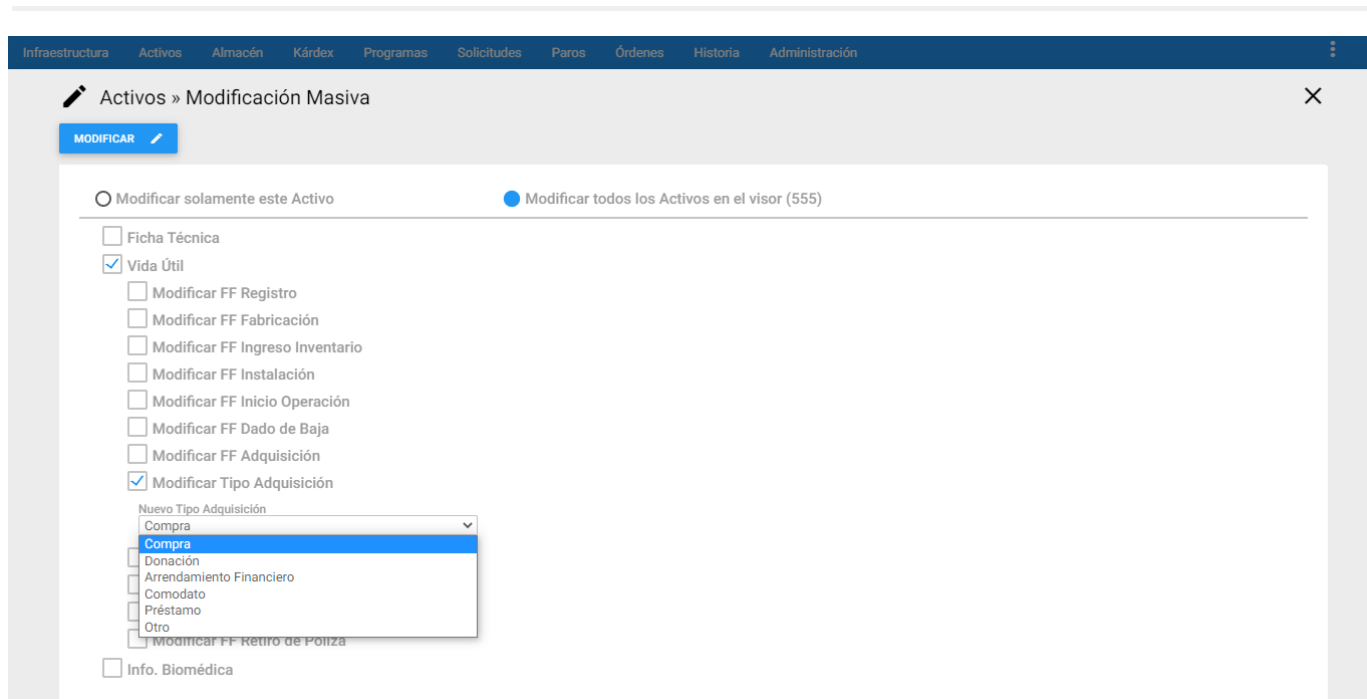

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)


☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☒ Modificar Tipo Adquisición

Nuevo Tipo Adquisición
 Compra
 Donación
 Arrendamiento Financiero
 Comodato
 Préstamo
 Otro
 Modificar FF Retiro de Póliza
- ☐ Info. Biomédica

Imagen 54. Activos - Modificar Tipo Adquisición

Modificar Contrato: Se Modifica Masivamente el Contrato ubicado en la pestaña de Vida Útil, de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

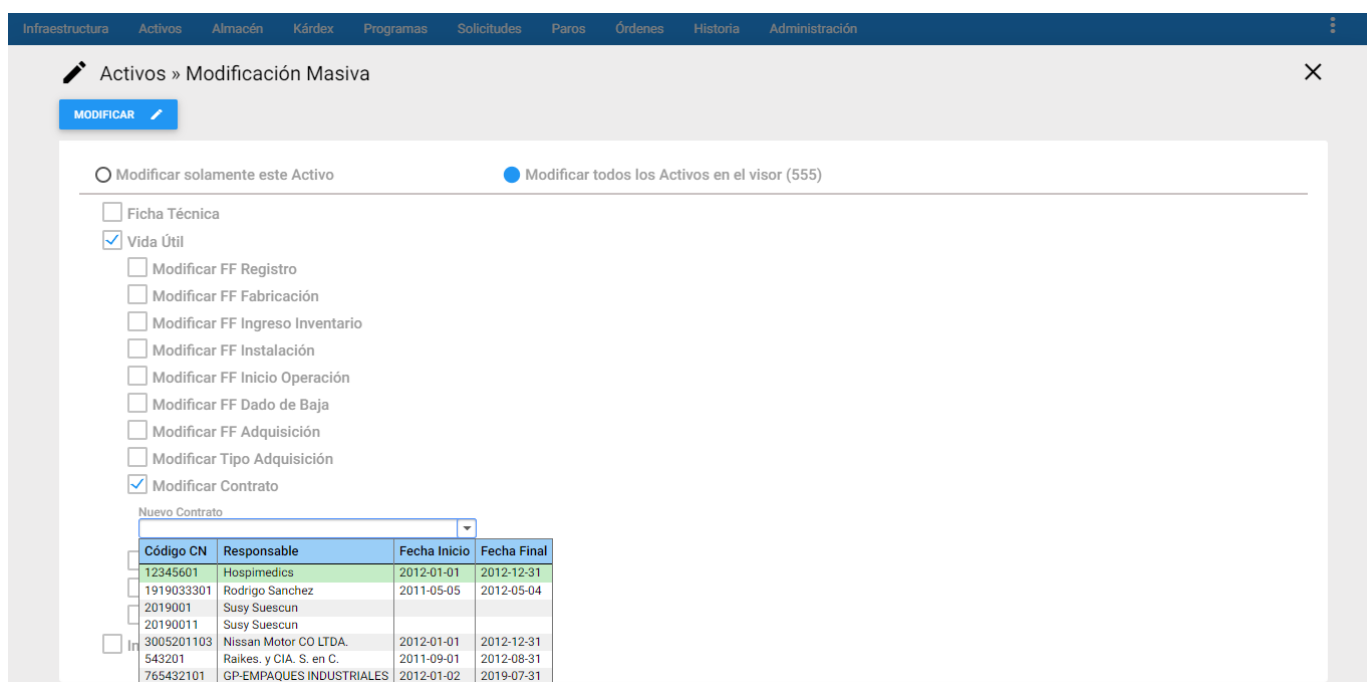

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil


- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☒ Modificar Contrato

Nuevo Contrato

Código CN	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
12345601	Hospimedics	2012-01-01	2012-12-31
1919033301	Rodrigo Sanchez	2011-05-05	2012-05-04
2019001	Susy Suescun		
20190011	Susy Suescun		
3005201103	Nissan Motor CO LTDA.	2012-01-01	2012-12-31
543201	Raikes. y CIA. S. en C.	2011-09-01	2012-08-31
765432101	GP-EMPAQUES INDUSTRIALES	2012-01-02	2019-07-31
- ☐ In

Imagen 55. Activos - Modificar Contrato

Modificar Número de Póliza: Se Modifica Masivamente el número de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

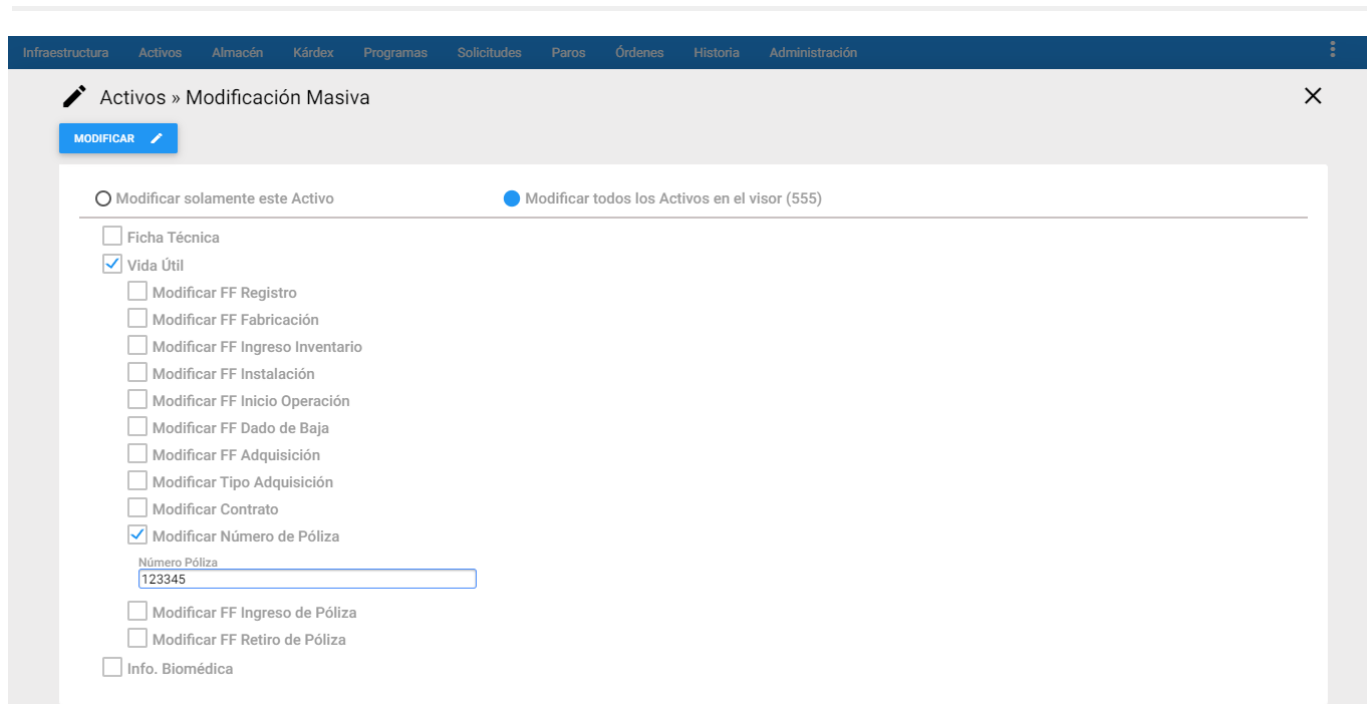

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☐ Modificar Contrato
- ☒ Modificar Número de Póliza


Número Póliza
123345

- ☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
- ☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 56. Activos - Modificar Número de Póliza

Modificar FF Ingreso de Póliza: Se Modifica Masivamente la fecha de ingreso de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

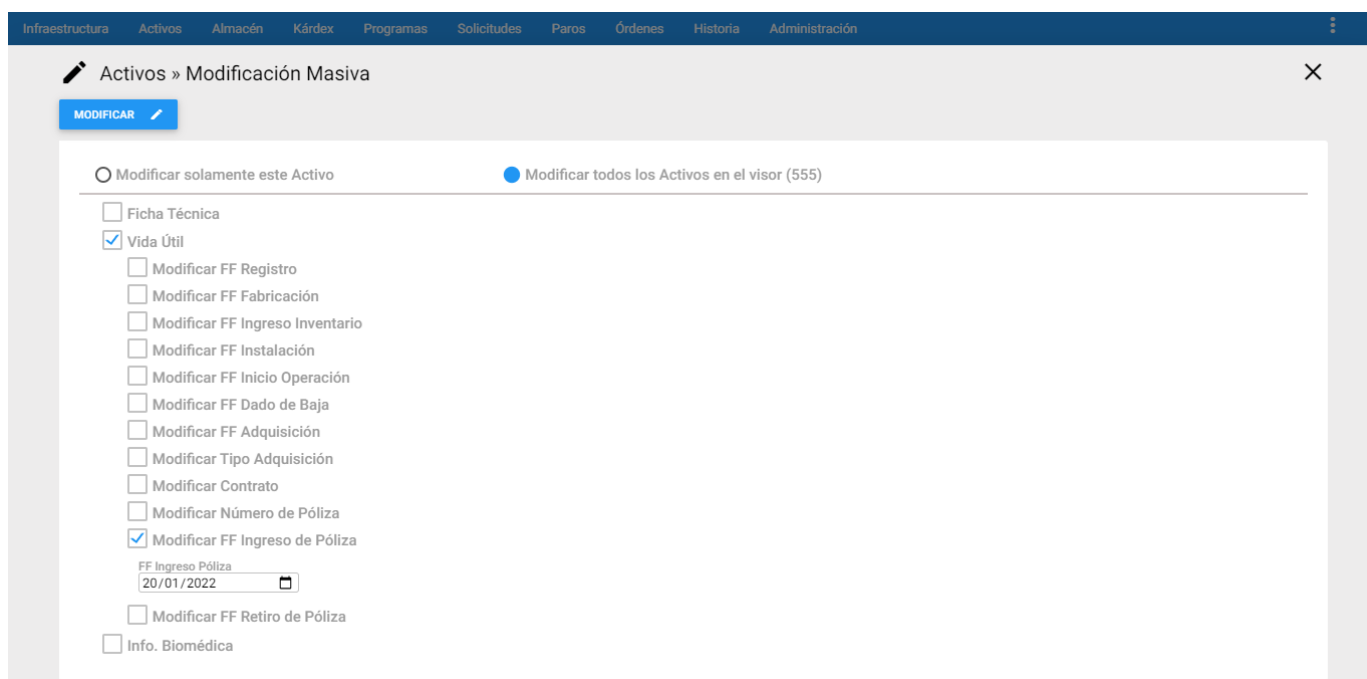

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil

- ☐ Modificar FF Registro
- ☐ Modificar FF Fabricación
- ☐ Modificar FF Ingreso Inventario
- ☐ Modificar FF Instalación
- ☐ Modificar FF Inicio Operación
- ☐ Modificar FF Dado de Baja
- ☐ Modificar FF Adquisición
- ☐ Modificar Tipo Adquisición
- ☐ Modificar Contrato
- ☐ Modificar Número de Póliza
- ☒ Modificar FF Ingreso de Póliza


FF Ingreso Póliza
20/01/2022

- ☐ Modificar FF Retiro de Póliza

☐ Info. Biomédica

Imagen 57. Activos - Modificar FF Ingreso de Póliza

Modificar FF Retiro de Póliza: Se Modifica Masivamente la fecha de retiro de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

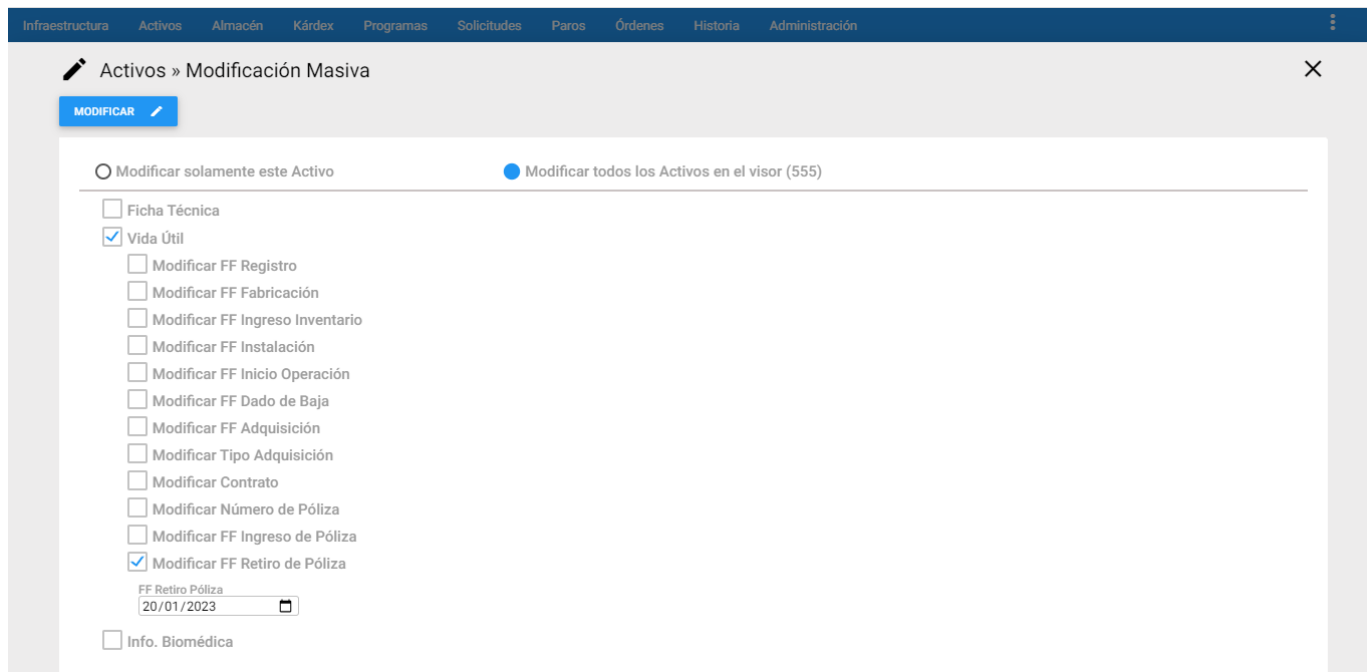

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR


☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☒ Vida Útil
☐ Modificar FF Registro
☐ Modificar FF Fabricación
☐ Modificar FF Ingreso Inventario
☐ Modificar FF Instalación
☐ Modificar FF Inicio Operación
☐ Modificar FF Dado de Baja
☐ Modificar FF Adquisición
☐ Modificar Tipo Adquisición
☐ Modificar Contrato
☐ Modificar Número de Póliza
☐ Modificar FF Ingreso de Póliza
☒ Modificar FF Retiro de Póliza
 FF Retiro Póliza
 20/01/2023
☐ Info. Biomédica

Imagen 58. Activos - Modificar FF Ingreso de Póliza

INFO. BIOMÉDICA

Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso de Comercialización: Se Modifica Masivamente el número de registro sanitario INVIMA o el número de permiso de comercialización ubicada en la pestaña de Info. Biomédica de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

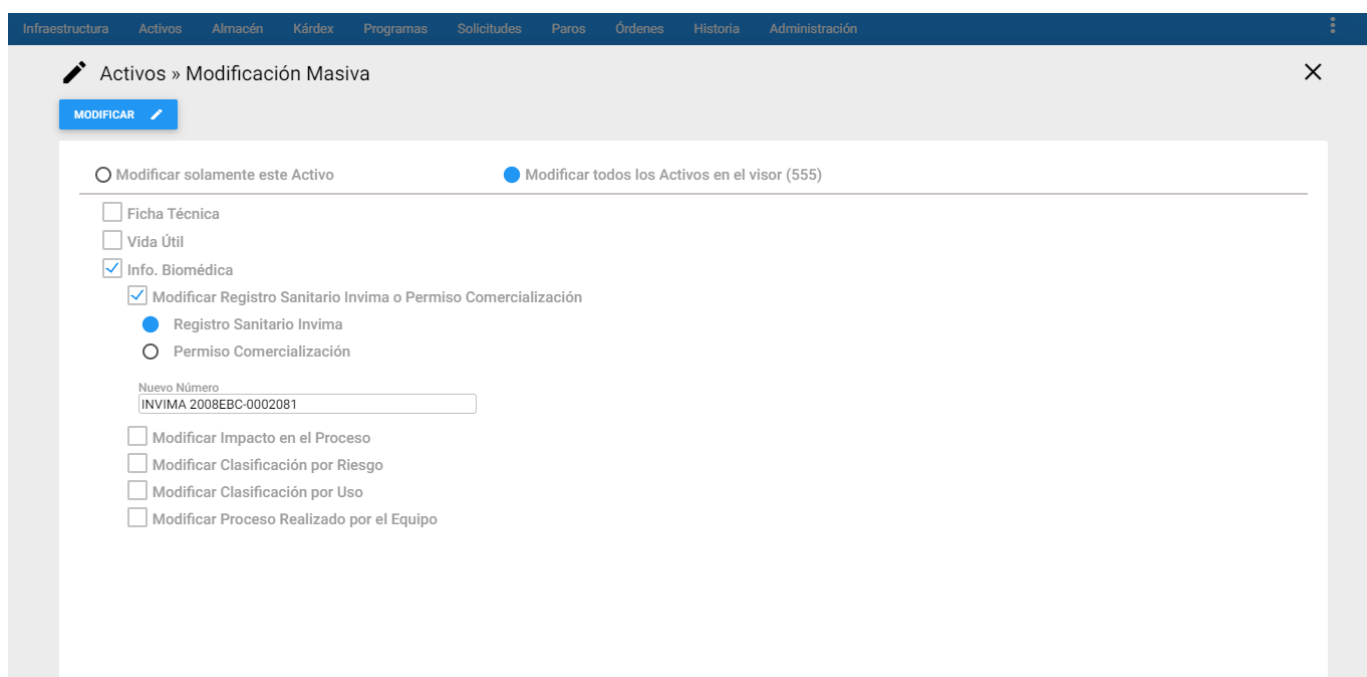

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva


MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☐ Vida Útil
☒ Info. Biomédica
☒ Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización
☒ Registro Sanitario Invima
☐ Permiso Comercialización
 Nuevo Número
 INVIMA 2008EBC-0002081
☐ Modificar Impacto en el Proceso
☐ Modificar Clasificación por Riesgo
☐ Modificar Clasificación por Uso
☐ Modificar Proceso Realizado por el Equipo

Imagen 59. Activos - Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso de Comercialización


Modificar Impacto en el Proceso: Se Modifica Masivamente el impacto en el proceso ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

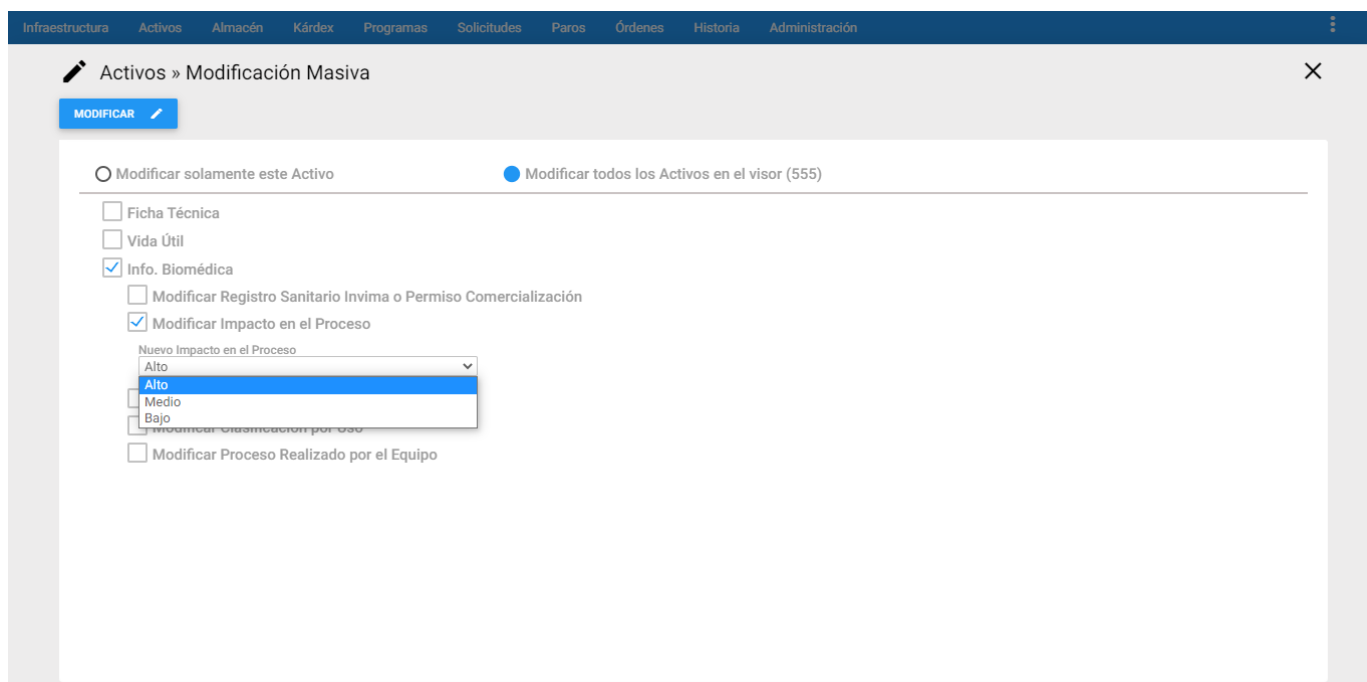

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. There is a 'MODIFICAR' button with a pencil icon. Below the button, there are two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes for different modification options. The 'Info. Biomédica' checkbox is checked. Under 'Info. Biomédica', the 'Modificar Impacto en el Proceso' checkbox is checked. A dropdown menu is open for 'Nuevo Impacto en el Proceso', showing options: 'Alto' (selected), 'Medio', and 'Bajo'. Other options like 'Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización', 'Modificar Clasificación por Riesgo', and 'Modificar Proceso Realizado por el Equipo' are also visible but not selected.

Imagen 60. Activos - Modificar Impacto en el Proceso

Modificar Clasificación por Riesgo: Se Modifica Masivamente la clasificación por riesgo ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

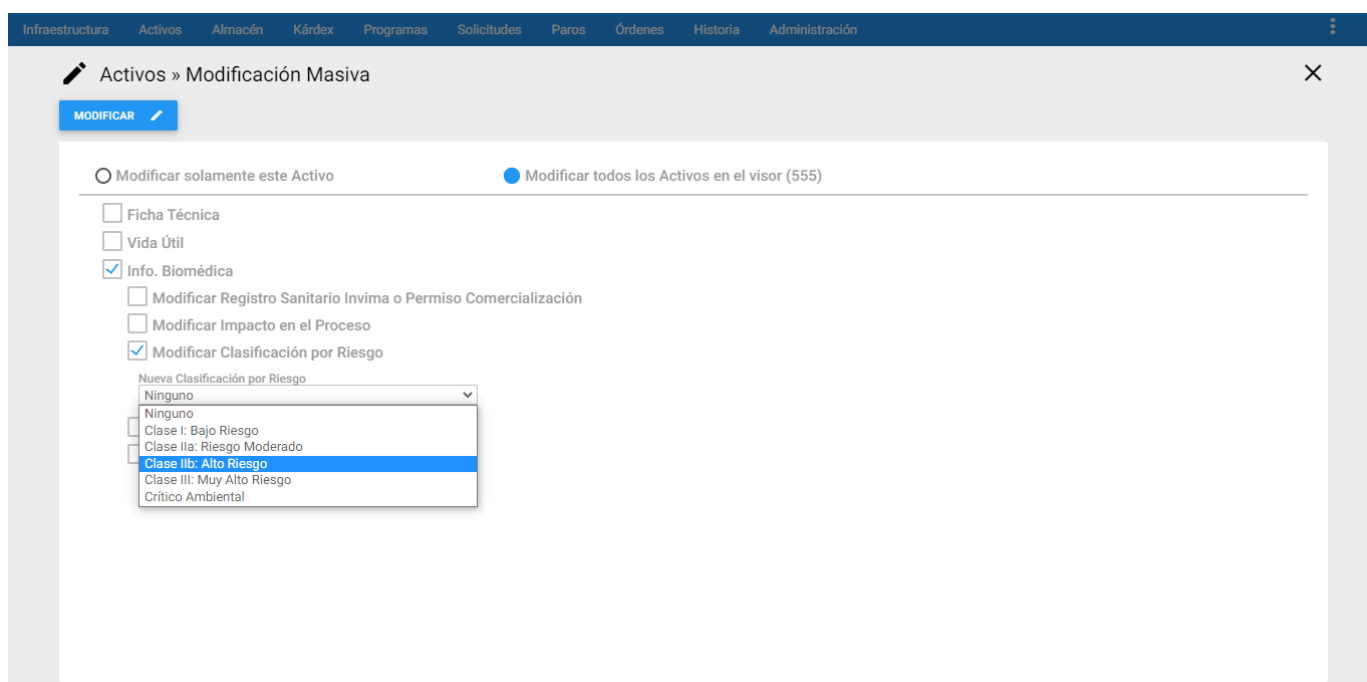

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' window. At the top, there is a navigation bar with tabs: Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, and Administración. Below the navigation bar, the window title is 'Activos » Modificación Masiva'. There is a 'MODIFICAR' button with a pencil icon. Below the button, there are two radio buttons: 'Modificar solamente este Activo' (unselected) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (selected). Below the radio buttons, there is a list of checkboxes for different modification options. The 'Info. Biomédica' checkbox is checked. Under 'Info. Biomédica', the 'Modificar Clasificación por Riesgo' checkbox is checked. A dropdown menu is open for 'Nueva Clasificación por Riesgo', showing options: 'Ninguno' (selected), 'Clase I: Bajo Riesgo', 'Clase IIa: Riesgo Moderado', 'Clase IIb: Alto Riesgo' (highlighted), 'Clase III: Muy Alto Riesgo', and 'Crítico Ambiental'. Other options like 'Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización' and 'Modificar Impacto en el Proceso' are also visible but not selected.

Imagen 61. Activos - Modificar Impacto en el Proceso

Modificar Clasificación por Uso: Se Modifica Masivamente la clasificación por uso ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☐ Vida Útil
☒ Info. Biomédica

☐ Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización
☐ Modificar Impacto en el Proceso
☐ Modificar Clasificación por Riesgo
☒ Modificar Clasificación por Uso

Nueva Clasificación por Uso

- Ninguno
- Diagnóstico
- Tratamiento y Mantenimiento de la Vida**
- Rehabilitación
- Prevención
- Análisis de Laboratorio
- Equipo Industrial de uso Hospitalario

Imagen 62. Activos - Modificar Clasificación por uso

Modificar Proceso Realizado por el Equipo: Se Modifica Masivamente el proceso realizado por el equipo ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

☐ Modificar solamente este Activo
 ☒ Modificar todos los Activos en el visor (555)

☐ Ficha Técnica
☐ Vida Útil
☒ Info. Biomédica

☐ Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización
☐ Modificar Impacto en el Proceso
☐ Modificar Clasificación por Riesgo
☐ Modificar Clasificación por Uso
☒ Modificar Proceso Realizado por el Equipo

Nuevo Proceso Realizado por el Equipo

Aparato cuya función común es crear un ambiente con la humedad y temperatura adecuados para el crecimiento o reproducción de seres vivos.

Imagen 63. Activos - Modificar Clasificación por uso

Nota: Estas opciones de modificar masivamente la información biomédica, sólo está habilitada para este tipo de compañías.

Actualizar Contadores

Es la función que facilita la Actualización de los Contadores asociados a los Activos/Equipos. A esta ventana se llega sobreponiendo el cursor sobre el Módulo de Activos y mediante un clic en la opción **Actualizar Contadores**.

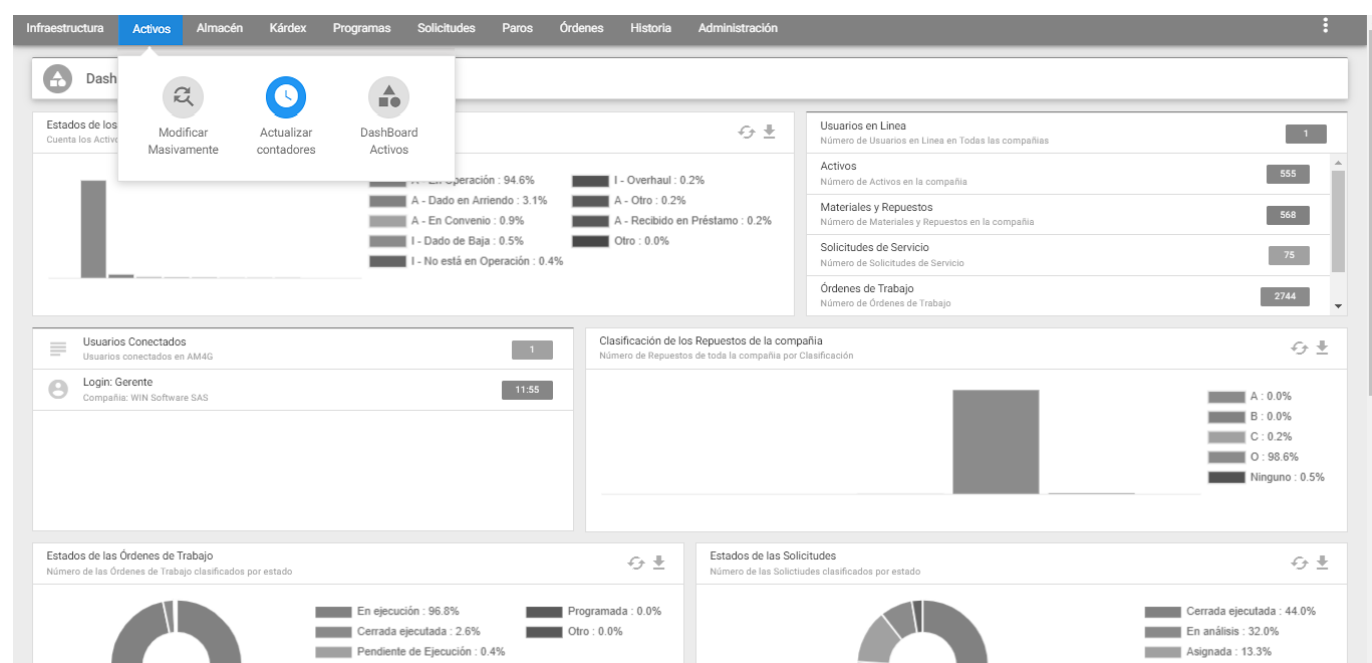


Imagen 64. Activos - Transacción Actualizar Contadores

La ventana despliega la lista de los Activos que tienen registrado un Contador dentro de su definición de Ficha Técnica. Junto al Código de cada Activo aparece el tipo de Contador y los datos referentes a la última lectura registrada. Posteriormente, a la derecha de cada línea de un Activo se encuentran disponibles un conjunto de campos para el registro de la información correspondiente a una nueva lectura.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración									
⌚ Activos » Actualizar Contadores									
Actualizar Todos Adicionan Todos Reemplazan									
	Activo	Contador	FF Anterior	Valor Anterior	FF Nueva	Valor Nuevo	AD	RE	Nueva Medición
☐	BL03	Horas	1999-11-06	9129.00	18/01/2022		☒	☐	
☐	BL03MT	Horas	2003-06-11	13573.00	18/01/2022		☐	☒	
☒	BL03MT02	Horas	2003-06-11	13573.00	18/01/2022		☐	☒	
☐	CA01	Horas	1997-08-21	6543.00	18/01/2022		☒	☐	
☐	CC-039	Odómetro	2003-08-30	22000.00	18/01/2022		☒	☐	
☐	CC-041	Kilómetros	2001-01-29	36092.00	18/01/2022		☒	☐	
☒	CC-049	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	18/01/2022	67540.00	☒	☐	124329.00
☐	CC-049MO	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	18/01/2022		☒	☐	
☐	CC-096	Odómetro	1995-11-23	30000.00	18/01/2022		☒	☐	
☐	CC-098	Odómetro	1995-11-23	30000.00	18/01/2022		☒	☐	
☐	CMPTIN115	Kilómetros	2002-10-19	17892.00	18/01/2022		☒	☐	

Imagen 65. Activos - Actualizar Contadores

En la gráfica anterior, ventana para Actualización de Contadores, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos. A continuación se describen los campos que componen esta ventana:

Activo: En esta columna aparece el listado de todos los Activos/Equipos que tienen definido un Contador en su Ficha Técnica. Al lado izquierdo del Equipo puede haber dos campos. El primero, al extremo izquierdo un signo Más $\oplus$ o un signo Menos $\ominus$, que permiten visualizar u ocultar respectivamente, el despiece del Equipo en aquellos componentes de despiece que también tienen una definición de contador, en su Ficha Técnica. El segundo es una casilla de selección que es marcada cuando se quiere actualizar con un nuevo valor, el contador para el Equipo de esa línea.

Contador: En esta columna se trae automáticamente para cada Equipo el Contador que tenga definido en su Ficha Técnica.

FF Anterior: En esta columna se muestra la fecha de la anterior medición del Contador de cada Equipo.

Valor Anterior: En esta columna se despliega el valor de la medición anterior.

FF Nueva: En esta columna el sistema propone la fecha actual como fecha de la nueva lectura del Contador. Cada fecha se puede asumir o se puede modificar, según sea la fecha de realización de la lectura que se está registrando.

Valor Nuevo: En esta columna se ingresa el valor de la lectura de contador a ser registrada.

AD: Seleccionando esta opción se realiza la adición del campo **Valor Nuevo** al campo **Valor Anterior** y deja el resultado en la columna **Nueva Medición**.

RE: Seleccionando esta opción se copia el valor de la columna **Valor Nuevo** a la columna **Nueva Medición**.

Nueva Medición: En esta columna se listan los valores actualizados de ese contador para el Equipo de cada línea.

Nota: Al finalizar el registro de todas las lecturas de contadores se debe procesar a dar clic en el botón **Actualizar**, el sistema muestra un mensaje alerta y para continuar presionar **ACEPTAR**.

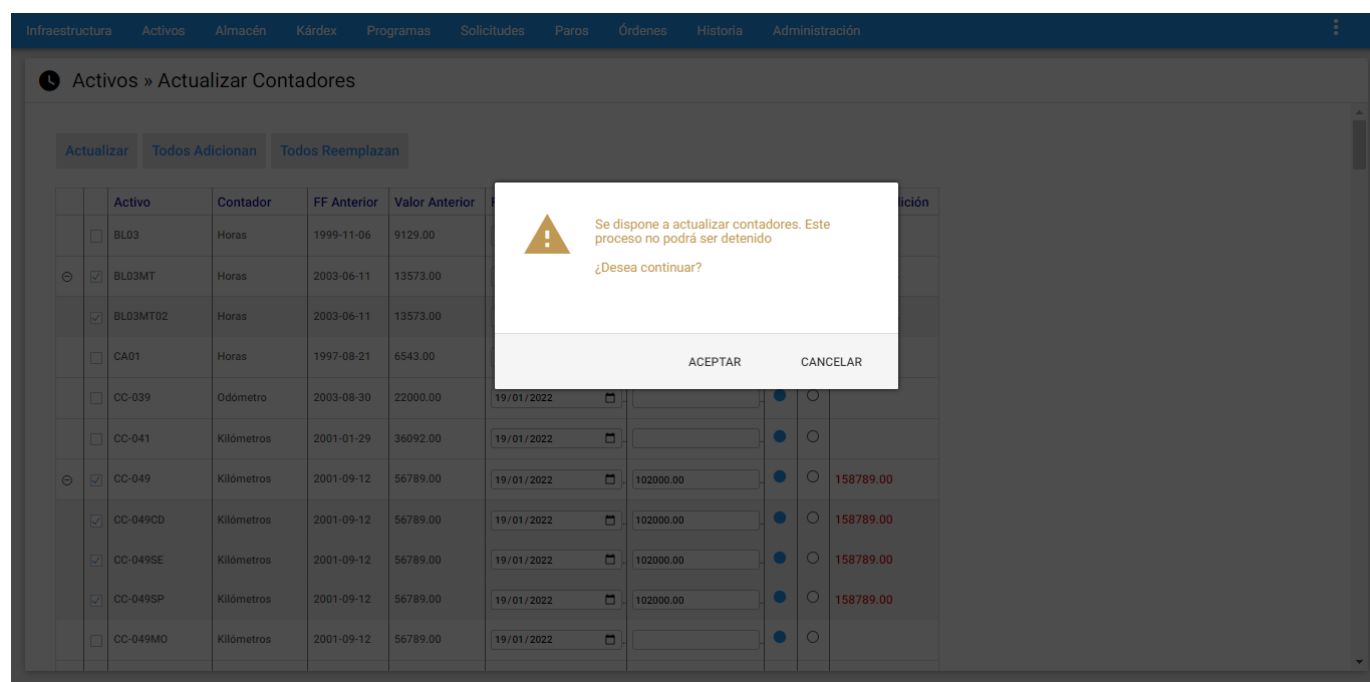


Imagen 66. Activos - Mensaje Alerta Contadores

Realizado el proceso se cambian los datos en rojo de la columna Nueva Medición por color verde, mostrando los campos actualizados:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

⌚ Activos » Actualizar Contadores

Actualizar Todos Adicionan Todos Reemplazan

	Activo	Contador	FF Anterior	Valor Anterior	FF Nueva	Valor Nuevo	AD	RE	Nueva Medición
	BL03	Horas	1999-11-06	9129.00	19/01/2022		☒	☐	
⊖	BL03MT	Horas	2003-06-11	13573.00	19/01/2022	1542092.64	☐	☒	1542092.64
	BL03MT02	Horas	2003-06-11	13573.00	19/01/2022	1542092.64	☐	☒	1542092.64
	CA01	Horas	1997-08-21	6543.00	19/01/2022		☒	☐	
	CC-039	Odómetro	2003-08-30	22000.00	19/01/2022		☒	☐	
	CC-041	Kilómetros	2001-01-29	36092.00	19/01/2022		☒	☐	
⊖	CC-049	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	☒	☐	158789.00
	CC-049CD	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	☒	☐	158789.00
	CC-049SE	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	☒	☐	158789.00
	CC-049SP	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	☒	☐	158789.00
	CC-049MO	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022		☒	☐	

Imagen 67. Activos - Actualización de Valores Contadores

Adicionalmente, se cuenta con la posibilidad de activar la opción de “No permitir modificaciones por encima del estándar de planeación”, cuya funcionalidad es impedir la carga de contadores por encima de un estándar predefinido para un periodo de tiempo. Para activarla, se debe ingresar con un usuario administrador e ingresar a Valores por Defecto, en la opción Activos, como se indica a continuación:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

📄 Valores por defecto

🌐 Compañía

Actualizar Cancelar

⚙️ General

💻 Activos

Permitir Seriales Duplicados ☐ Si ☒ No

Validar que incrementos en contadores no sean superiores al Estándar de Planeación Mensual ☒ Si ☐ No

Manejo de Depreciación por línea Recta ☐ Si ☒ No

Grupo 1 de Activos

Grupo 2 de Activos

Grupo 3 de Activos

Grupo 4 de Activos

Imagen 68. Activos - Valores por Defecto - Contadores

Cruce de Activos

En ocasiones se hace necesario hacer búsquedas rápidas de los Activos sobre su asociación con Órdenes, Solicitudes, Paros e Historia; esta transacción hace posible, que en el módulo de Activos se pueda acceder rápidamente a esta información, bien sea uno a uno ó registros preseleccionados en un Subgrupo.

Para acceder se sobrepone el cursor sobre el módulo de **Activos** donde se despliega el submenú de transacciones y a continuación dar clic en **Cruces de Activos** como se muestra a continuación:

The screenshot shows the 'Activos' module with a sub-menu open. The sub-menu options are: 'Modificar Masivamente', 'Actualizar contadores', 'Cruces de Activos', and 'DashBoard Activos'. The 'Cruces de Activos' option is selected. Below the sub-menu, a table displays a list of active assets. The table has columns for 'Código', 'Indicadores', 'Centro de Costo', 'Ubicación Física', 'Activo Fijo', 'Cod. Barras Int.', 'Serial', and 'Alias'. The table lists various assets, including 'MONITOR DE SIGNOS VITALES' and 'MONITOR DE SIGNOS VITALES (CON MÓDULO D...)', with their respective status indicators and details.

Código	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo Fijo	Cod. Barras Int.	Serial	Alias
BMMO-MS-32		Cirugia	CCES2P12-CIRUGIA REC...	302		63112/2	CX-MS-17
BMMO-MS-33		Unidad de Cuidados Intensi...	CCES2PT3-UCI CUBICUL...	333		6429985	HP-MS-07
BMMO-MS-34		Hospitalizacion 3PT2	CCES2PT3-PUESTO DE E...	339		6441588	HP-MS-08
BMMO-MS-35		Unidad de Cuidados Intensi...	CCES2PT3-UCI CUBICUL...	334		6429975	HP-MS-09
BMMO-MS-36		Unidad de Cuidados Intensi...	CCES2PT1-UCI HABITAC...	335		6433756	HP-MS-10
BMMO-MS-37		Ecografia y Endoscopia	CCES1PT2-ENDOSCOPIA	336	208	6442235	HP-MS-11
BMMO-MS-38		Ingeniería Biomédica	ACES1-INGENIERIA Y M...	328		6441589	HP-MS-12
BMMO-MS-39		Urgencias	CCES1PT2-URGENCIAS ...	243	N/A	6300252	UR-MS-02
BMMO-MS-40		Urgencias	CCES1PT2-URGENCIAS ...	244	N/A	6196660	UR-MS-03
BMMO-MS-41		Urgencias	CCES1PT2-URGENCIAS ...	245	N/A	6300210	UR-MS-04
BMMO-MS-42		Cirugia	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	394		6300251	CX-MS-18
BMMO-MS-43		Cirugia	CCES2PT2-CIRUGIA SAL...	802	N/A	6571120	CX-MS-19
BMMO-MS-44		Unidad de Cardiología	CCES2PT2-CARDIO SAL...	983		DE72857499	KA-MS-01
BMMO-MS-45		Unidad de Cardiología	CCES2PT2-CARDIO REC...	972		DE72857491	KA-MS-02
BMMO-MS-46		Unidad de Cardiología	CCES2PT2-CARDIO REC...	981		DE72857519	KA-MS-03
BMMO-MS-47		Unidad de Cardiología	CCES2PT2-CARDIO REC...	974		DE72857492	KA-MS-04
BMMO-MS-48		Unidad de Cardiología	CCES2PT2-CARDIO SAL...	980		DE72857493	KA-MS-05
BMMO-MS-49		Unidad de Cardiología	CCES2PT2-CARDIO REC...	973		DE72857523	KA-MS-06
BMMO-MS-50		Cirugia	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	964	N/A	6689484	CX-MS-20
BMMO-MS-51		Unidad de Cuidados Intensi...	CCES2PT3-UCI PUESTO ...	1004		6154456	HP-MS-13
BMMO-MS-52		Hospitalizacion 3PT1	CCES3PT1-PUESTO DE E...	1058		03760	CX-MS-21
BMMO-MS-53		Cirugia	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	1059	N/A	03789	CX-MS-22
BMMO-MS-54		Terapia Fisica	TCES1PTM-FISIOTERAPIA	1072	N/A	SF312024890WA	
BMMO-MS-55		Unidad de Cuidados Intensi...	CCES2PT3-UCI CUBICUL...	1071	N/A	SF311524855WA	
BMMO-MS-56		Urgencias	CCES1PT2-URGENCIAS	1101	cubiculo 2	03688	UR-MS-04
BMMO-MS-57		Servicio de Observación Es...	CCES2PT2-SOE	1102		01177	UR-MS-05
BMMO-MS-58		Cirugia	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	1458	N/A	0107106	CX-MS-23
BMMO-MS-59		Hospitalizacion 5PT3	CCES2PT3-PUESTO DE E...	1459	N/A	0107108	HP-MS-01
BMMO-MS-60		Cirugia	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	1520	N/A	0107351	CX-MS-24
BMMO-MS-61		Cirugia	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	1521	N/A	0107309	CX-MS-25

Imagen 69. Activos - Ir a Cruce de Activos

A continuación se visualiza la Ventana Visor de Cruces Activos:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración										
Cruces Activos PM SS ADF OT HI										
Indicador	Código	Descripción	Estado	Indicadores	PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI as	
☐	APCO-MN-133	MANOMETRO PRESION AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-134	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO	I - No está en Opera...	● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-135	MANOMETRO OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-136	MANOMETRO DÍOXIDO DE CARBONO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-137	MANOMETRO AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-138	MANOMETRO NITRÓGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-139	MANOMETRO VACÍO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-14	MANOMETRO VACÍO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-140	MANOMETRO OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-141	MANOMETRO DÍOXIDO DE CARBONO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-142	MANOMETRO AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-143	MANOMETRO NITRÓGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-144	MANOMETRO VACÍO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-145	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO	I - No está en Opera...	● ● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-146	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO	I - No está en Opera...	● ● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-147	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO	I - No está en Opera...	● ● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-148	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO	I - No está en Opera...	● ● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-149	MANOMETRO PRESION DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-15	MANOMETRO PRESIÓN DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-150	MANOMETRO DE VACÍO	I - Dado de Baja	● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-151	MANOMETRO PRESION DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-152	MANOMETRO PRESIÓN DE AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-153	MANOMETRO DE VACÍO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-154	MANOMETRO PRESION DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-16	MANOMETRO PRESION TANQUE	I - Dado de Baja	● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-17	MANOMETRO PRESION MONITOR DE CO Y DP	I - Dado de Baja	● ●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-18	MANOMETRO PRESION DE OXÍGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-19	MANOMETRO PRESION NITROGENO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-20	MANOMETRO PRESION DE DIOXIDO DE CARBONO	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	
☐	APCO-MN-21	MANOMETRO PRESIÓN DE AIRE MEDICINAL	A - En Operación	●	1	0	0	0	0	

Registros por página: 60 481-540 de 6108 / 6108

« Primera Página Anterior 9 Siguiente Última Página »

Imagen 70. Activos - Visor Cruce de Activos

Los títulos de cada columna en color azul permiten organizar la información ascendente o descendente a través de un clic.

Esta transacción contiene las funcionalidades en cada ventana: Subgrupos de información , exportar registros seleccionados , imprimir reportes  y consultar indicadores .

Es posible seleccionar uno a uno en la primera columna **Indicador** a través de un clic en el recuadro ☐ y elegir lo que se desea consultar en los botones superiores en la izquierda:

- Programas: **PM**
- Solicitudes de Servicio: **SS**
- Paros: **ADF**
- Órdenes de Trabajo: **OT**
- Historia de Mantenimiento: **HI**

A continuación se ilustra el siguiente ejemplo:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Cruces Activos

PM SS ADF OT HI

Indicador	Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI asociados
☒	BMMO-MS-74	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	27
☒	BMMO-MS-75	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	1	28
☒	BMMO-MS-76	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	30
☒	BMMO-MS-77	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	29
☒	BMMO-MS-78	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-79	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-80	MONITOR DE SIGNOS VITALES (TRANSPORTE)	A - En Operación	●	2	0	0	0	35
☐	BMMO-MS-81	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	31
☐	BMMO-MS-82	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	29
☐	BMMO-MS-83	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	34
☐	BMMO-MS-84	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	37
☐	BMMO-MS-85	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-86	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	45
☐	BMMO-MS-87	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	25
☐	BMMO-MS-88	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	21
☐	BMMO-MS-89	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	19
☐	BMMO-MS-90	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-91	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	1	1	1	24
☐	BMMO-MS-92	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	26
☐	BMMO-MS-93	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-94	MONITOR DE SIGNOS VITALES #9	A - En Operación	●	2	0	0	0	62
☐	BMMO-MS-95	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-96	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	27
☐	BMMO-MS-97	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	22
☐	BMMO-MS-98	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	18
☐	BMMO-MS-99	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	●	2	0	0	0	19

Registros por página: 100 101-126 de 126 / 6108

« Primera Página < Anterior 2 Siguiente > Última Página »

Imagen 71. Activos - Subgrupo Cruce de Activos

La imagen anterior muestra el resultado por cada grilla de PM asociados, SS asociados, OT asociados e HI asociados al subgrupo o conjunto de Activos.

También puede visualizarse en la opción :

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Historia Archivada Administración

Cruces Activos

PM SS ADF OT HI

Indicador	Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI asociados
☒	BMMO-MS-73	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	28
☒	BMMO-MS-74	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	27
☒	BMMO-MS-75	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	1	28
☒	BMMO-MS-76	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	30
☒	BMMO-MS-77	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	29
☒	BMMO-MS-78	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-79	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-80	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	35
☒	BMMO-MS-81	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	31
☒	BMMO-MS-82	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	29
☒	BMMO-MS-83	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	34
☒	BMMO-MS-84	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	37
☒	BMMO-MS-85	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	28
☒	BMMO-MS-86	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	45
☒	BMMO-MS-87	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	25
☒	BMMO-MS-88	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	21
☒	BMMO-MS-89	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	19
☒	BMMO-MS-90	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	26
☒	BMMO-MS-91	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	1	1	1	24
☐	BMMO-MS-92	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	26
☐	BMMO-MS-93	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-94	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	62
☐	BMMO-MS-95	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	28
☐	BMMO-MS-96	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	27
☐	BMMO-MS-97	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	22
☐	BMMO-MS-98	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	18
☐	BMMO-MS-99	MONITOR DE S	A - En Operación	●	2	0	0	0	19

Registros por página: 60 121-147 de 147 / 6108

« Primera Página < Anterior 3 Siguiente > Última Página »

Exportar Cruces

☒ Exportar Visor ☐ Exportar Todos los Registros

☒ Exportar Todos Los Campos

☒ Código

☒ Descripción

☒ Estado

☒ PM Asociados

☒ SS Asociados

☐ ADF Asociados

☒ OT Asociados

☒ HI Asociados

EXPORTAR CERRAR

Imagen 72. Activos - Exportar Grilla de Cruce de Activos

Esto puede tardar algunos minutos dependiendo de la cantidad de datos a exportar, para continuar dar clic en el botón **Descargar**. Esto descarga un archivo en formato excel en la estación Cliente:

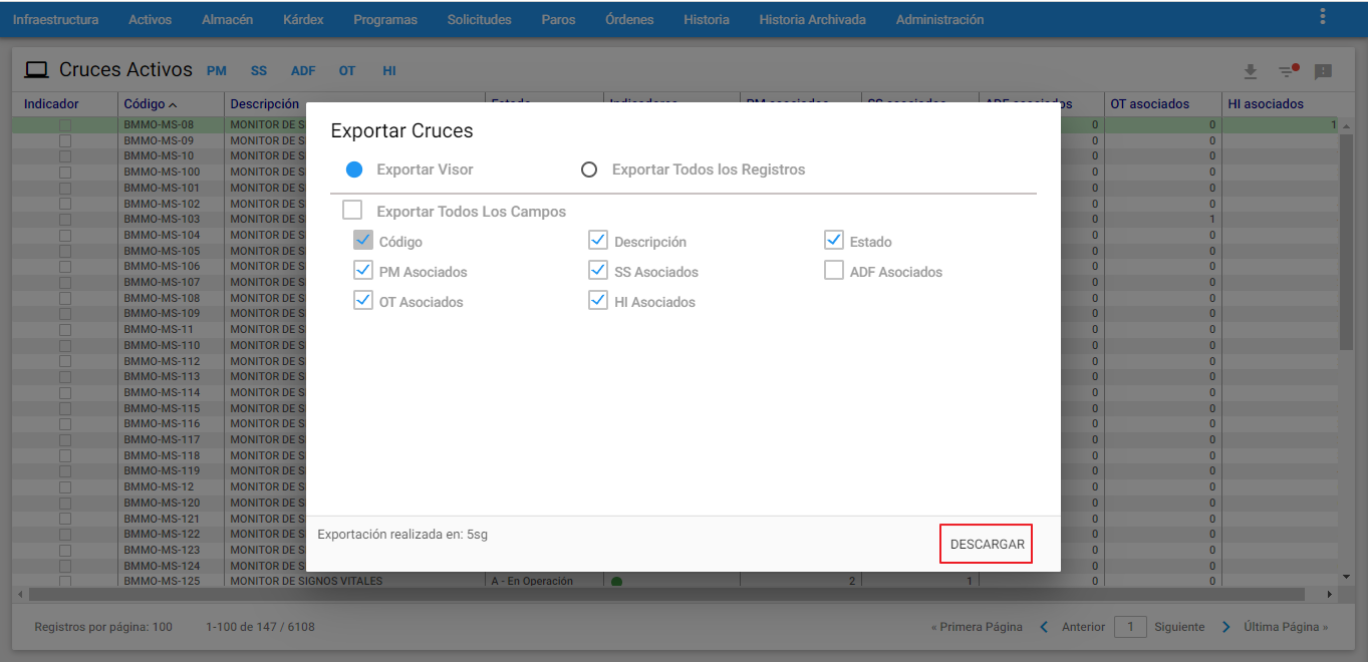


Imagen 73. Activos - Descarga Grilla de Cruce de Activos

Visualización de la exportación:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Código	Descripción	Estado	PM Asociados	SS Asociados	OT Asociados	HI Asociados	
2	BMMO-MS-08	MONITOR DE SIGNOS VITALES #6	A - En Operación	2	0	0	110	
3	BMMO-MS-09	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	37	
4	BMMO-MS-10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	78	
5	BMMO-MS-100	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	22	
6	BMMO-MS-101	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	18	
7	BMMO-MS-102	MONITOR DE SIGNOS VITALES #10	A - En Operación	2	0	0	44	
8	BMMO-MS-103	MONITOR DE SIGNOS VITALES #8	A - En Operación	2	0	1	45	
9	BMMO-MS-104	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	36	
10	BMMO-MS-105	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	35	
11	BMMO-MS-106	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	25	
12	BMMO-MS-107	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21	
13	BMMO-MS-108	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	1	0	29	
14	BMMO-MS-109	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	25	
15	BMMO-MS-11	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	84	
16	BMMO-MS-110	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	16	
17	BMMO-MS-112	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	28	
18	BMMO-MS-113	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	15	
19	BMMO-MS-114	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	17	
20	BMMO-MS-115	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21	
21	BMMO-MS-116	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21	

Imagen 74. Activos - Visualización Descarga Grilla Cruce de Activos

Para continuar y consultar Programas asociados al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón **PM** :

Programas de Mantenimiento

Código AC	Tar	Descripción	Ind	TT	TM	TA	Cri	Pri	
BMMO-MS-74	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CO
BMMO-MS-74	3	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CO
BMMO-MS-75	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CO
BMMO-MS-75	1	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CO
BMMO-MS-76	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CO
BMMO-MS-76	2	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CO
BMMO-MS-77	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CO
BMMO-MS-77	3	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CO
BMMO-MS-78	4	SEGURIDAD ELECTRICA	●	Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CO
BMMO-MS-78	3	PREVENTIVO	●	Otr	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CO
BMMO-MS-91	2	SEGURIDAD ELECTRICA	●	I/E	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CO
BMMO-MS-91	1	PREVENTIVO	●	I/E	Preventivo	MN-Mantto	SM	3	CO

Registros por página: 100 1-12 de 12 / 12

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 75. Activos - Programas Cruce de Activos

Para consultar Solicitudes asociadas al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón  :

Solicitudes de Servicio

Solicitud	Diagnóstico del Usuario	Prioridad	F/H Creación	F/H Tentativa Entrega	Estado	Indicadores
77640	BUENOS DIAS FAVOR REVISAR MONITOR DE SIGNOS VITALES DEL C...	Alta	2022-07-01 09:18		CO	

Registros por página: 100 1-1 de 1 / 1

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 76. Activos - Solicitudes Cruce de Activos

Para consultar ADF asociados al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón  :

Paro	F/H Creación FDA	Activo	Alias	Restricción	Estado	Indicadores	Responsable	Ubicación Física
10	2022-12-29 16:01	BMMO-MS-91	HP-MS-15	No	En análisis		Daniel Acevedo ...	CCES2PT3-UCI CUBI...

Registros por página: 100 1-1 de 1 / 1

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 77. Activos - Paros Cruce de Activos

Para consultar Órdenes de Trabajo asociadas al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón **OT** :

Número OT	Descripción	F/H Creación	Responsable	Pri	F/H Programada	Estado	Indicadores	Cod. Activo
2022 - 2388	PREVENTIVO	2022-06-01 09:51	Dennys Lorena Cár...	3	2022-06-19 00:00	EJ		BMMO-MS-75
2022 - 2803	BUENOS DIASFAVOR REVISAR MONIT...	2022-07-01 12:08	Dennys Lorena Cár...	2	2022-07-01 12:08	EJ		BMMO-MS-91

Registros por página: 100 1-2 de 2 / 2

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 78. Activos - Órdenes Cruce de Activos

Para consultar Historia de Mantenimiento asociada al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón **HI** :

Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicado
2022 - 916	monitor del cubículo 1 se ha apagado dos veces en la mañana, continua con un ru...	BMMO-MS-75	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 571	PREVENTIVO	BMMO-MS-77	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2518	OXMETRO DEL CUBICULO NUMERO 4 NO SENA CORRECTAMENTE	BMMO-MS-78	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●
2022 - 2468	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2450	PREVENTIVO	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2382	PREVENTIVO	BMMO-MS-79	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2196	POR FAVOR REVISAR EL MODULO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE UCI 1 C...	BMMO-MS-78	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1910	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-74	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1909	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-75	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1908	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-79	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1312	revisar modulo del monitor que al retirarlo y pasarlo al monitor de transporte,no ce...	BMMO-MS-74	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 118	PREVENTIVO	BMMO-MS-78	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 117	PREVENTIVO	BMMO-MS-91	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1074	PREVENTIVO	BMMO-MS-74	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2021 - 5317	PREVENTIVO	BMMO-MS-75	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2021 - 5316	PREVENTIVO	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●

Imagen 79. Activos - Historia Cruce de Activos

Dashboard Activos

Esta transaccion permite ver indicadores gráficos básicos sobre la información de los Activos/Equipos. Para acceder a esta opción se sobrepone el cursor sobre el módulo de Activos en el menú principal donde se despliega un submenú de transacciones disponibles y luego dar clic en "DashBoard Activos".

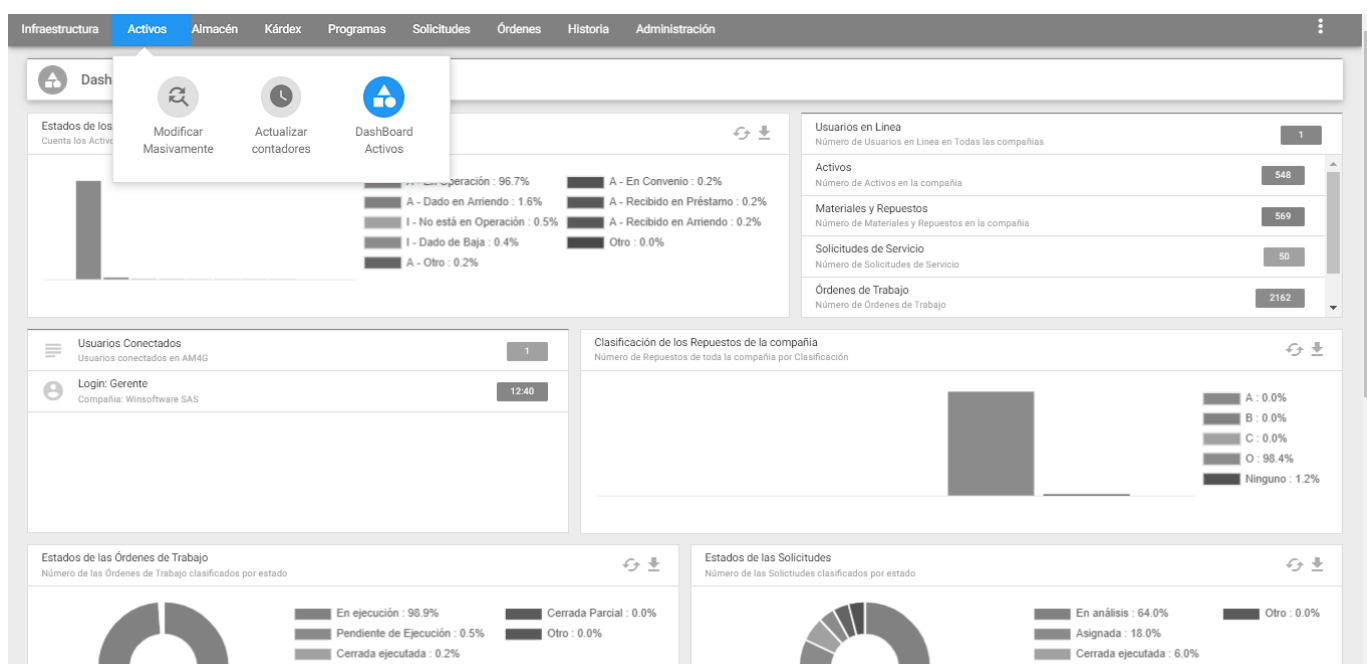
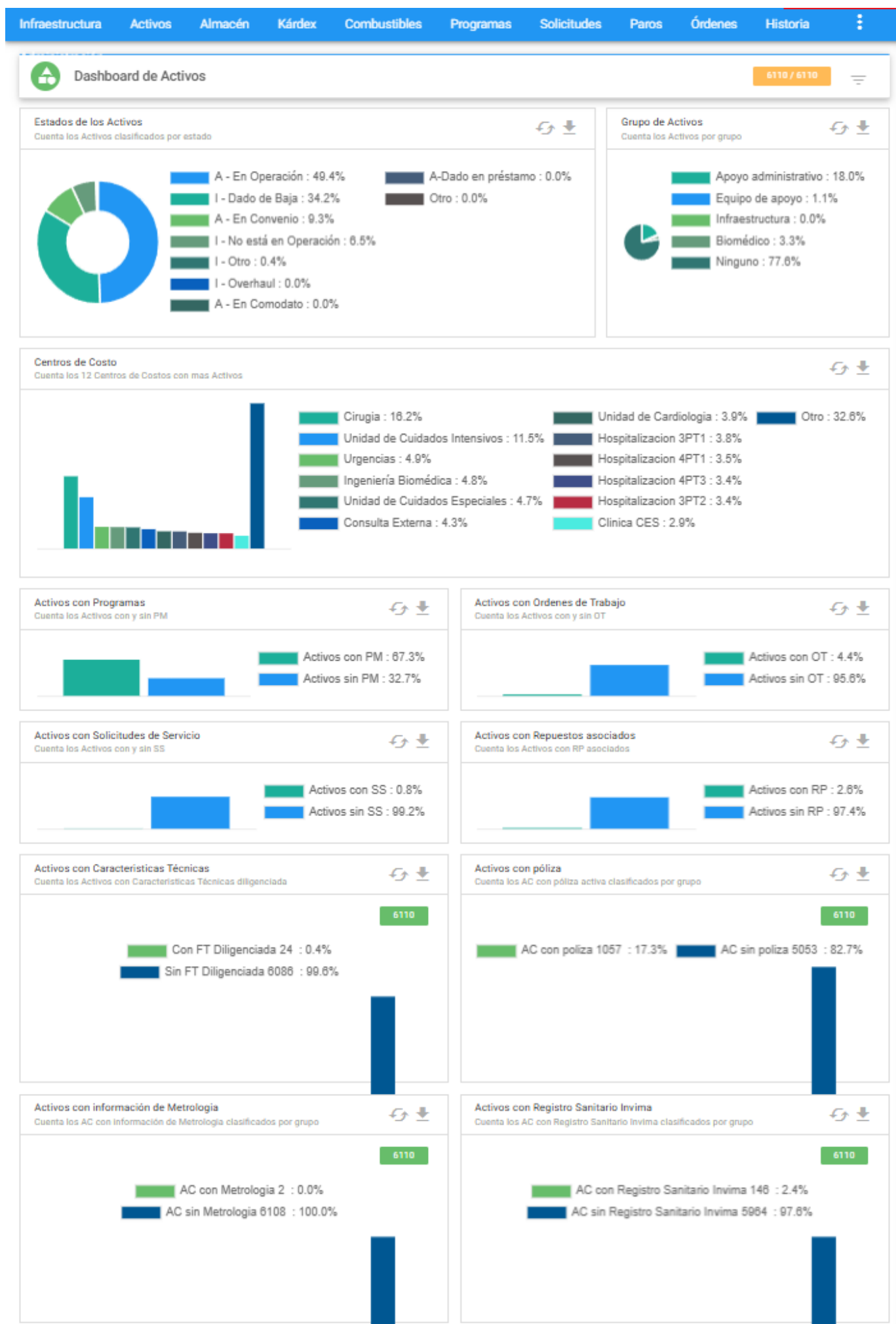


Imagen 80. Activos - Transacción Dashboard

Este comando permite visualizar en tiempo real el comportamiento de los Activos/Equipos con el fin de usarse como una herramienta para análisis y toma de decisiones rápidas.



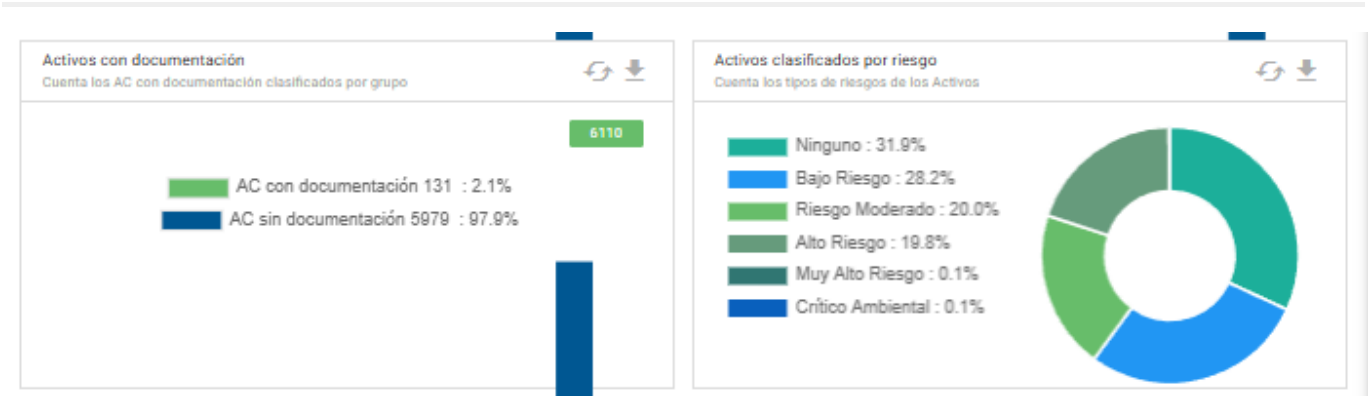
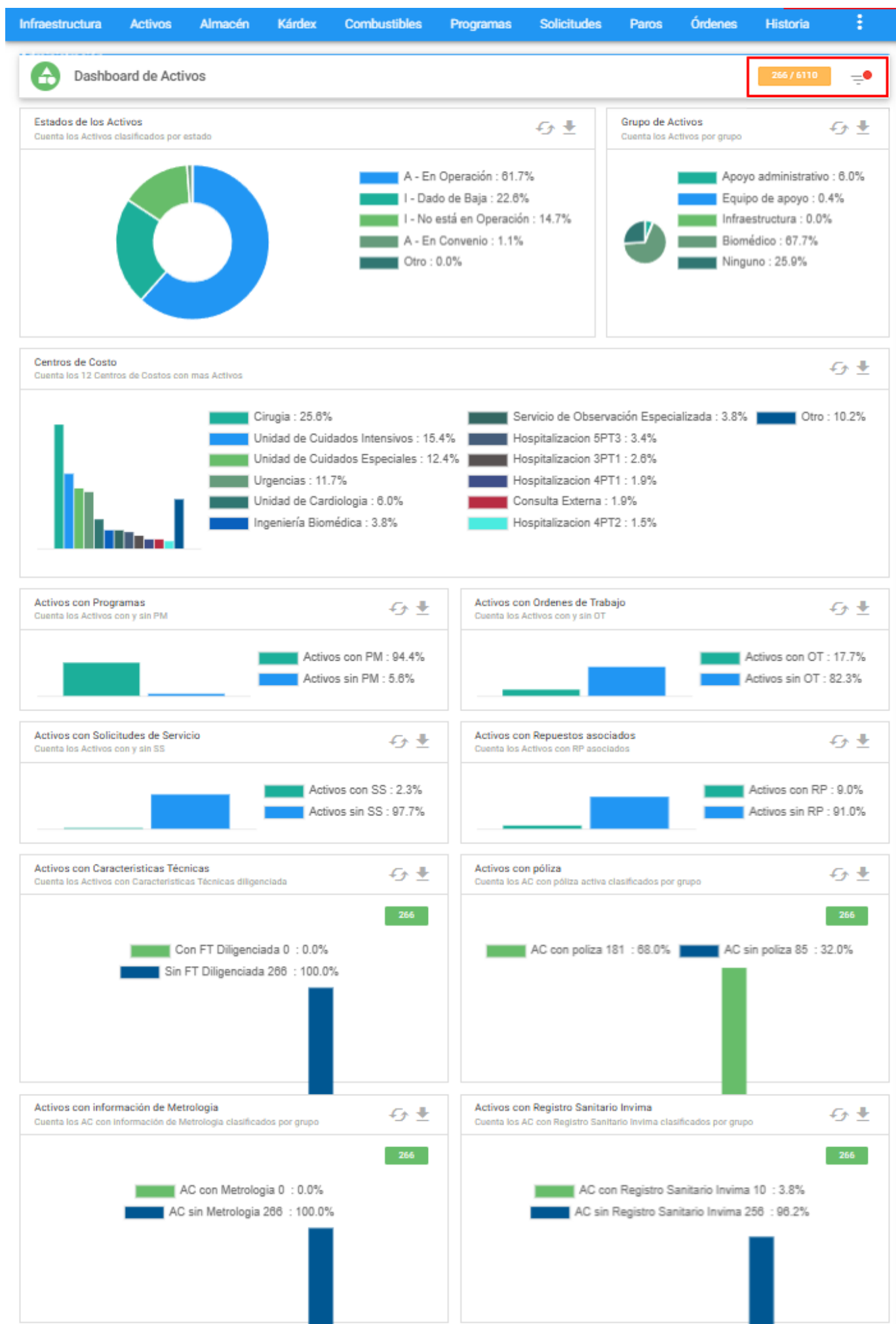


Imagen 81. Activos - Dashboard

La información del rectángulo de color naranja ubicado en la parte superior derecha como guía a modo de fracción (N/M), indica el número de registros del subgrupo en el visor(N) sobre el número total de registros de Activos existentes en la base de datos (M). Si no hay preselección, los dos números en sus totales son los mismos. También un indicador de la existencia de un subgrupo, es el ícono ≡ con una pelota de color rojo que se ubica al lado derecho de dicha fracción.



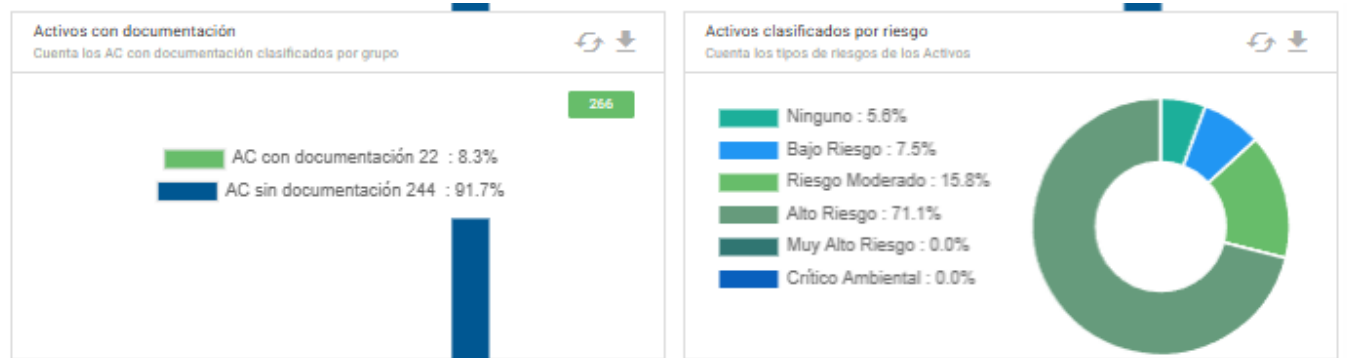


Imagen 82. Activos - Dashboard Subgrupos

Para personalizar la vista de los gráficos o tener una información específica se recomienda hacer subgrupos a través del ícono subgrupo . Asimismo los DashBoards permiten ocultar información con solo dar un clic sobre sus rectángulos de colores como se muestra en la siguiente imagen:

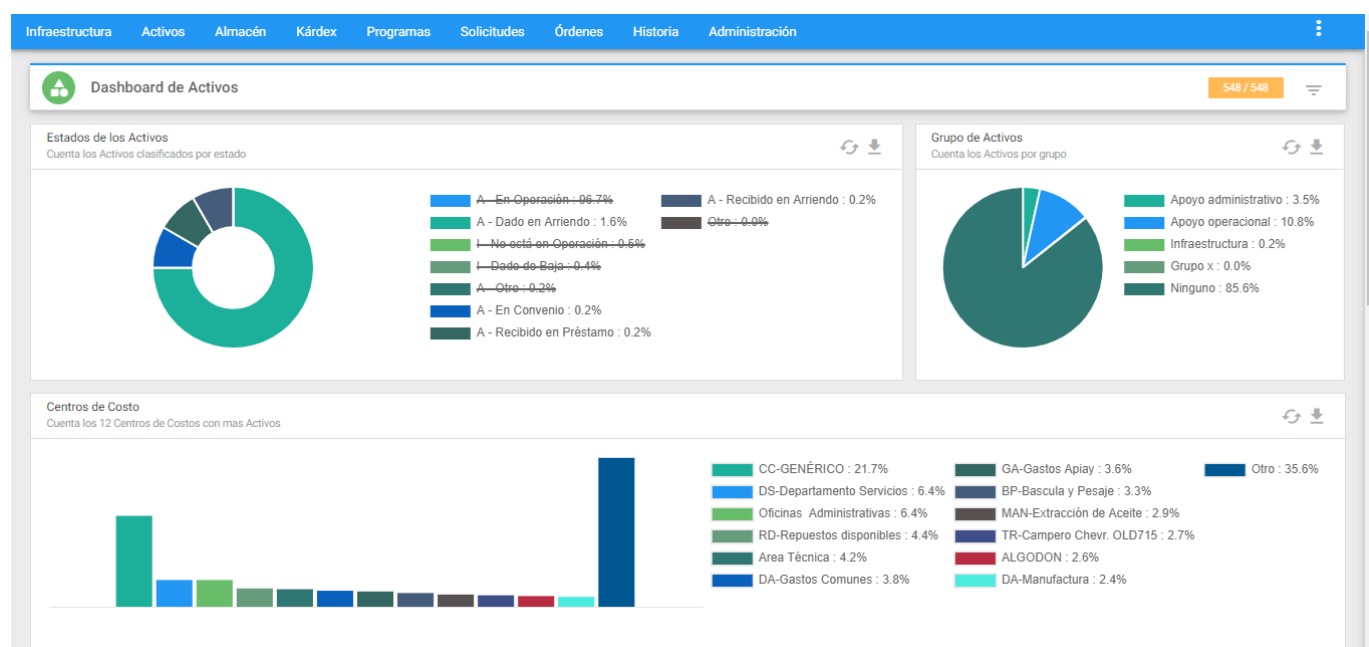


Imagen 83. Activos - Dashboard personalizado

Sí se desea restablecer la información, se debe dar clic al ícono  (actualizar). En cambio, si se desea exportar el gráfico en un formato de imagen, es posible dando clic al ícono de la flecha hacia abajo  como se muestra a continuación:

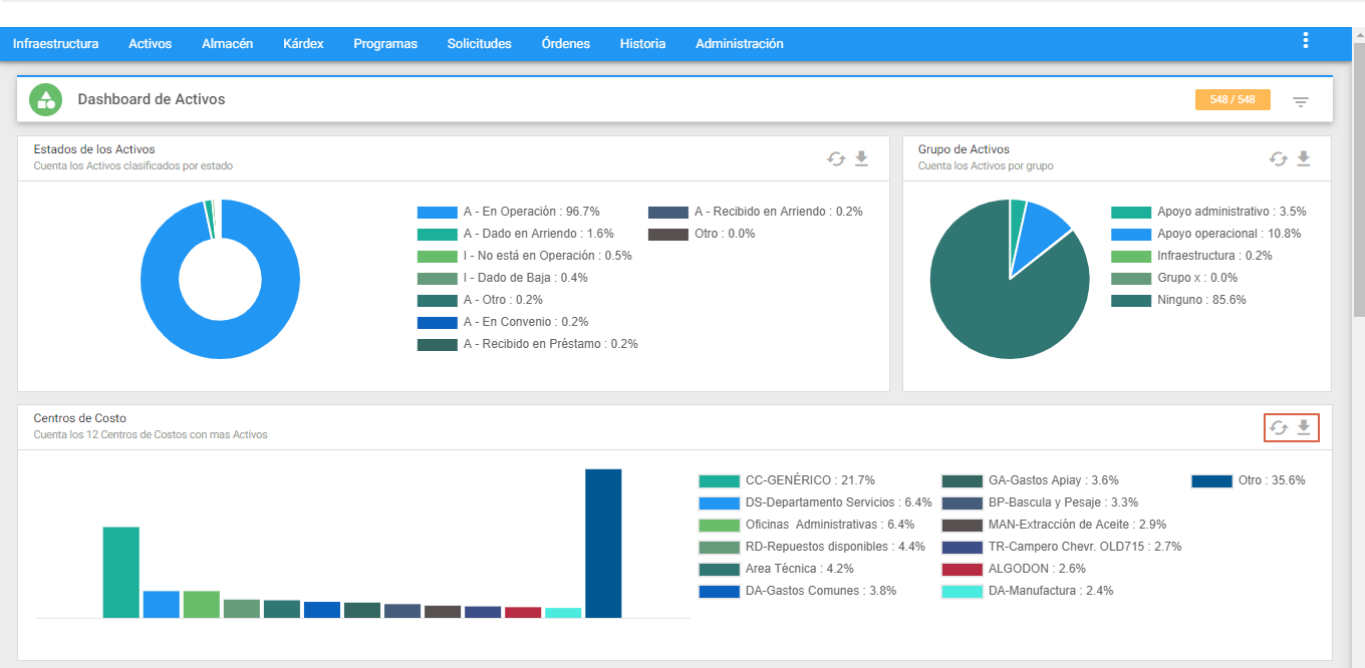


Imagen 84. Activos - Dashboard personalizado