

Gestión de Alertas

Se explican la ventana detalle y todo el proceso para gestionar alertas por medio de ella.



Escrito por WIN Software



Ventana Detalle

Para ingresar al detalle del Activo y hacer gestión de la alerta ingrese dando un clic sobre el registro en el visor, el cual muestra la siguiente ventana detalle:

Imagen 6.8: Tecnovigilancia - Ventana Detalle

El usuario puede actualizar el estado de la alerta del Activo por medio del botón

ACTUALIZAR

En caso de aplicar accione el switch **No Aplica/Aplica** y guarde los cambios:

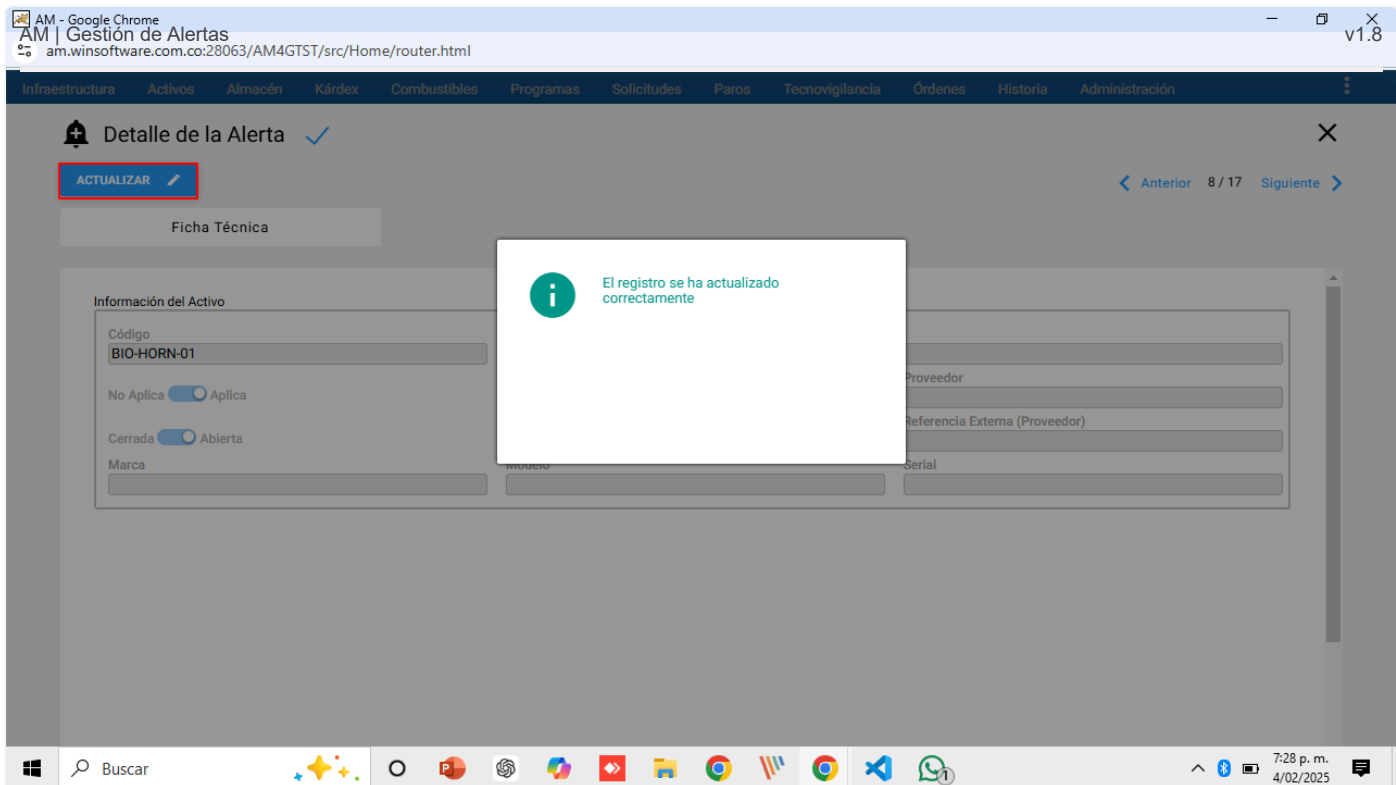


Imagen 6.9: Tecnovigilancia - Actualizar Alerta

A medida que se actualizan las alertas se actualizan los indicadores:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Tecnovigilancia Órdenes Historia Administración			
Alertas			
Código ^	Descripción	Indicadores	Código Registro Sanitario Invm
2101	SISTEMA DE TRANSPORTE 2101 J	● ●	2021DM-002303
2105	SISTEMA DE RECIRCULACION FIP	● ●	2014EBC-0012502
3201QM	QUEMADOR CALDERA N.1	● ●	2015DM-0012932
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TORTA DE FIP	● ●	2023DM-0010390-R1
BLP	LAPAROSCOPIA	● ●	2023DM-0010390-R1
400-03	RECUBRIDORA N.3	● ●	2018DM-0017965
AF01SE	Sist.Elec. Alim. Fleje 1	● ●	2018DM-0017965
BIO-HORN-01	HORNO LABORATORIO	● ●	2021DM-0022793
400-01ME	MOTOR EMBRAGUE RECUB. N.1	● ●	2019EBC-0002241-R1
BRG	REGULACION DE GASES	● ●	2019EBC-0002241-R1
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TORTA DE FIP	● ●	2023DM-0010390-R1
BLP	LAPAROSCOPIA	● ●	2023DM-0010390-R1
3201QM	QUEMADOR CALDERA N.1	● ●	2015DM-0012932
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TORTA DE FIP	● ●	2023DM-0010390-R1
BLP	LAPAROSCOPIA	● ●	2023DM-0010390-R1
400-01ME	MOTOR EMBRAGUE RECUB. N.1	● ●	2019EBC-0002241-R1
BRG	REGULACION DE GASES	● ●	2019EBC-0002241-R1

Indicadores

- Alerta Aplica ●
- Alerta No Aplica ●
- Alerta Abierta ●
- Alerta Cerrada ●

Registros por página: 60 1-17 de 17 / 17

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

Imagen 6.10: Tecnovigilancia - Alerta

De esta manera al ingresar se visualizan los siguientes detalles para la alerta que aplica:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexCombustiblesProgramasSolicitudesParos

TecnovigilanciaÓrdenesHistoriaAdministración

Detalle de la Alerta

ACTUALIZAR

< Anterior

8 / 17

Siguiente >

Ficha Técnica

Información del Activo

Código

BIO-HORN-01

Descripción

HORNO LABORATORIO

No Aplica

Aplica

Cerrada

Abierta

Marca

Código Registro Sanitario Invima

2021DM-0022793

Proveedor

Ubicación Física

Laboratorio Químico

Referencia Externa (Proveedor)

Modelo

Serial

Información de la Alerta

Asunto

Alerta sanitaria sobre: SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE PREPARACIÓN

Nombre del Producto

SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE

Risarc

DA2412-00795

Estado de la Alerta FF Publicación

SEGUIMIENTO

Fuente

IMPORTADOR

Lote

1911011136

Visualizar Alerta

Comentarios y Acciones Realizadas

Comentario

Agregar Comentario

Acciones Realizadas

Agregar Accion Realizada

v1.8

Imagen 6.11: Tecnovigilancia - Detalle Alerta

Es posible hacer la visualización completa del INVIMA accionando el botón

[Visualizar Alerta](#)

The image shows a PDF document titled 'ALERTA No. 430-2024.pdf' from the INVIMA website. The document is a formal alert from the 'Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías'. It details a health alert for a 'SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA CITOMETRÍA DE FLUJO'. The alert number is 430-2024, issued in Bogotá on January 8, 2025. The product name is 'SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA CITOMETRÍA DE FLUJO', with a sanitary registration number of 2021DM-0022793. The commercial presentation is 'presentación individual'. The document is presented in a two-page view within a web browser.

Imagen 6.12: Tecnovigilancia - Detalle Alerta INVIMA

Win Software SAS

3 / 7

Es necesario que se registren los comentarios y las acciones realizadas con respecto a la alerta, accionando el botón **Agregar Comentario** y **Agregar Acción Realizada**:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexCombustiblesProgramasSolicitudesParos

TecnovigilanciaÓrdenesHistoriaAdministración

Detalle de la Alerta

ACTUALIZAR

< Anterior 8 / 17 Siguiente >

Ficha Técnica

Información del Activo

Código

BIO-HORN-01

Descripción

HORNO LABORATORIO

No Aplica

Aplica

Código Registro Sanitario Invima

2021DM-0022793

Proveedor

Cerrada

Abierta

Ubicación Física

Laboratorio Químico

Referencia Externa (Proveedor)

Marca

Modelo

Serial

Información de la Alerta

Asunto

Alerta sanitaria sobre: SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE PREPARACIÓN

Nombre del Producto

SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE

Risarh

DA2412-00795

Estado de la Alerta

FF

Publicación

Fuente

IMPORTADOI

Lote

1911011136

Visualizar Alerta

Comentarios y Acciones Realizadas

Comentario

Se inician procedimientos de revisiones.

Agregar Comentario

Acciones Realizadas

Se procede a retirar el equipo del servicio para revisión, estudio y monitoreo.

Agregar Accion Realizada

Imagen 6.13: Tecnovigilancia - Agregar Comentarios y Acciones

Los comentarios van quedando agregados en una ventana tipo chat:

Win Software SAS

4 / 7

Detalle de la Alerta

ACTUALIZAR

< Anterior 8 / 17 Siguinte >

Ficha Técnica

Información del Activo

Código
BIO-HORN-01

Descripción
HORNO LABORATORIO

Código Registro Sanitario Invima
2021DM-0022793

Proveedor

Cerrada Abierta

Ubicación Física
Laboratorio Químico

Referencia Externa (Proveedor)

Marca

Modelo

Serial

Información de la Alerta

Asunto
Alerta sanitaria sobre: SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE PREPARACIÓN

Nombre del Producto
SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE

Risarh
DA2412-00795

Estado de la Alerta FF Publicación
SEGUIMIENTO

Fuente
2025-01-08

Lote
IMPORTADOI 1911011136

Visualizar Alerta

Comentarios y Acciones Realizadas

Comentario

Acciones Realizadas

Agregar Comentario

Agregar Accion Realizada

Administrador de la Compañía - 2025-02-04 19:53
Se inician procedimientos de revisiones.

Administrador de la Compañía - 2025-02-04 19:53
Se procede a retirar el equipo del servicio para revisión, estudio y monitoreo.

Imagen 6.14: Tecnovigilancia - Agregar Comentarios y Acciones

Además, una vez que una alerta aplique y se encuentre abierta se genera una Orden de Trabajo, todo esto permite agregar documentación y trazabilidad a la gestión de la alerta:

Número OT	Descripción	F/H Creación	Responsable	Pri	F/H Programada	Estado	Indicadores	Cod. Activo	Desc. Act
2025-142	Orden Generada desde Tecnovigilancia por Alerta sanita...	2025-02-04 19:28		2	2025-02-04 19:28	EJ		BIO-HORN-01	HORNO LA
2025-141	Orden Generada desde Tecnovigilancia por Alerta sanita...	2025-02-04 13:19		2	2025-02-04 13:19	EJ		3201QM	QUEMADOI
2025-140	Orden Generada por lectura ALTA en la característica te...	2025-01-30 14:38		2	2025-01-30 14:38	EJ		BMO-MSV-9359	Monitor de
2025-139	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-31 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-138	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-30 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-137	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-29 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-136	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-28 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-135	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-27 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-134	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-26 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-133	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-25 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-132	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-24 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-131	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-23 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-130	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-22 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-129	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-21 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-128	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-20 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-127	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-19 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-126	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-18 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-125	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-17 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-124	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-16 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-123	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-15 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-122	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-14 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-121	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-13 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-120	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-12 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-119	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-11 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-118	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-10 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-117	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-09 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-116	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-08 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR

Registros por página: 60 1-60 de 2384 / 2384

« Primera Página < Anterior 1 Siguinte > Última Página »

Imagen 6.15: Tecnovigilancia - Generación de OT

En el Activo también se visualiza el indicador de alerta sanitaria INVIMA:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Tecnovigilancia Órdenes Historia Administración v1.8

AM | Gestión de Alertas

Activos NUEVO BIO-HORN-01

Código	Descripción	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo
BID	RX IMÁGENES DIAGNOSTICAS	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	
BIO-CAB-01	CABINA DE FLUJO LAMINAR	A - En Operación		CENTRO LABORATORIOS	Laboratorio Químico	
BIO-EST-VA01	ESTERILIZADOR A VAPOR	A - En Operación		WIN Software	CLIS-P01-URGENCIAS.C...	
BIO-HORN-01	HORNO LABORATORIO	A - En Operación		CENTRO LABORATORIOS	Laboratorio Químico	
BIO-TER-01	TERMODESINFECTADORA	A - En Operación		LB-Laboratorio	Man-PExt.Esterilización	Prueba
BIO-UTC-01	ULTRACONGELADOR 578 LITROS	A - En Operación		WIN Software	Laboratorio Químico	
BIQ	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	
BL03	Balanceadora Schenk 110	A - Dado en Presta...		BP-Bascula y Pesaje	Adm.-Personal	
BL03MT	Motor Bal Schenk	A - En Operación		BP-Bascula y Pesaje	Taller Mantenimiento	
BL03MT02	Motor Bal Schenk 02	A - En Operación		BP-Bascula y Pesaje	Taller Mantenimiento	
BLA	LABORATORIO	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	
BLP	LAPAROSCOPIA	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	
BM-MAN-5678	Máquina de Anestesia	A - En Operación		HO-Servicios Médicos	CLIS-P03-QUIROFANO 1	5678.
BMAIHW300	Bomba Aire Honeywell 300	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfatado	
BMAIHW300-1	Bomba Aire Honeywell 300-1	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfatado	
BMAIHW321	Bomba Aire Honeywell 321	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfatado	
BMAIHW324	Bomba Aire Honeywell 324	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfatado	
BMAIHW327	Bomba Aire Honeywell 327	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfatado	
BMAIHW329	Bomba Aire Honeywell 329	A - En Operación		Clinica Nueva Sede Poblado	HMFS-P1.S. Oxigenotera...	8723098
BMAIHW335	Bomba Aire Honeywell 335	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfatado	8723098
BMAIHW524	Bomba Aire Honeywell 524	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento	
BMAIHW525	Bomba Aire Honeywell 525	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento	
BMAIHW529	Creado en la importación de Historia	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	
BMAIHW875	Bomba Aire Honeywell 875	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de embragues	
BMAIHW999	Creado en la importación de Historia	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	
BMO	MONITOREO	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA	1234567890
BMO-MSV-9359	Monitor de signos vitales	A - En Operación		Clinica Nueva Sede Centro	CLIS-P03-QUIROFANO 3	93590

Registros por página: 60 121-180 de 574 / 574

« Primera Página Anterior 3 Siguiente Última Página »

Indicadores

- Activo Raíz
- Activo Con Estado Inactivo
- Ubicación Técnica
- Componente Intercambiable
- Car. Técnicas
- Car. Biomédicas
- Multimedia
- Asignación disponible
- Alerta Tecnovigilancia

Imagen 6.16: Tecnovigilancia - Indicador Alerta Activos

Nota: Para actualizar la alerta ingrese nuevamente al módulo de **Tecnovigilancia** y accione nuevamente el botón **Activos con Alertas**.

Para dar cierre actualice la alerta accionando el switch Cerrada/Abierta y a medida que se cierren las alertas los indicadores se actualizan:

Imagen 6.17: Tecnovigilancia - Cierre Alertas

Imagen 6.18: Tecnovigilancia - Cierre Alertas Activos



Anterior

Ventana Principal

Siguiente

Temas relacionados

[Introducción](#)

[Un vistazo a AM](#)

[Interfaz de Usuario](#)

[Introducción](#)